




Japanese



Association of

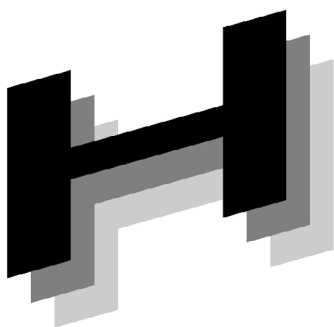

Healthcare



Information



Systems Industry

JAHIS

内視鏡検査レポート

構造化記述規約

Ver.1.1

2026 年 XX 月

一般社団法人

保健医療福祉情報システム工業会

医療システム部会 部門システム委員会

JAHIS 内視鏡検査レポート構造化記述規約 Ver.1.1

まえがき

医療現場において、診療記録、検査報告書、診療情報提供書、各種サマリ等多くの診療文書が使用されている。内視鏡部門において発生する診療文書の多くは、従来各ベンダー独自形式での電子化あるいは PDF といった形式で作成されていることが多かった。ICT の発展と共に電子的な情報共有によりそれら診療文書の情報を治療に活用したり、さらには人的ミスによる医療事故を未然に防止したりすることへの期待が高まっている。この人的ミスには、診療情報や検査結果が対象部門に十分に伝わらなかったため、それらが適切な治療に結びつかなかったことが含まれる。標準化された医療情報交換により診療部門間及び医療機関間の正確な情報連携を実現し、システム間の情報連携がスムーズで確実に行えることが望まれている。

これらに対応するため HL7 CDA (Clinical Document Architecture)による実装も数多く試みられているが、CDAによる記述の裁量範囲が広いため、同じような目的の診療文書が異なった仕様で実装されてしまう可能性がある。そのため可能な限り共通であるべき情報は共通編としてまとめ、共通の考え方で実装することを目的に共通編(「JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編」)が定義された。

共通編 Ver.1.0 は 3 つの個別編とともに検討され、2015 年 8 月に制定された。その後の経験、及び CDA に関する最新の知見を採用した「HL7 CDA に基づく退院時サマリー規約 V1.0」(2017 年 12 月、日本 HL7 協会制定)の内容などを反映し、2020 年 5 月に共通編 Ver.2.0 として改定された。

此の間、内視鏡分野においても検査レポート標準化のニーズは高まってきており、内視鏡固有の仕様、特に日本消化器内視鏡学会が推進する JED (Japan Endoscopy Database) Project と完全に整合性が取れるようにとりまとめ、共通編と組合せて利用することを前提に本規約 Ver.1.0 を作成した。Ver.1.1 では、Ver.1.0 作成後に判明した誤記や不整合箇所、JED 研究機構と調整しきれていなかった箇所の修正、observation クラスにおいて観測の結果算出された時間情報を記載する要素の見直しを行った。共通編および本規約を利用することで電子診療文書の基本部分の共通化、医療の ICT 化に期待された様々な有効性の実現に貢献できれば幸いである。

最後に、本規約の作成にあたり JED に関して多大なご指導ご支援を頂いた JED 研究機構 田中聖人先生(京都第二赤十字病院)、ならびに標準化に関する豊富な知見と実績をもとに様々なご助言を頂いた IHE Endoscopy 横井 英人先生(香川大学医学部附属病院)に深く感謝申し上げます。

2026 年 X 月

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
医療システム部会 部門システム委員会

<< 告知事項 >>

本規約は利用者が本工業会の会員であるか否かにかかわらず、規約の引用を明示することで自由に使用することができるものとします。本規約の部分実装や拡張を行う場合は、実装者の責任において行うこととし、その実装範囲や拡張範囲を関係者に提供、公開することを推奨します。

本規約ならびに本規約に基づいたシステムの導入・運用についてのあらゆる障害や損害について、本工業会はなんらの責任を負わないものとします。ただし、本工業会の会員は本規約についての疑義を申し入れることができ、担当委員会はこれに誠意をもって対応するものとします。

目 次

1. はじめに.....	1
1.1. 本規約と共通編の関係について	1
2. CDA の特徴と扱いについて	2
3. 主な用語と参照規格.....	3
3.1. 主な用語.....	3
3.2. 参照する他規格・マスタ.....	4
4. 適用範囲.....	5
4.1. CDA ドキュメントレベル・テンプレート	5
4.2. CDA セクションレベル・テンプレート	10
4.2.1. メインセクション テンプレート.....	10
4.2.2. サブセクション テンプレート.....	14
4.3. CDA エントリレベル・テンプレート	25
5. 記載の説明.....	41
5.1. HL7 CDA R2 仕様	41
5.2. 規定表の記載基準.....	41
6. 診療記録共通記述部.....	42
7. CDA ヘッダ部.....	43
7.1. CDA 文書のための XML 記述.....	43
7.2. CDA ヘッダの構成.....	43
7.3. 電子診療文書 "ClinicalDocument" の構成	44
7.4. ドキュメントヘッダ情報	46
7.4.1. 患者基本情報 "recordTarget"	46
7.4.2. 作成者および作成システム "author".....	53
7.4.3. 転記者 "dataEnterer"	53
7.4.4. 情報提供者 "informant"	53
7.4.5. 保管組織 "custodian"	53
7.4.6. 受取人 "informationRecipient"	53

7.4.7. 法的文書承認者 "legalAuthenticator"	53
7.4.8. 文書記載責任者 "authenticator"	53
7.4.9. 関係者 "participant"	53
7.4.10. オーダ情報 "inFulfillmentOf/order"	53
7.4.11. 検査・診療等行為 "documentationOf/serviceEvent"	54
7.4.12. 文書関係(文書の付録、変更、置換)"relatedDocument/parentDocument"	58
7.4.13. 承諾 "authorization/consent"	58
7.4.14. 受診時情報 "componentOf/encompassingEncounter"	58
8. CDA ボディ部	59
8.1. CDA ボディ部定義	59
8.2. CDA ボディ部構成	60
8.2.1. 上部内視鏡検査レポート	60
8.2.2. 下部内視鏡検査レポート	61
8.2.3. 小腸内視鏡検査レポート	62
8.2.4. ERCP 内視鏡検査レポート	63
8.3. 共通セクション	64
8.3.1. 患者付帯情報	64
8.3.2. バイタルサイン	64
8.4. 個別セクション	65
8.4.1. メインセクション	65
8.4.2. サブセクション	131
付録 - 1. 本規約で使用するコード類	308
付録 - 1.1. ヘッダ部	308
付録 - 1.2. ボディ部	308
付録 - 1.3. コードシステムとコード表	319
付録 - 1.4. サンプルコード	320
付録 - 2. スキマトロン適合表	372
付録 - 3. 印刷／表示例	387
付録 - 4. 作成者名簿	391


1. はじめに

内視鏡検査には、上部消化管内視鏡検査、下部消化管内視鏡検査(大腸内視鏡検査)、小腸内視鏡検査、胆・膵内視鏡検査、超音波内視鏡検査、気管支内視鏡検査など様々な検査の種類がある。本規約は、これらの検査の種類のうち、JED(Japan Endoscopy Database)Project で定義されている4つの検査種別(上部消化管内視鏡／下部消化管内視鏡／小腸内視鏡／ERCP)を対象とした検査レポートについて規定する。

1.1. 本規約と共通編の関係について

本規約では、共通編(JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0)に記載されていない内視鏡検査レポート固有の仕様を定義した内容を記載しており、各診療文書で共通的に利用可能と思われる仕様は共通編を参照している。したがって、本規約と共通編を組み合わせ使用されたい。

以下の図は、本規約に準拠する内視鏡検査レポートの構造概要図である。

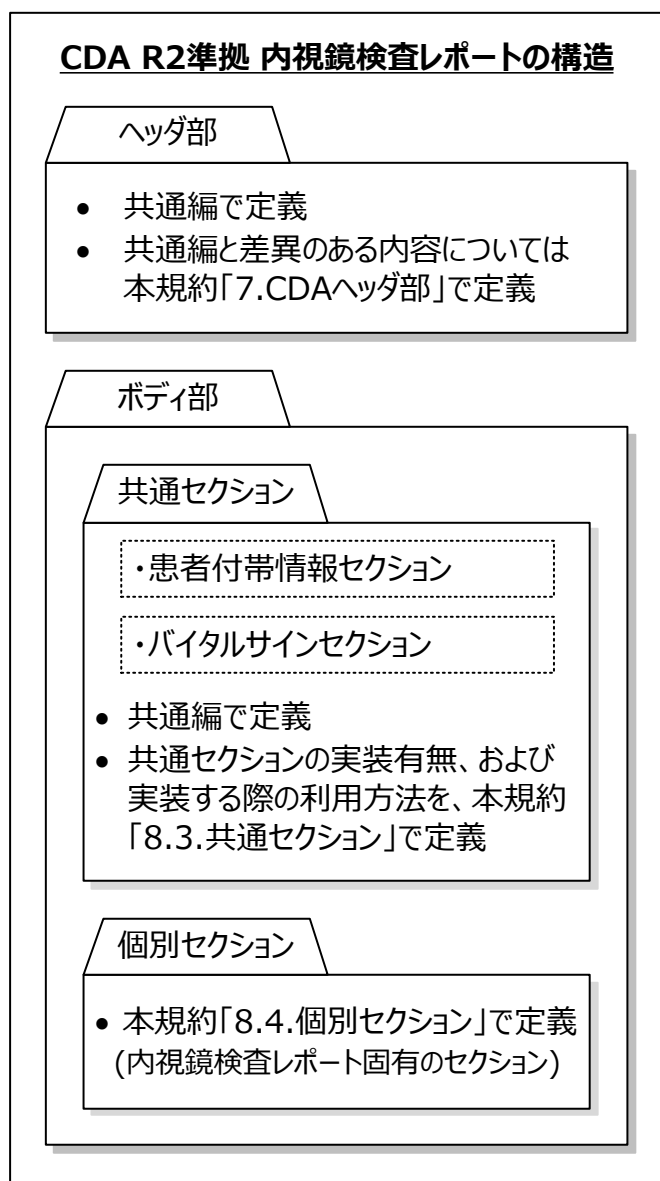

2. CDA の特徴と扱いについて

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「2. CDA の特徴と扱いについて」を参照のこと。

3. 主な用語と参照規格

3.1. 主な用語

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「3. 主な用語」を参照のこと。
以下は、共通編に記載がない用語を追加説明する。

JED (Japan Endoscopy Database) Project:

日本消化器内視鏡学会(JGES)内に設けられた多施設共同研究事業。
本規約は、JED-Project で検査種別毎に定義された基本情報／診断／処置／病理の各用語を使用して内視鏡検査レポートを作成することを前提に策定している。

JED-Project 公式ホームページ: <https://jedproject.jges.net/>

メインセクション:

JED-Project で検査種別毎に定義されている基本情報のメインカテゴリーとしてサブカテゴリーをグルーピングするとともに、総合診断情報を記述するためのセクション

サブセクション:

基本情報のサブカテゴリーの各項目、および JED-Project で診断／処置／病理用語として定義されている各情報を記述するためのセクション

入力項目指標(Type):

JED-Project への参加に際し、基本情報の入力項目指標となるのが“Type”。4 つの Type が存在し、Type 毎に入力項目が分かれる。

Type I :Full DATA。患者背景情報～検査、診断情報を含む
Type II :Type I に準ずる。Type I から患者背景情報を省いた内容
Type III :施設独自(市販のアプリケーション等の利用による)の入力フォーム
Type IV :全指導施設向け。Minimal Terminology

詳細は JED-Project 公式ホームページ「JED 参加 TYPE について」を参照。
参照先 URL: <https://jedproject.jges.net/join/participation-type/>

3.2.参照する他規格・マスタ

本規約では、以下の他規格を参照するとともに、マスタの使用を想定している。

- 規格(規約)

ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards

— HL7 Clinical Document Architecture, Release 2

<https://www.iso.org/standard/44429.html>

※HL7 でもダウンロード可能(共通編参照)

<https://hl7.org/cda/stds/online-navigation/index.html>

※HL7 International の website にて online navigation 版を利用可能

JAHIS 診療文書構造化記述規約共通編 Ver.2.0

<https://www.jahis.jp/standard/detail/id=729>

- マスタ(コード)

JED 用語集・コードセット

<https://jedproject.iges.net/about/terms-download/>

(※) 用語集ダウンロードホームページの「JAHIS 標準 内視鏡検査レポート構造化記述規約に準拠した製品向けの JED 用語」から、コードリスト付の JED 用語集をダウンロード可能

JAN コード

https://www.dsri.jp/jan/about_jan.html

(※) 医療機器の JAN コードは医療機器データベースから検索可能:<https://www.kikidb.jp/>

LOINC(Laboratory Object Identifier and Numerical Code)

<https://loinc.org/>

医薬品 HOT コードマスター

<https://www2.medis.or.jp/master/hcode/>

4. 適用範囲

本規約は、内視鏡検査レポートのうち、JED-Project で定義されている以下 4 つの検査種別に求められる記述内容について、CDA R2 のテンプレートを利用して規定している。

- 上部内視鏡検査(頭頸部、食道、胃、十二指腸)
- 下部内視鏡検査(大腸)
- 小腸内視鏡検査(小腸)
- ERCP(主乳頭、副乳頭、胆道、膵臓)

以下に、本規約で定義したテンプレートの規定表(概要部)を示す。

4.1.CDA ドキュメントレベル・テンプレート

- 上部内視鏡検査(頭頸部、食道、胃、十二指腸)

Template:上部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1 - Endoscopy Report (upper endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている上部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

表 4-1 上部内視鏡検査レポート セクション定義一覧

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
患者基本情報(JED)		1..1	M
	年齢	1..1	M
患者背景情報(上部)		1..1	M
	ASA Grade	0..1	R
	抗血栓薬	1..1	M
	喫煙	0..1	R
	飲酒	0..1	R
	悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	0..1	R
	他臓器癌歴	0..1	R
	萎縮度(木村竹本分類)	1..1	M
	ヘリコバクター・ピロリ感染状態	1..1	M
依頼情報(上部)		1..1	M
	予定性	0..1	R
	外来・入院	1..1	M
	検査目的	0..1	R
	治療目的	0..1	R
検査時情報(上部)		1..1	M
	挿入経路	0..1	R
	機種名	1..1	M
	鎮痙剤使用	0..1	R
	鎮静・鎮痛・麻酔	1..1	M
	送気	0..1	R
	観察範囲	0..1	R
	画像強調観察	0..1	R

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
	内視鏡看護師・技師名	1..1	M
偶発症情報(上部)		1..1	M
	手技中偶発症	1..1	M
	手技後偶発症	0..1	R
	30 日以内の死亡	0..1	R
総合診断(上部)		1..1	M
	頭頸部診断	0..1	R
	食道診断	0..1	R
	胃診断	0..1	R
	十二指腸診断	0..1	R
	空腸診断	0..1	R
	シェーマ図	0..1	R
	病理結果	0..1	R

※ 詳細は、[「8.2.1.上部内視鏡検査レポート」](#)参照

● 下部内視鏡検査(大腸)

Template: 下部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2 – Endoscopy Report (colonoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている下部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

表 4-2 下部内視鏡検査レポート セクション定義一覧

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
患者基本情報(JED)		1..1	M
	年齢	1..1	M
患者背景情報(下部)		1..1	M
	検査回数(生涯)	1..1	M
	ASA Grade	0..1	R
	抗血栓薬	1..1	M
	喫煙	0..1	R
	飲酒	0..1	R
	大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	0..1	R
	他臓器癌歴	0..1	R
	腹部手術歴	0..1	R
依頼情報(下部)		1..1	M
	予定性	0..1	R
	外来・入院	1..1	M
	検査目的	0..1	R
検査時情報(下部)		1..1	M
	機種名	1..1	M
	鎮痙剤使用	1..1	M
	鎮静・鎮痛・麻酔	1..1	M

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
	送気	0..1	R
	到達部位	0..1	R
	画像強調観察	0..1	R
	挿入時間	1..1	M
	全施行時間	0..1	R
	腸管前処置	0..1	R
	内視鏡看護師・技師名	1..1	M
偶発症情報(下部)		1..1	M
	手技中偶発症	1..1	M
	手技後偶発症	0..1	R
	30 日以内の死亡	0..1	R
総合診断(下部)		1..1	M
	大腸診断	0..1	R
	回腸末端診断	0..1	R
	シェーマ図	0..1	R
	病理結果	0..1	R

※ 詳細は、[「8.2.2.下部内視鏡検査レポート」](#)参照

● 小腸内視鏡検査(小腸)

Template:小腸内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3 – Endoscopy Report (small intestinal endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている小腸内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

4-3 小腸内視鏡検査レポート セクション定義一覧

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
患者基本情報(JED)		1..1	M
	年齢	1..1	M
患者背景情報(小腸)		1..1	M
	検査回数(生涯)	0..1	R
	ASA Grade	0..1	R
	抗血栓薬	1..1	M
	喫煙	0..1	R
	飲酒	0..1	R
	悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	0..1	R
	他臓器癌歴	0..1	R
	腹部手術歴	0..1	R
依頼情報(小腸)		1..1	M
	予定性	0..1	R
	外来・入院	1..1	M
	検査目的	0..1	R
検査時情報(小腸)		1..1	M

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
	挿入経路	1..1	M
	機種名	1..1	M
	鎮座剤使用	0..1	R
	鎮静・鎮痛・麻酔	1..1	M
	送気	1..1	M
	観察範囲	0..1	R
	画像強調観察	0..1	R
	挿入時間	1..1	M
	抜去時間	1..1	M
	治療時間	0..1	R
	腸管前処置	0..1	R
	内視鏡看護師・技師名	1..1	M
偶発症情報(小腸)		1..1	M
	手技中偶発症	1..1	M
	手技後偶発症	0..1	R
	30 日以内の死亡	0..1	R
総合診断(小腸)		1..1	M
	小腸診断	0..1	R
	シェーマ図	0..1	R
	病理結果	0..1	R

※ 詳細は、[「8.2.3.小腸内視鏡検査レポート」](#)参照

● ERCP(主乳頭、副乳頭、胆道、膵臓)

Template: ERCP 検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4 – Endoscopy Report (ERCP)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている ERCP 検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

表 4-3 ERCP 検査レポート セクション定義一覧

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
患者基本情報(JED)		1..1	M
	年齢	1..1	M
患者背景情報(ERCP)		1..1	M
	ASA Grade	0..1	R
	抗血栓薬	1..1	M
	喫煙	0..1	R
	飲酒	0..1	R
	悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	0..1	R
	他臓器癌歴	0..1	R
	腹部手術歴	0..1	R
依頼情報(ERCP)		1..1	M
	予定性	0..1	R

メインセクション	サブセクション	Card.	Conf.
	外来・入院	1..1	M
	検査目的	0..1	R
検査時情報(ERCP)		1..1	M
	機種名	1..1	M
	鎮座剤使用	0..1	R
	鎮静・鎮痛・麻酔	1..1	M
	送気	0..1	R
	到達部位	0..1	R
	画像強調観察	0..1	R
	乳頭までの到達時間	0..1	R
	全施行時間	1..1	M
	全照射時間	0..1	R
	施行前の治療の有無	0..1	R
	内視鏡看護師・技師名	1..1	M
	胆道造影範囲	0..1	R
	膵管造影範囲	0..1	R
	胆管挿管	0..1	R
	膵管挿管	0..1	R
	胆管径	0..1	R
	膵管径	0..1	R
	ERCP 難度	0..1	R
	専攻医が施行した場合の完遂率(%)	0..1	R
	最初の胆管へのアプローチ法	0..1	R
	深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数	0..1	R
	最終的な深部挿入時のアプローチ方法	0..1	R
検査後情報(ERCP)		1..1	M
	翌日の amylase 値	1..1	M
偶発症情報(ERCP)		1..1	M
	偶発症(ERCP)	1..1	M
	30 日以内の死亡	0..1	R
総合診断(ERCP)		1..1	M
	主乳頭(ERCP)診断	0..1	R
	副乳頭(ERCP)診断	0..1	R
	胆道(ERCP)診断	0..1	R
	膵(ERCP)診断	0..1	R
	シェーマ図	0..1	R
	病理結果	0..1	R

※ 詳細は、[「8.2.4.ERCP 内視鏡検査レポート」](#)参照

4.2.CDA セクションレベル・テンプレート

4.2.1.メインセクション テンプレート

Template:患者基本情報(JED)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1 – Patient's Basic Information (JED) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.1.1.患者基本情報\(JED\)」](#)参照

Template:患者背景情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2 – Patient Background Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.2.患者背景情報\(上部\)」](#)参照

Template:患者背景情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2 – Patient Background Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.3.患者背景情報\(下部\)」](#)参照

Template:患者背景情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2 – Patient Background Information (small intestinal endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.4.患者背景情報\(小腸\)」](#)参照

Template:患者背景情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2 – Patient Background Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の患者背景情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.5.患者背景情報\(ERCP\)」](#)参照

Template:依頼情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3 – Information to Be Requested (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.6.依頼情報\(上部\)」](#)参照

Template:依頼情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3 – Information to Be Requested (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.7.依頼情報\(下部\)」](#)参照

Template:依頼情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3 – Information to Be Requested (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.8.依頼情報\(小腸\)」](#)参照

Template:依頼情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3 – Information to Be Requested (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の依頼情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.9.依頼情報\(ERCP\)」](#)参照

Template:検査時情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4 – Examination Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.10.検査時情報\(上部\)」](#)参照

Template:検査時情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4 – Examination Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.11.検査時情報\(下部\)」](#)参照

Template:検査時情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4 – Examination Information (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.12.検査時情報\(小腸\)」](#)参照

Template:検査時情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4 – Examination Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の検査時情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.13.検査時情報\(ERCP\)」](#)参照

Template:検査後情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5 – Post-Examination Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の検査後情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.14.検査後情報\(ERCP\)」](#)参照

Template:偶発症情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6 – Adverse Events Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.15.偶発症情報\(上部\)」](#)参照

Template:偶発症情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6 – Adverse Events Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.16.偶発症情報\(下部\)」](#)参照

Template:偶発症情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6 – Adverse Events Information (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.17.偶発症情報\(小腸\)」](#)参照

Template:偶発症情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6 – Adverse Events Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の偶発症情報のサブカテゴリの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.1.18.偶発症情報\(ERCP\)」](#)参照

Template:総合診断(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7 – Comprehensive Diagnosis (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	上部内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断/処置/病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

※ 詳細は、[「8.4.1.19.総合診断\(上部\)」](#)参照

Template:総合診断(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7 – Comprehensive Diagnosis (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	下部内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

※ 詳細は、[「8.4.1.20.総合診断\(下部\)」](#)参照

Template:総合診断(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7 – Comprehensive Diagnosis (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	小腸内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

※ 詳細は、[「8.4.1.21.総合診断\(小腸\)」](#)参照

Template:総合診断(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7 – Comprehensive Diagnosis (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	ERCP 検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

※ 詳細は、[「8.4.1.22.総合診断\(ERCP\)」](#)参照

4.2.2. サブセクション テンプレート

Template:年齢セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1 – Age Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの 1 つ “年齢”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.1.年齢」](#)参照

Template:検査回数(生涯)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1 – Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “検査回数(生涯)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.2.検査回数\(生涯\)」](#)参照

Template:ASA Grade セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2 – ASA Physical Status Classification Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “ASA Grade”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.3.ASA Grade」](#)参照

Template:抗血栓薬セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3 – Antithrombotic Agents Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.4.抗血栓薬」](#)参照

Template:喫煙セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4 – Smoker/Non-smoker Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “喫煙”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.5.喫煙」](#)参照

Template:飲酒セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5 – Drinking History and Condition Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “飲酒”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.6.飲酒」](#)参照

Template:悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6 – Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴\(両親、兄弟・姉妹・実子\)」](#)参照

Template:大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7 – Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.8.大腸癌家族歴\(両親、兄弟・姉妹・実子\)」](#)参照

Template:他臓器癌歴セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8 – Previous History of Other Organ Cancer Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “他臓器癌歴”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.9.他臓器癌歴」](#)参照

Template:萎縮度(木村竹本分類)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9 – Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “萎縮度(木村竹本分類)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.10.萎縮度\(木村竹本分類\)」](#)参照

Template:ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10 – Helicobacter Pylori and Infection State Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ヘリコバクター・ピロリ感染状態”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.11.ヘリコバクター・ピロリ感染状態」](#)参照

Template:腹部手術歴セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11 – Previous Record of Abdominal Surgeries Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “腹部手術歴”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.12.腹部手術歴」](#)参照

Template:予定性セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1 – Procedure Urgency Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “予定性”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.13.予定性」](#)参照

Template:外来・入院セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2 – Patient Type Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “外来・入院”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.14.外来・入院」](#)参照

Template:検査目的セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3 – Purpose of Examination Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “検査目的”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.15.検査目的」](#)参照

Template:治療目的セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4 – Purpose of Treatment Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリの 1 つ “治療目的”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.16.治療目的」](#)参照

Template:挿入経路セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1 – Insertion Route Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “挿入経路”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.17.挿入経路」](#)参照

Template:機種名セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2 – Vender Model Number Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “機種名”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.18.機種名\(スコープ機種名\)」](#)参照

Template:鎮痙剤使用セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3 – Status of Use of Antispasmodic Agents Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “鎮痙剤使用”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.19.鎮痙剤使用」](#)参照

Template:鎮静・鎮痛・麻酔セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4 – Sedation/Analgesia/Anesthesia Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “鎮静・鎮痛・麻酔”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」](#)参照

Template:送気セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5 – Type of Air/Gas Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “送気”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.21.送気」](#)参照

Template:観察範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6 – Scope of Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “観察範囲”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.22.観察範囲」](#)参照

Template:到達部位セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7 – Reached Area Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “到達部位”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.23.到達部位」](#)参照

Template:画像強調観察セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8 – Image-Enhanced Endoscopy Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “画像強調観察”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.24.画像強調観察」](#)参照

Template:挿入時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9 – Insertion Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “挿入時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.25.挿入時間」](#)参照

Template:抜去時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10 – Withdrawal Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “抜去時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.26.抜去時間\]](#)参照

Template:治療時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11 – Total Treatment Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “治療時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.27.治療時間\]](#)参照

Template:乳頭部までの到達時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12 – Time to Access the Major Papilla (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “乳頭部までの到達時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.28.乳頭部までの到達時間\]](#)参照

Template:全施行時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13 – Total Procedure Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “全施行時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.29.全施行時間\]](#)参照

Template:腸管前処置セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14 – Bowel Preparation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “腸管前処置”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.30.腸管前処置\]](#)参照

Template:全照射時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15 – Total Exposure Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全照射時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.31.全照射時間」](#)参照

Template:施行前の治療の有無セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16 – Prior Endoscopic Intervention Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “施行前の治療の有無”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.32.施行前の治療の有無」](#)参照

Template:内視鏡看護師・技師名セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17 – Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “内視鏡看護師・技師名”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」](#)参照

Template:胆道造影範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18 – Extent of Cholangiography Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆道造影範囲”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.34.胆道造影範囲」](#)参照

Template:膵管造影範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19 – Extent of Pancreatography Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管造影範囲”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.35.膵管造影範囲」](#)参照

Template:胆管挿管セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20 – Cannulation for Bile Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管挿管”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.36.胆管挿管\]](#)参照

Template:膵管挿管セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21 – Cannulation for Pancreas Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管挿管”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.37.膵管挿管\]](#)参照

Template:胆管径セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22 – Bile Duct Diameter Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.38.胆管径\]](#)参照

Template:膵管径セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23 – Pancreas Duct Diameter Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.39.膵管径\]](#)参照

Template:ERCP 難度セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24 – Grading the Difficulty of ERCP Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “ERCP 難度”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.40.ERCP 難度\]](#)参照

Template:専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25 – Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “専攻医が施行した場合の完遂率(%)”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.41.専攻医が施行した場合の完遂率\(%\)」](#)参照

Template:最初の胆管へのアプローチ法セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26 – First Approach Method to Bile Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最初の胆管へのアプローチ法”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.42.最初の胆管へのアプローチ法」](#)参照

Template:深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27 – Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.43.深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数」](#)参照

Template:最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28 – Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最終的な深部挿入時のアプローチ方法”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.44.最終的な深部挿入時のアプローチ方法」](#)参照

Template:翌日の amylase 値セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1 – Amylase Value of Next Day Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査後情報のサブカテゴリーの 1 つ “翌日の amylase 値”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.45.翌日の amylase 値」](#)参照

Template:手技中偶発症セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1 – Adverse Events during Procedure Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.46.手技中偶発症」](#)参照

Template:手技後偶発症セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2 – Adverse Events after Procedure Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技後偶発症”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.47.手技後偶発症」](#)参照

Template:偶発症(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3 – Adverse Events by ERCP Procedure Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)”を記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」](#)参照

Template:30 日以内の死亡セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4 – Death within 30 Days Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “30 日以内の死亡”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.49. 30 日以内の死亡」](#)参照

Template:臓器別診断セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1 – Specific Organ's Diagnosis Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	診断処置用語
解説	総合診断情報を構成するサブカテゴリーの 1 つとして、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用し、臓器別の診断情報を記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:シェーマ図セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2 – Schema Diagram Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シェーマ図を扱う場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.51.シェーマ図」](#)参照

Template:病理結果セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3 – Pathological Results Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	病理診断レポートを扱う場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.52.病理結果」](#)参照

4.3.CDA エントリレベル・テンプレート

Template:年齢オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1 – Age Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの1つ “年齢”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.1.年齢」](#)参照

Template:検査回数(生涯)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1 – Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “検査回数(生涯)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.2.検査回数\(生涯\)」](#)参照

Template:ASA Grade オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2 – ASA Physical Status Classification Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ASA Grade”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.3.ASA Grade」](#)参照

Template:抗血栓薬オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3 – Antithrombotic Agents Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.4.抗血栓薬」](#)参照

Template:休薬期間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1 – Drug Withdrawal Period Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”の“休薬期間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.4.抗血栓薬」](#)参照

Template:置換オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2 – Replace Medicine Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”の“置換”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.4.抗血栓薬」](#)参照

Template:喫煙オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4 – Smoker/Non-smoker Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “喫煙”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.5.喫煙」](#)参照

Template:飲酒オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5 – Drinking History and Condition Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “飲酒”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.6.飲酒」](#)参照

Template:悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6 – Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴\(両親、兄弟・姉妹・実子\)」](#)参照

Template:大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7 – Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.8.大腸癌家族歴\(両親、兄弟・姉妹・実子\)」](#)参照

Template:他臓器癌歴オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8 – Previous History of Other Organ Cancer Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “他臓器癌歴”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.9.他臓器癌歴」](#)参照

Template:萎縮度(木村竹本分類)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9 – Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “萎縮度(木村竹本分類)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.10.萎縮度\(木村竹本分類\)」](#)参照

Template:ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10 – Helicobacter Pylori and Infection State Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ヘリコバクター・ピロリ感染状態”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.11.ヘリコバクター・ピロリ感染状態」](#)参照

Template:腹部手術歴オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11 – Previous Record of Abdominal Surgeries Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “腹部手術歴”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.12.腹部手術歴」](#)参照

Template:予定性オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1 – Procedure Urgency Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “予定性”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.13.予定性」](#)参照

Template:外来・入院オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2 – Patient Type Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “外来・入院”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.14.外来・入院」](#)参照

Template:検査目的オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3 – Purpose of Examination Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “検査目的”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.15.検査目的」](#)参照

Template:治療目的オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4 – Purpose of Treatment Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリの 1 つ “治療目的”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.16.治療目的」](#)参照

Template:挿入経路オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1 – Insertion Route Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “挿入経路”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.17.挿入経路」](#)参照

Template:機種名オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2 – Vender Model Number of Endoscope Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “機種名”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.18.機種名\(スコープ機種名\)」](#)参照

Template:鎮痙剤使用オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3 – Status of Use of Antispasmodic Agents Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “鎮痙剤使用”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.19.鎮痙剤使用」](#)参照

Template:鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4 – Sedation/Analgesia/Anesthesia Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリ
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリの 1 つ “鎮静・鎮痛・麻酔”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」](#)参照

Template:送気オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5 – Type of Air/Gas Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “送気”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.21.送気」](#)参照

Template:観察範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6 – Scope of Observation Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “観察範囲”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.22.観察範囲」](#)参照

Template:到達部位オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7 – Reached Area Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “到達部位”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.23.到達部位」](#)参照

Template:画像強調観察オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8 – Image-Enhanced Endoscopy Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “画像強調観察”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.24.画像強調観察」](#)参照

Template:挿入時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9 – Insertion Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “挿入時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.25.挿入時間」](#)参照

Template:抜去時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10 – Withdrawal Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “抜去時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.26.抜去時間\]](#)参照

Template:治療時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11 – Total Treatment Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “治療時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.27.治療時間\]](#)参照

Template:乳頭部までの到達時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12 – Time to Access the Major Papilla (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “乳頭部までの到達時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.28.乳頭部までの到達時間\]](#)参照

Template:全施行時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13 – Total Procedure Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全施行時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.29.全施行時間\]](#)参照

Template:腸管前処置オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14 – Bowel Preparation Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “腸管前処置”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[\[8.4.2.30.腸管前処置\]](#)参照

Template:全照射時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15 – Total Exposure Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全照射時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.31.全照射時間」](#)参照

Template:施行前の治療の有無オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16 – Prior Endoscopic Intervention Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “施行前の治療の有無”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.32.施行前の治療の有無」](#)参照

Template:内視鏡看護師・技師名オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17 – Names or the number of Endoscopy Nurses and
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “内視鏡看護師・技師名”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」](#)参照

Template:胆道造影範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18 – Extent of Cholangiography Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆道造影範囲”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.34.胆道造影範囲」](#)参照

Template:膵管造影範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19 – Extent of Pancreatography Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管造影範囲”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.35.膵管造影範囲」](#)参照

Template:胆管挿管オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20 – Cannulation for Bile Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管挿管”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.36.胆管挿管\]](#)参照

Template:膵管挿管オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21 – Cannulation for Pancreas Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管挿管”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.37.膵管挿管\]](#)参照

Template:胆管径オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22 – Bile Duct Diameter Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.38.胆管径\]](#)参照

Template:胆管径副情報オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1 – Bile Duct Diameter (Sub Information) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”の“副情報”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.38.胆管径\]](#)参照

Template:膵管径オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23 – Pancreas Duct Diameter Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[\[8.4.2.39.膵管径\]](#)参照

Template:膵管径副情報オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1 – Pancreas Duct Diameter (Sub Information) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”の“副情報”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.39.膵管径」](#)参照

Template:ERCP 難度オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24 – Grading the Difficulty of ERCP Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “ERCP 難度”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.40.ERCP 難度」](#)参照

Template:専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25 – Completion Rate of the Procedure by Resident Physician (%)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “専攻医が施行した場合の完遂率(%)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.41.専攻医が施行した場合の完遂率\(%\)」](#)参照

Template:最初の胆管へのアプローチ法オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26 – First Approach Method to Bile Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最初の胆管へのアプローチ法”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.42.最初の胆管へのアプローチ法」](#)参照

Template:深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27 – Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.43.深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数」](#)参照

Template:最終的な深部挿入時のアプローチ方法オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26 - Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最終的な深部挿入時のアプローチ方法”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.44.最終的な深部挿入時のアプローチ方法」](#)参照

Template:翌日の amylase 値オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1 - Amylase Value of Next Day Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査後情報のサブカテゴリーの 1 つ “翌日の amylase 値”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.45.翌日の amylase 値」](#)参照

Template:手技中偶発症オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1 - Adverse Events during Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.46.手技中偶発症」](#)参照

Template:対応オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1 - Handling (Actions) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”の“対応”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.46.手技中偶発症」](#)、[「8.4.2.47.手技後偶発症」](#)参照

Template:転帰オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2 - Outcome Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”の“転帰”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.46.手技中偶発症」](#)、[「8.4.2.47.手技後偶発症」](#)、[「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」](#)参照

Template:手技後偶発症オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2 – Adverse Events after Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技後偶発症”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.47.手技後偶発症」](#)参照

Template:偶発症(ERCP)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3 – Adverse Events by ERCP Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」](#)参照

Template:程度オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3 – Degree Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)”の“程度”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」](#)参照

Template:合併症確認日数オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4 – Number of Confirmed Days of Complication Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)”の“合併症確認日数”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

※ 詳細は、[「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」](#)参照

Template:30 日以内の死亡オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4 – Death within 30 Days Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “30 日以内の死亡”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.49. 30 日以内の死亡」](#)参照

Template:質的診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11 – Characterization Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—質的診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“質的診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:処置プロシージャ

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12 – Endoscopic Procedure
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	処置用語
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“処置”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:存在所見オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19 – Findings Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—存在所見
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“存在所見”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:食道静脈瘤-所見詳細オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20 – Esophageal Varices - Findings Details Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—食道静脈瘤—所見詳細
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“食道静脈瘤—所見詳細”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。質的診断が“食道静脈瘤”の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:膵・胆道内視鏡アクト

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22 – Pancreatic and Biliary Endoscope Act
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—膵・胆道内視鏡
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“膵・胆道内視鏡”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:深達度／深達度予測オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24 - Invasion Depth／Invasion Depth Prediction Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—深達度／深達度予測
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“深達度”、“深達度予測”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:胆道肉眼型アクト

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25 - Biliary Duct Macroscopic Type Act
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—胆道肉眼型
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“胆道肉眼型”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:超音波所見オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27 - Ultrasound Findings Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波所見
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波所見”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:超音波診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28 - Ultrasound Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29 - Ultrasound Diagnosis of Cancer Progress Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波進展度診断 癌進展度診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波進展度診断 癌進展度診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:病理組織診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21 – Histopathological Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—病理組織診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“病理組織診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:組織診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30 – Tissue Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—組織診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“組織診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:検査画像 1 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1 – Inspection Image 1 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	検査画像をレポートに内包する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:検査画像 2 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2 – Inspection Image 2 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	検査画像のリンクソースを指定する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.50.臓器別診断」](#)参照

Template:シェーマ図 1 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1 – Schema Diagram 1 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シェーマ図をレポートに内包する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.51.シェーマ図」](#)参照

Template:シェーマ図 2 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2 – Schema Diagram 2 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シェーマ図のリンクソースを指定する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.51.シェーマ図」](#)参照

Template:病理結果オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1 – Pathological Results Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	病理診断レポートを扱う場合に使用するエントリレベルのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 詳細は、[「8.4.2.52.病理結果」](#)参照

5. 記載の説明

5.1. HL7 CDA R2 仕様

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「5.1. HL7 CDA R2 仕様」を参照のこと。

5.2. 規定表の記載基準

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「5.2. 規定表の記載基準」を参照のこと。

6. 診療記録共通記述部

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「6. 診療記録共通記述部」を参照のこと。

7. CDA ヘッダ部

7.1.CDA 文書のための XML 記述

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.1. CDA 文書のための XML 記述」を参照のこと。

7.2.CDA ヘッダの構成

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.2. CDA ヘッダの構成」を参照のこと。

以下は、共通編との差異のみを記載する。

JED-Project で要求されている項目をヘッダ部に記述するため、共通編のテンプレート”JP Realm ヘッダ”に対し、本規約で定義する以下 4 つの検査種別の CDA ドキュメントレベルのテンプレートすべて共通で、recordTarget および documentationOf に内視鏡検査レポート固有の制約を設ける。

Template:上部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1 – Endoscopy Report (upper endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている上部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Template:下部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2 – Endoscopy Report (colonoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている下部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Template:小腸内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3 – Endoscopy Report (small intestinal endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている小腸内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Template:ERCP 検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4 – Endoscopy Report (ERCP)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている ERCP 検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument					
	recordTarget	1..1	M		[7.4.1. 患者基本情報] 参照
	documentationOf	1..1	M		[7.4.11. 検査診療行為] 参照

7.3. 電子診療文書 "ClinicalDocument"の構成

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.3. 電子診療文書"ClinicalDocument"の構成」を参照のこと。

以下は、共通編との差異のみを記載する。

(1) テンプレート ID "templateId"

ドキュメントレベルのテンプレート ID を指定する。ここでは、共通編としてのヘッダのテンプレート ID [1..1]と、内視鏡検査レポートの検査種別毎のドキュメントレベルのテンプレート ID [1..1]を指定する。

- ① 共通に使用するヘッダのテンプレート ID:1.2.392.200270.3.2.1.1.1.1(共通編で規定)
- ② 検査種別毎のテンプレート ID:

検査種別	テンプレート ID
上部内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1
下部内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2
小腸内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3
ERCP 検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4

(2) 電子診療文書のコード、名称 "code"[1..1]

内視鏡検査レポートでは、検査種別毎に以下のコード、名称を使用する。

検査種別	文書コード	名称（日本語表記 / 英語表記）
上部内視鏡検査レポート	18751-8	上部消化管内視鏡報告書 / Endoscopy study
下部内視鏡検査レポート	18746-8	下部消化管内視鏡報告書 / Colonoscopy study
小腸内視鏡検査レポート	28018-0	小腸内視鏡報告書 / Enteroscopy Study
ERCP 検査レポート	28016-4	ERCP 報告書/ ERCP Study

【例】上部内視鏡検査レポート

```
<code code="18751-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC" displayName="上部消化管内視鏡報告書"/>
```

表 7-1 ClinicalDocument

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument					ClinicalDocument ヘッダ
S	@classCode	1..1	F	DOCCLIN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@modeCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
0010	realmCode	1..1	M		適用国
	@code	1..1	F	JP	共通編指定値。日本国内向け仕様
0020	typeId	1..1	M		準拠している CDA R2 規格を識別する
	@root	1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	固定値
	@extension	1..1	F	POCD HD000040	固定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
0030	templateId	1..1	M		共通編定義のヘッダのテンプレート ID (ドキュメントレベル)
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.1.1 .1.1	共通編指定値。 ヘッダのテンプレート ID
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列
X031	templateId	1..1	M		内視鏡検査レポートのドキュメントレベルのテンプレート ID
	@root	1..1	M		検査種別に応じ、以下いずれかの値を指定する 1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1(上部) 1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2(下部) 1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3(小腸) 1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4(ERCP)
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。 文字列
	id	1..1	M		文書 ID
	@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
	@extension	1..1	M		電子診療文書の文書 ID
X032	code	1..1	M		文書コード・名称。
	@code	1..1	M		検査種別に応じ、以下いずれかの値を指定する 18751-8(上部) 18746-8(下部) 28018-0(小腸) 28016-4(ERCP)
	@codeSystem	1..1	M	2.16.840.1.113883.6.1	LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	LOINC	コードシステムの名称。
	@displayName	1..1	M		検査種別に応じ、以下いずれかの値を指定する 上部消化管内視鏡報告書 下部消化管内視鏡報告書 小腸内視鏡報告書 ERCP 報告書
	title	0..1	O		電子診療文書のタイトル。文書に一意のタイトルをつけたい場合に使用する
	text()				例: JAHIS 病院上部内視鏡検査レポート
0040	effectiveTime	1..1	M		初版作成日時
	@value	1..1	M		内視鏡検査レポートの初版作成日時
0050	confidentialityCode	1..1	M		機密性コード。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 7-1 HL7 V3 定義表 機密性コード」参照

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@code	1..1	M		デフォルト値は"N"
	@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.25	共通編指定値
0060	languageCode	0..1	O		使用言語
	@code	1..1	F	ja-JP	共通編指定値。languageCode を指定する場合、値は"ja-JP" (日本語) 固定
	setId	0..1	O		ドキュメントグループ ID
	@ root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
	@ extension	1..1	M		内視鏡検査レポートのドキュメントグループ ID
	versionNumber	0..1	O		ドキュメントグループ内改版番号
	@value	1..1	M		初版の値は"1"

(3) ClinicalDocument XML 記述例(上部内視鏡検査レポート)

```

<?xml version="1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd">
  <realmCode code="JP"/>
  <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- 共通編 Ver.2.0 で定義されたヘッダのテンプレート ID(ドキュメントレベル) -->
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.1.1.1"/>
  <!-- 上部内視鏡検査レポートのドキュメントレベルのテンプレート ID -->
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.1" extension="2026-XX-XX"/>
  <id extension="A1120200407121530" root="1.2.392.200250.2.2.1.9312345678"/>
  <code code="18751-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
    displayName="上部消化管内視鏡報告書"/>
  <title>JAHIS 病院上部内視鏡検査レポート</title>
  <effectiveTime value="20200407121530"/>
  <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
  <languageCode code="ja-JP"/>
  <setId extension="BB35" root="2.16.840.1.113883.19.7"/>
  <versionNumber value="1"/>

```

7.4.ドキュメントヘッダ情報

7.4.1.患者基本情報 “recordTarget”

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.1. 患者基本情報 “recordTarget”」を参照のこと。

以下は、共通編との差異のみを記載する。

内視鏡検査レポートでは、JED-Project で要求されている性別の記述を必須とする。表 7-2 において、共通編から制約／変更を加えている個所を赤字で記載する。

表 7-2 患者基本情報

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument/recordTarget					患者基本情報
S	@typeCode	1..1	F	RCT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@contextControlCode	1..1	F	OP	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	patientRole	1..1	M		
S	@classCode	1..1	F	PAT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	id	1..*	M		
	@root	1..1	M		患者 ID を管理する組織 OID
	@extension	1..1	M		患者 ID
	addr	0..*	R		患者住所。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
	telecom	0..*	R		患者電話番号。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-7 電話番号」参照
	patient	1..1	R		患者
S	@classCode	1..1	F	PSN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-2 人名(英語またはローマ字表記)」参照
0100	name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-3 人名(漢字表記)」参照
	name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-4 人名(フリガナ表記)」参照
0110	administrativeGenderCode	1..1	M		性別。必須
	@code	1..1	M		性別コード。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 7-3 HL7 V3 定義表 性別」参照
	@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.1	診療文書構造化記述規約共通編指定値
	@codeSystemName	0..1	O	AdministrativeGender	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		性別
0120	birthTime	0..1	R		生年月日。 データ交換規約 共通編 に従い存在する場合は必須
	@value	1..1	M		
	maritalStatusCode	0..1	O		婚姻情報

Sch.	XPath			Card.	Conf.	値	備考
			@code	1..1	M		婚姻情報コード。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 7-4 HL7 V3 定義表 婚 姻情報」参照
			@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.2	診療文書構造化記述規約共通編指定値
			@codeSystemName	0..1	O	MaritalStatus	指定したコードシステムの名称
			@displayName	0..1	O		婚姻情報
			religiousAffiliationCode	0..1	O		宗教
			@code	1..1	M		
			@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.10 76	診療文書構造化記述規約共通編指定値
			@codeSystemName	0..1	O	ReligiousAffiliation	指定したコードシステムの名称
			@displayName	0..1	O		
			raceCode	0..1	O		人種
			@code	1..1	M		
			@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.104	診療文書構造化記述規約共通編指定値
			@codeSystemName	0..1	O	Race	指定したコードシステムの名称
			@displayName	0..1	O		
			ethnicGroupCode	0..1	O		民族
			@code	1..1	M		
			@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.50	診療文書構造化記述規約共通編指定値
			@codeSystemName	0..1	O	Ethnicity	指定したコードシステムの名称
			@displayName	0..1	O		
			guardian	0..*	O		保護者・後見人
S			@classCode	1..1	F	GUARD	固定値。HL7 V3 スキーマで規定され ているため本属性の記述は省略可能
			id	0..*	O		
			@root	1..1	M		保護者・後見人IDを管理する組織OID
			@extension	1..1	M		保護者・後見人ID
0130			code	1..1	M		保護者・後見人を記述する場合は必須
			@code	1..1	M		関係コード。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 7-5 HL7 V3 定義表 関 係情報」参照
			@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.111	本規約指定値
			@codeSystemName	0..1	O	RoleCode	指定したコードシステムの名称
			@displayName	0..1	O		
			addr	0..*	O		保護者・後見人住所。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
			telecom	0..*	O		保護者・後見人電話番号。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-7 電話番号」参照
0140			guardianPerson	1..1	M		保護者・後見人を記述する場合は必須。 原則、氏名は分離記述しない

Sch.	XPath				Card.	Conf.	値	備考
S				@classCode	1..1	F	PSN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S				@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-2 人名(英語またはローマ字表記)」参照
				name	1..1	M		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-3 人名(漢字表記)」参照
				name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-4 人名(フリガナ表記)」参照
				birthplace	0..1	O		生誕地
S				@classCode	1..1	F	BIRTHPL	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				place	1..1	M		生誕住所
S				@classCode	1..1	F	PLC	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S				@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				name	0..1	O		
				text()				
				addr	0..1	O		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
				languageCommunication	0..*	O		対話言語
				languageCode	0..1	O		言語
				@code	1..1	M		言語コード
				modeCode	0..1	O		対話言語のレベル
				@code	1..1	M		
				@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.60	診療文書構造化記述規約共通編指定値
				@codeSystemName	0..1	O	LanguageAbilityMode	指定したコードシステムの名称
				@displayName	0..1	O		
				proficiencyLevelCode	0..1	O		対話言語の堪能レベル
				@code	1..1	M		
				@codeSystem	1..1	F	2.16.840.1.113883.5.61	診療文書構造化記述規約共通編指定値
				@codeSystemName	0..1	O	LanguageAbilityProficiency	指定したコードシステムの名称
				@displayName	0..1	O		
				preferenceInd	0..1	O		
				@value	0..1	R		
				providerOrganization	0..1	O		保険機関・医療機関
S				@classCode	1..1	F	ORG	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S				@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定され

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ているため本属性の記述は省略可能
	id	0..1	O		保険機関・医療機関 ID
	@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
	@extension	0..1	O		
	name	1..1	M		保険機関・医療機関名 保険機関・医療機関を記述する場合は必須
	text()				
	telecom	0..*	O		保険機関・医療機関電話番号。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-7 電話番号」参照
	addr	0..*	O		保険機関・医療機関住所。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
	standardIndustryClassCode	0..1	X		使用しない
	asOrganizationPartOf	0..1	O		全体組織。 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「 6.1.(8) 組織 (organization)」参照
S	@classCode	1..1	F	PART	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	id	0..*	O		全体組織 ID
	@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
	@extension	0..1	O		
	code	0..1	O		関係コード
	@code	1..1	M		
	@codeSystem	1..1	M		
	@codeSystemName	0..1	O		
	@displayName	0..1	O		
	statusCode	0..1	O		全体/部分の関係の状態
	@code	1..1	M		
	effectiveTime	0..1	O		関係が有効な期間
	low	1..1	M		
	@value	1..1	M		
	high	1..1	R		
	@value	0..1	R		

(1) 患者基本情報 XML 記述例

```

<recordTarget>
  <patientRole>
    <id extension="128410" root="1.2.392.200250.3.3.1.9312345678"/>
    <addr use="HP">
      <streetAddressLine>新橋7丁目5番5号</streetAddressLine>
    </addr>
  </patientRole>
</recordTarget>

```

```

    <city>港区</city>
    <state>東京都</state>
    <postalCode>105-0004</postalCode>
    <country>JP</country>
</addr>
<telecom value="tel:03-3506-8010" use="HP"/>
<patient>
  <name use="ABC">
    <family>Tokyo</family>
    <given>Taro</given>
  </name>
  <name use="IDE">
    <family>東京</family>
    <given>太郎</given>
  </name>
  <name use="SYL">
    <family>トウキョウ</family>
    <given>タロウ</given>
  </name>
  <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"
    displayName="男性"/>
  <birthTime value="20050501"/>
  <maritalStatusCode code="M" displayName="結婚"
    codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2"/>
  <guardian>
    <code code="GRPRN" displayName="祖父母"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/>
    <addr use="HP">105-0001 東京都港区虎ノ門7丁目19番9号</addr>
    <telecom value="tel:03-3560-8070" use="HP"/>
    <guardianPerson>
      <name use="IDE">東京 花子</name>
    </guardianPerson>
  </guardian>
  <birthplace>
    <place>
      <addr>
        <state>東京都</state>
        <postalCode>105-0004</postalCode>
        <country>JP</country>
      </addr>
    </place>
  </birthplace>
  <languageCommunication>
    <languageCode code="ja-JP"/>
    <modeCode code="ESP" displayName="Expressed spoken"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.5.60"
      codeSystemName="LanguageAbilityMode"/>
  </languageCommunication>

```

```
<proficiencyLevelCode code="G" displayName="Good"
  codeSystem="2.16.840.1.113883.5.61"
  codeSystemName="LanguageAbilityProficiency"/>
<preferenceInd value="true"/>
</languageCommunication>
</patient>
<providerOrganization>
  <id root="2.16.840.1.113883.19.5.9999.1393"/>
  <name>HL7 病院</name>
  <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
  <addr>105-0004 東京都港区新橋 7 丁目 5 番 5 号</addr>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
```


7.4.2. 作成者および作成システム "author"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.2. 作成者および作成システム "author"」を参照のこと。

7.4.3. 転記者 "dataEnterer"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.3. 転記者 "dataEnterer"」を参照のこと。

7.4.4. 情報提供者 "informant"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.4. 情報提供者 "informant"」を参照のこと。

7.4.5. 保管組織 "custodian"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.5. 保管組織 "custodian"」を参照のこと。

7.4.6. 受取人 "informationRecipient"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.6. 受取人 "informationRecipient"」を参照のこと。

7.4.7. 法的文書承認者 "legalAuthenticator"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.7. 法的文書承認者 "legalAuthenticator"」を参照のこと。

7.4.8. 文書記載責任者 "authenticator"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.8. 文書記載責任者 "authenticator"」を参照のこと。

7.4.9. 関係者 "participant"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.9. 関係者 "participant"」を参照のこと。

7.4.10. オーダ情報 "inFulfillmentOf/order"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.10. オーダ情報 "inFulfillmentOf/order"」を参照のこと。

7.4.11. 検査・診療等行為 "documentationOf/serviceEvent"

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.11. 検査・診療等行為 "documentationOf/serviceEvent"」を参照のこと。

以下は、共通編との差異のみを記載する。

内視鏡検査レポートでは、JED-Project で要求されている以下の項目を documentationOf/serviceEvent に記述する。

- 手技開始時間
- 手技終了時間
- 主実施医師名(1名)
- 副実施医師名(複数可)

表 7-3 において、共通編から制約/変更を加えている個所を赤字で記載する。

表 7-3 検査・診療等 行為

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/documentationOf				検査・診療等 行為
S	@typeCode	1..1	F	DOC	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	serviceEvent	1..1	M		サービスイベント
	@classCode	1..1	M	ACT	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"ACT"を指定するため、本属性の記述は省略可能。
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	id	0..*	O		サービスイベント ID
	@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
	@extension	1..1	M		サービスイベント識別子
	code	0..1	O		サービスイベントコード
	@code	1..1	M		
	@codeSystem	1..1	M		
	@codeSystemName	0..1	O		
	@displayName	0..1	O		
1110	effectiveTime	1..1	M		検査日。内視鏡機器から手技開始・終了時間が自動的に出力可能なときは手技開始・終了時間を記載する
	low	1..1	M		検査日。手技開始時間が自動的に出力可能なときは手技開始時間を記載する
	@value	1..1	M		
	high	1..1	R		手技終了時間。検査日または手技開始時間のみ取得可能なときは nullFlavor="NI"を指定
	@value	0..1	R		
1120	performer	1..*	M		サービスイベントの行為者
	@typeCode	1..1	M		主実施医の指定値 "PPRF" 副実施医の指定値 "SPRF"
	functionCode	0..1	X		使用しない

Sch.	XPath			Card.	Conf.	値	備考
			@code	1..1	M		職務コード 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 7-20 HL7 V3 定義表 職務」参照
			@codeSystem	1..1	M		
			@codeSystemName	0..1	O		
			@displayName	0..1	O		
			originalText	0..1	O		
			text()				
			time	0..1	O		行為に関与していた時間
			low	1..1	M		
			@value	1..1	M		
			high	1..1	R		
			@value	0..1	R		
			assignedEntity	1..1	M		
S			@classCode	1..1	F	ASSIGNED	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
			id	1..*	M		実施医 ID
			@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
			@extension	1..1	M		実施医識別子
			code	0..1	O		実施医属性コード
			@code	1..1	M		
			@codeSystem	1..1	M		
			@codeSystemName	0..1	O		
			@displayName	0..1	O		
			addr	0..*	O		実施医住所 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
			telecom	0..*	O		実施医電話番号 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-7 電話番号」参照
			assignedPerson	1..1	M		実施者
S			@classCode	1..1	F	PSN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S			@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
			name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-2 人名(英語またはローマ字表記)」参照
			name	1..1	M		主実施医、副実施医の漢字氏名 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-3 人名(漢字表記)」参照
			name	0..1	R		診療文書構造化記述規約 共通編

Sch.	XPath				Card.	Conf.	値	備考
								Ver.2.0「表 6-4 人名(フリガナ表記)参照
				representedOrganization	0..1	O		実施者所属組織
S				@classCode	1..1	F	ORG	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S				@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				id	0..*	O		実施者所属組織 ID
				@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
				@extension	0..1	O		
				name	0..*	O		実施者所属組織名
				text()				
				telecom	0..*	O		実施者所属組織電話番号 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-7 電話番号」参照
				addr	0..*	O		実施者所属組織住所 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「表 6-5 住所」参照
				standardIndustryClassCode	0..1	X		使用しない
				asOrganizationPartOf	0..1	O		全体組織 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「6.1.(8) 組織 (organization)」参照
S				@classCode	1..1	F	PART	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				id	0..*	O		全体組織 ID
				@root	1..1	M		個々のシステムを識別する OID または UUID 等
				@extension	0..1	O		
				code	0..1	O		関係コード
				@code	1..1	M		
				@codeSystem	1..1	M		
				@codeSystemName	0..1	O		
				@displayName	0..1	O		
				statusCode	0..1	O		全体/部分の関係の状態
				@code	1..1	M		
				effectiveTime	0..1	O		関係が有効な期間
				low	1..1	M		
				@value	1..1	M		
				high	1..1	R		
				@value	0..1	R		

(4) 検査・診療等 行為 XML 記述例

```
<documentationOf typeCode="DOC">
  <serviceEvent classCode="ACT">
    <effectiveTime>
      <low value="202007270900"/>
      <high value="202007270930"/>
    </effectiveTime>
    <performer typeCode="PPRF">
      <assignedEntity>
        <id extension="11011" root="1.2.392.200250.3.3.2.9312345678"/>
        <assignedPerson>
          <name use="IDE">東京 太郎</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <performer typeCode="SPRF">
      <assignedEntity>
        <id extension="13202" root="1.2.392.200250.3.3.2.9312345678"/>
        <assignedPerson>
          <name use="IDE">日本 花子</name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
  </serviceEvent>
</documentationOf>
```

7.4.12. 文書関係(文書の付録、変更、置換)

”relatedDocument/parentDocument”

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.12. 文書関係(文書の付録、変更、置換) ”relatedDocument/parentDocument”」を参照のこと。

7.4.13. 承諾 ”authorization/consent”

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.13. 承諾 ”authorization/consent”」を参照のこと。

7.4.14. 受診時情報 ”componentOf/encompassingEncounter”

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「7.4.14. 受診時情報 ”componentOf/encompassingEncounter”」を参照のこと。

8. CDA ボディ部

8.1.CDA ボディ部定義

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「8.1. CDA ボディ部定義」を参照のこと。

本規約で定義する個別セクションは、structuredBody の直下の component となるメインセクションと、メインセクションの component となるサブセクションの大きく 2 種類に分類される。

メインセクションは、JED-Project で検査種別毎に定義されている基本情報のメインカテゴリーとしてサブカテゴリーをグルーピングするとともに、総合診断情報を記述するためのセクションとして定義する。


サブセクションは、基本情報のサブカテゴリーの各項目、および JED-Project で診断／処置／病理用語として定義されている各情報を記述するためのセクションとして定義する。

ボディ部で使用するコードは当面 JED 用語集・コードセットにあるローカルコードとし、LOINC コードが取得できたタイミングで本規約を改訂する予定である。

JED 用語集・コードセットダウンロードホームページ

参照先 URL:<https://jedproject.jges.net/about/terms-download/>

いずれのコードを使用しても問題ないが、本規約に準拠した製品の海外輸出を想定しているベンダーは、最終的には LOINC コードを使用することを推奨する。

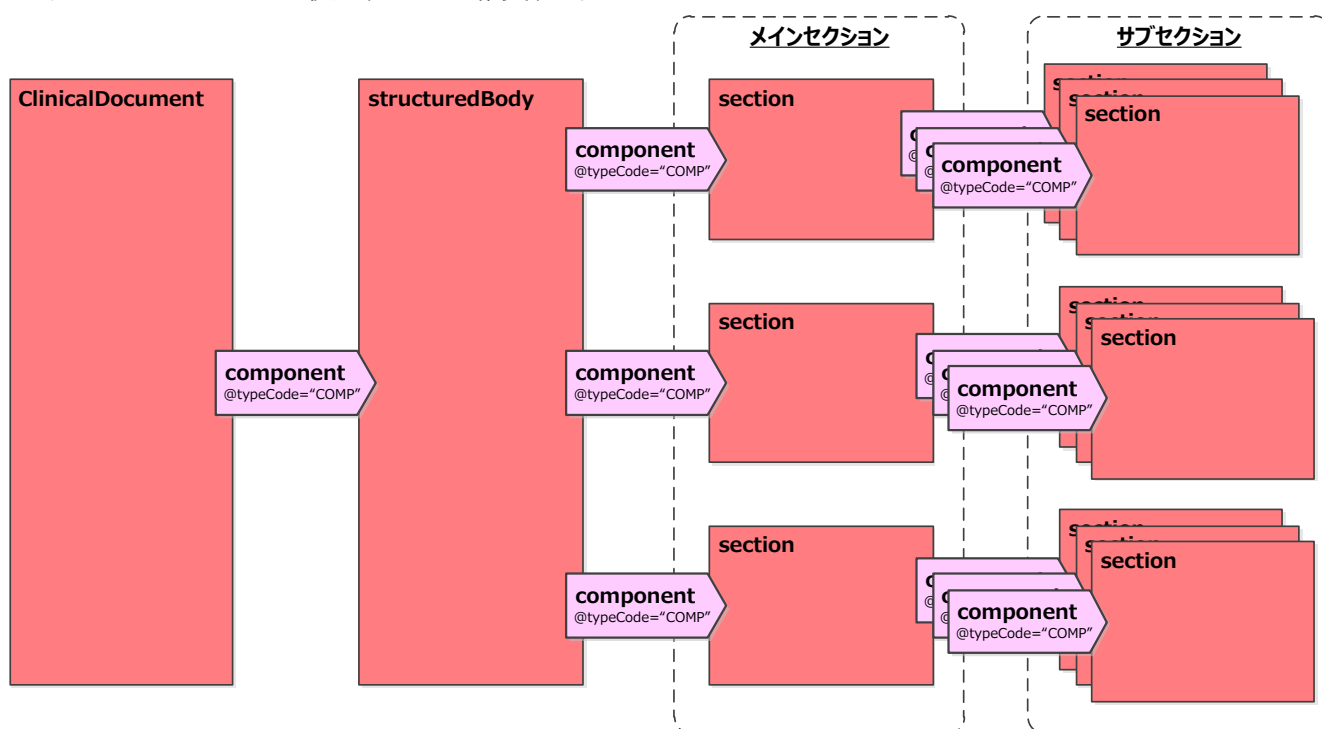

8.2.CDA ボディ部構成

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「8.2. CDA ボディ部構成」を参照のこと。

以下、本規約で定義した 4 種類の内視鏡検査レポートのボディ部の構成を記載する。

8.2.1.上部内視鏡検査レポート

Template: 上部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1 – Endoscopy Report (upper endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている上部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument				
	recordTarget	1..1	M		[7.4.1.患者基本情報] 参照
	documentationOf	1..1	M		[7.4.11.検査診療行為] 参照
	component/structuredBody				メインセクションまで記載
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.1'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.1. 患者付帯情報」参照
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.2'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.2. バイタルサイン」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1'] [8.4.1.1.患者基本情報(JED)] 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2'] [8.4.1.2.患者背景情報(上部)] 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3'] [8.4.1.6.依頼情報(上部)] 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4'] [8.4.1.10.検査時情報(上部)] 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6'] [8.4.1.15.偶発症情報(上部)] 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7'] [8.4.1.19.総合診断(上部)] 参照

8.2.2. 下部内視鏡検査レポート

Template: 下部内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2 – Endoscopy Report (colonoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている下部内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument					
	recordTarget	1..1	M		「7.4.1.患者基本情報」 参照
	documentationOf	1..1	M		「7.4.11.検査診療行為」 参照
	component/structuredBody				メインセクションまで記載
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.1'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.1. 患者付帯情報」 参照
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.2'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.2. バイタルサイン」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1'] 「8.4.1.1.患者基本情報(JED)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2'] 「8.4.1.3.患者背景情報(下部)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3'] 「8.4.1.7.依頼情報(下部)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4'] 「8.4.1.11.検査時情報(下部)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6'] 「8.4.1.16.偶発症情報(下部)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7'] 「8.4.1.20.総合診断(下部)」 参照

8.2.3.小腸内視鏡検査レポート

Template:小腸内視鏡検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3 – Endoscopy Report (small intestinal endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている小腸内視鏡検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument					
	recordTarget	1..1	M		「7.4.1.患者基本情報」 参照
	documentationOf	1..1	M		「7.4.11.検査診療行為」 参照
	component/structuredBody				メインセクションまで記載
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.1'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.1. 患者付帯情報」 参照
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.2'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.2. バイタルサイン」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1'] 「8.4.1.1.患者基本情報(JED)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2'] 「8.4.1.4.患者背景情報(小腸)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3'] 「8.4.1.8.依頼情報(小腸)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4'] 「8.4.1.12.検査時情報(小腸)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6'] 「8.4.1.17.偶発症情報(小腸)」 参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7'] 「8.4.1.21.総合診断(小腸)」 参照

8.2.4. ERCP 内視鏡検査レポート

Template:ERCP 検査レポート

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4 – Endoscopy Report (ERCP)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA ドキュメントレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	JED-Project で定義されている ERCP 検査レポートを記述するためのドキュメントレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument					
	recordTarget	1..1	M		「7.4.1.患者基本情報」参照
	documentationOf	1..1	M		「7.4.11.検査診療行為」参照
	component/structuredBody				メインセクションまで記載
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.1'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.1. 患者付帯情報」参照
	component	0..1	O		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.1.1.2.2'] 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「8.3.2. バイタルサイン」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1'] 「8.4.1.1.患者基本情報(JED)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2'] 「8.4.1.5.患者背景情報(ERCP)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3'] 「8.4.1.9.依頼情報(ERCP)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4'] 「8.4.1.13.検査時情報(ERCP)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5'] 「8.4.1.14.検査後情報(ERCP)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6'] 「8.4.1.18.偶発症情報(ERCP)」参照
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7'] 「8.4.1.22.総合診断(ERCP)」参照

8.3.共通セッション

JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「8.3. 共通セッション」を参照のこと。

8.3.1.患者付帯情報

実装は任意とする。実装する場合、メインセッションとして使用する。

JED-Project では年齢をテキストで記述することが要求されている。ため、JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0「8.3. 共通セッション」で定義されている年齢は使用せず、本規約「8.4. 個別セッション」で定義した[「8.4.2.1.年齢」](#)に記述する。

8.3.2.バイタルサイン

実装は任意とする。実装する場合、メインセッションとして使用する。

8.4.個別セクション

本規約で定義する内視鏡検査レポート固有のセクションについて説明する。

8.4.1.メインセクション


structuredBody の直下の component となるセクション。

JED-Project で検査種別毎に定義されている基本情報のメインカテゴリーとしてサブカテゴリーをグルーピングするとともに、総合診断情報を記述するために使用する。

情報の考え方、用語の解説については JED-Project の下記 URL を参照のこと。

<https://jedproject.jges.net/about/terms-commentary/>

8.4.1.1. 患者基本情報(JED)

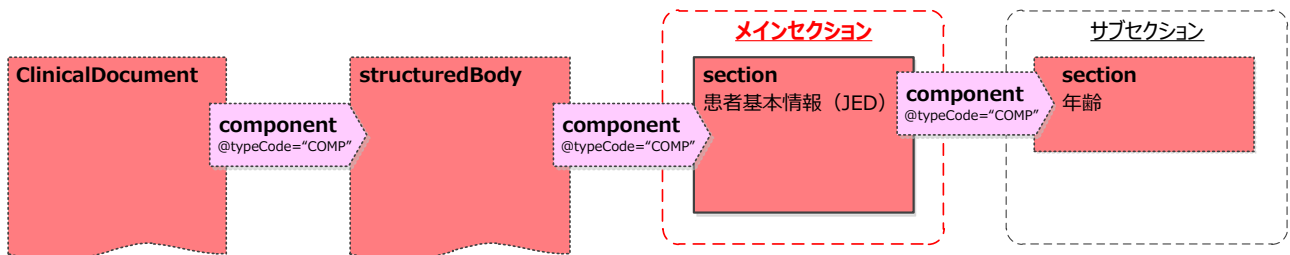

(5) 概要

JED-Project で定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別を問わず共通。

注)患者基本情報(JED)のうち以下サブカテゴリーの情報は CDA ヘッダ部に記述する。

- 検査種別
- 検査日
- 患者 ID
- 性別

(6) 患者基本情報記述 XML 仕様

表 8-1 患者基本情報(JED)セクション記述 XML 仕様

Template:患者基本情報(JED)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1 – Patient's Basic Information (JED) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				患者基本情報(JED)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		患者基本情報(JED)セクションテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		患者基本情報セッションコード
	@code	1..1	M	Z1100000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient's Basic Information (JED)	
	title	1..1	M		セッションタイトル
	text()			患者基本情報(JED)	本規約指定値
1510	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1'] [8.4.2.1.年齢]参照


(7) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
  <code code="Z1100000" displayName=" " codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED"/>
  <title>患者基本情報(JED)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.1.年齢\]参照 -->
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.2. 患者背景情報(上部)

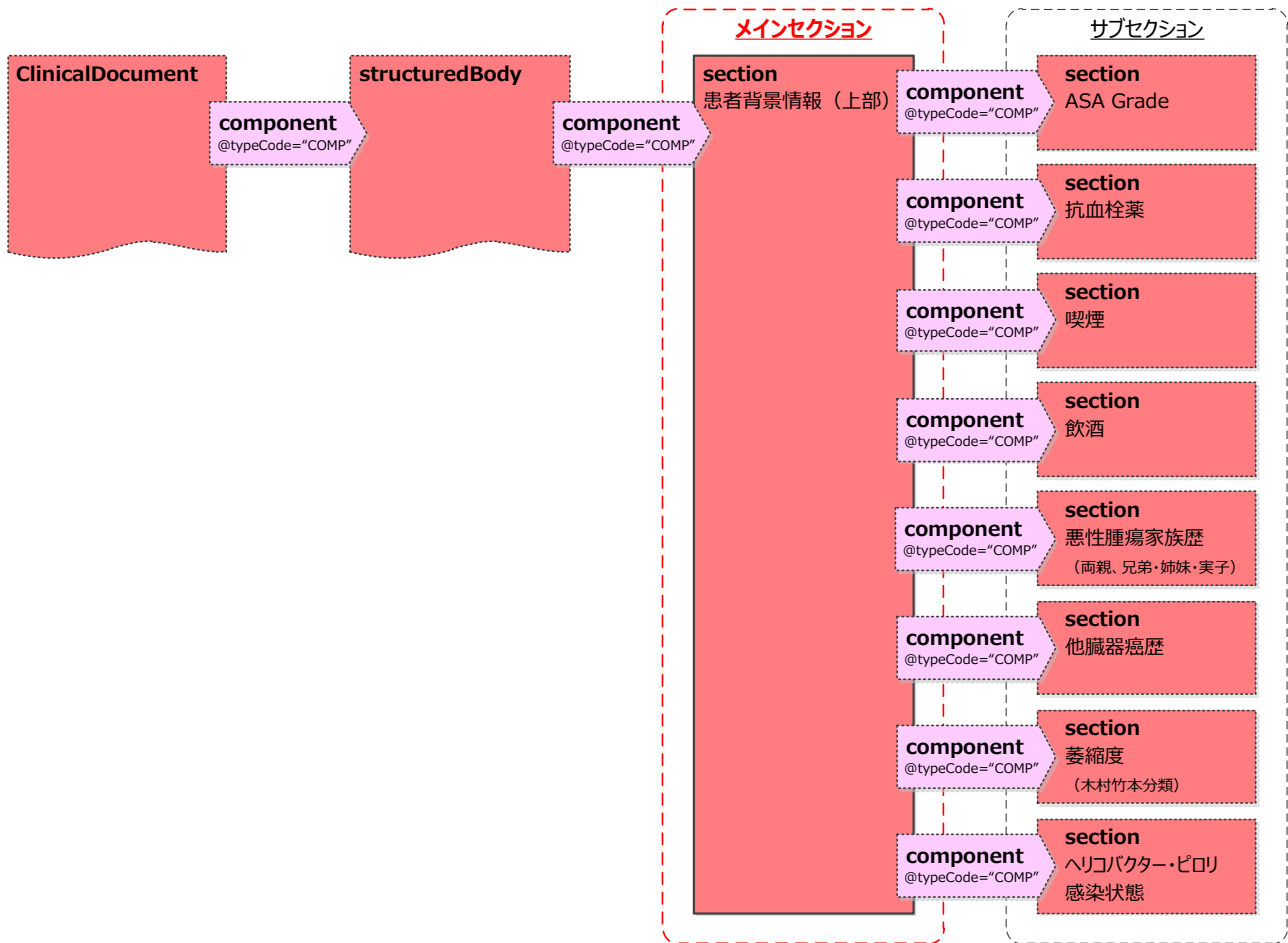

(1) 概要

JED-Project で定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、入力項目指標(Type)が異なるため、上部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 患者背景情報(上部)記述 XML 仕様

表 8-2 患者背景情報(上部)セクション記述 XML 仕様

Template:患者背景情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2 - Patient Background Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				患者背景情報(上部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		患者背景情報(上部)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		患者背景情報(上部)セクションコード
	@code	1..1	M	11200000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient Background Information (upper endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			患者背景情報(上部)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2'] [8.4.2.3.ASA Grade] 参照
2210	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3'] [8.4.2.4.抗血栓薬] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4'] [8.4.2.5.喫煙] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5'] [8.4.2.6.飲酒] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6'] [8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8'] [8.4.2.9.他臓器癌歴] 参照
2220	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9'] [8.4.2.10.萎縮度(木村竹本分類)] 参照
2230	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					「8.4.2.11.ヘリコバクター・ピロリ感染状態」 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2"/>
  <code code="11200000" displayName="Patient Background Information (upper
  endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>患者背景情報(上部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.3.ASA Grade」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.4.抗血栓薬」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.5.喫煙」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.6.飲酒」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>


```

```

<!-- サブセクション「8.4.2.9.他臓器癌歴」参照 -->
...
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.10.萎縮度(木村竹本分類)」参照 -->
    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>
  <!-- サブセクション「8.4.2.11.ヘリコバクター・ピロリ感染状態」参照 -->
  ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.3. 患者背景情報(下部)

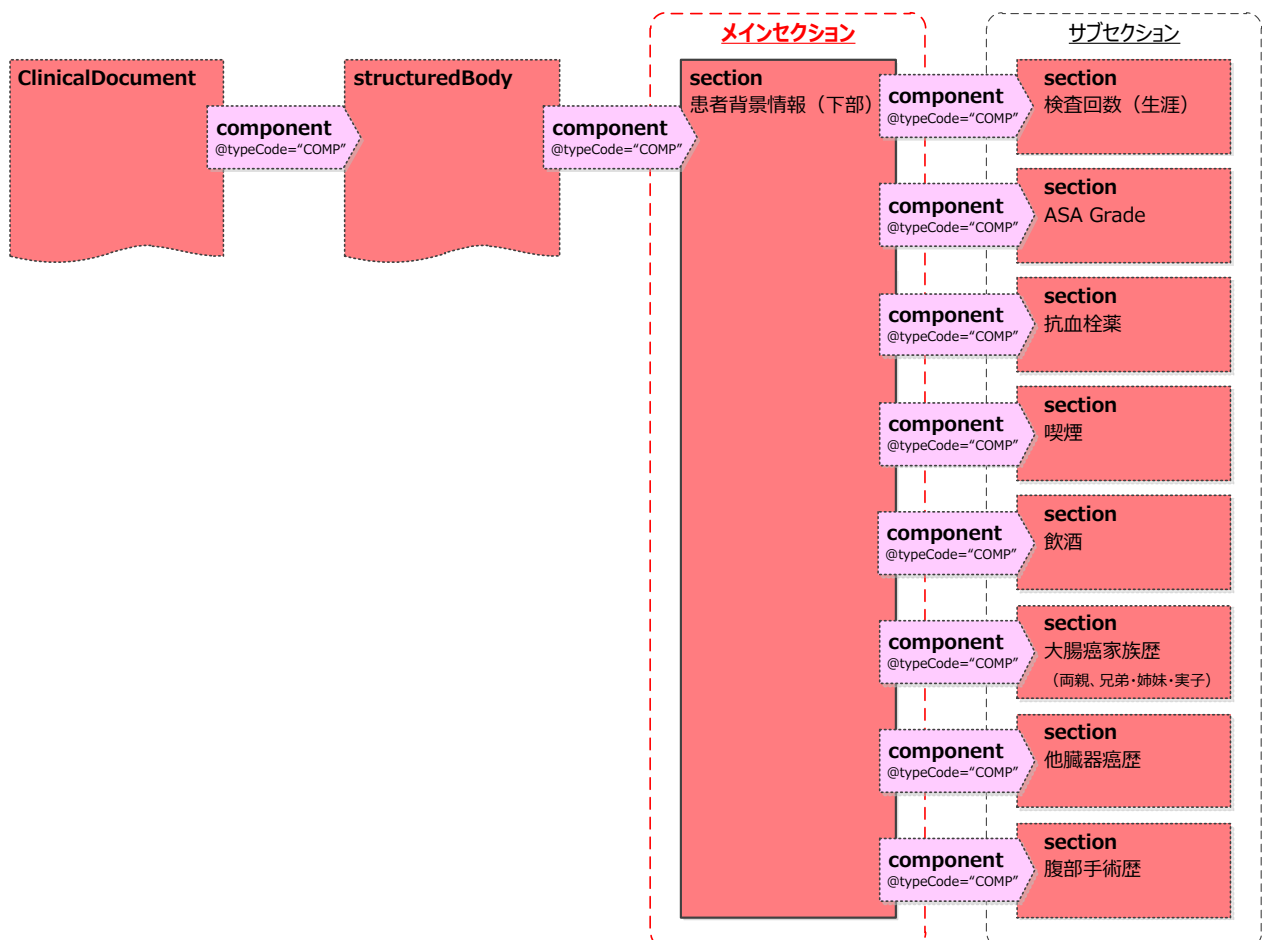

(1) 概要

JED-Project で定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、入力項目指標(Type)が異なるため、下部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 患者背景情報(下部)記述 XML 仕様

表 8-3 患者背景情報(下部)セクション記述 XML 仕様

Template:患者背景情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2 – Patient Background Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				患者背景情報(下部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		患者背景情報(下部)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		患者背景情報(下部)セクションコード
	@code	1..1	M	21200000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient Background Information (colonoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			患者背景情報(下部)	本規約指定値
3210	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1'] [8.4.2.2.検査回数(生涯)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2'] [8.4.2.3.ASA Grade] 参照

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
3220	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3'] [8.4.2.4.抗血栓薬] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4'] [8.4.2.5.喫煙] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5'] [8.4.2.6.飲酒] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7'] [8.4.2.8.大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8'] [8.4.2.9.他臓器癌歴] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11'] [8.4.2.12.腹部手術歴] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2"/>
  <code code="21200000" displayName="Patient Background Information
(colonoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>患者背景情報(下部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.2.検査回数(生涯)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.3.ASA Grade」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.4.抗血栓薬」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>


```

```

</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.5.喫煙」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.6.飲酒」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.8.大腸癌家族歴\(両親、兄弟・姉妹・実子\)」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.9.他臓器癌歴」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.12.腹部手術歴」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.4. 患者背景情報(小腸)

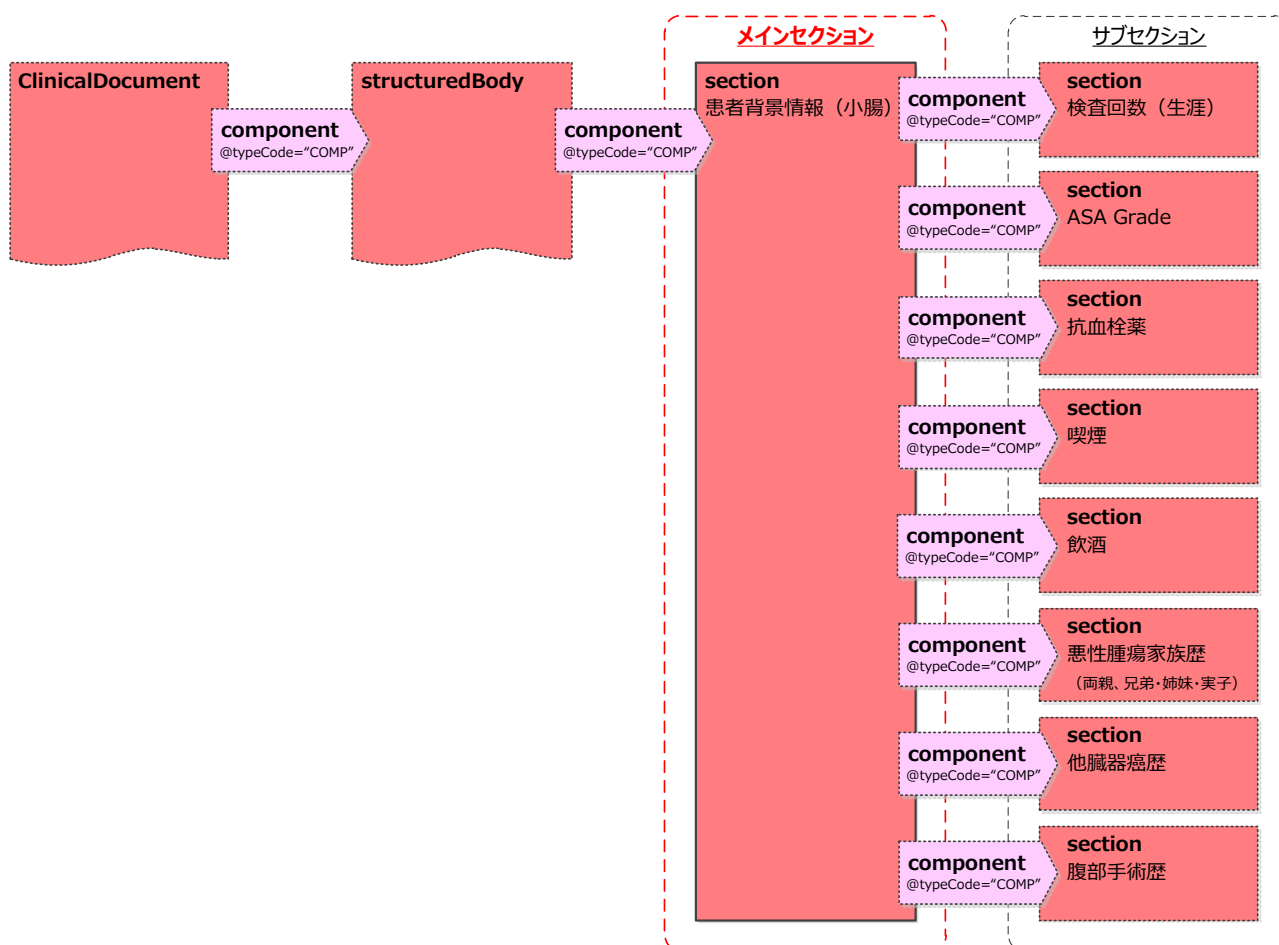

(1) 概要

JED-Project で定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、入力項目指標(Type)が異なるため、小腸内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 患者背景情報(小腸)記述 XML 仕様

表 8-4 患者背景情報(小腸)セクション記述 XML 仕様

Template:患者背景情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2 - Patient Background Information (small intestinal endoscopy)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				患者背景情報(小腸)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		患者背景情報(小腸)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		患者背景情報(小腸)セクションコード
	@code	1..1	M	31200000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient Background Information (small intestinal endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			患者背景情報(小腸)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1'] [8.4.2.2.検査回数(生涯)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2'] [8.4.2.3.ASA Grade] 参照
4210	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3'] [8.4.2.4.抗血栓薬] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4'] [8.4.2.5.喫煙] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5'] [8.4.2.6.飲酒] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6'] [8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8'] [8.4.2.9.他臓器癌歴] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					8.4.2.12.腹部手術歴 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2"/>
  <code code="31200000" displayName="Patient Background Information (small
    intestinal endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED"/>
  <title>患者背景情報(小腸)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.2.検査回数(生涯)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.3.ASA Grade」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.4.抗血栓薬」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.5.喫煙」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.6.飲酒」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>

```




```

<!-- サブセクション「8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)」参照 -->
...
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.9.他臓器癌歴」参照 -->
    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>
  <!-- サブセクション「8.4.2.12.腹部手術歴」参照 -->
  ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.5. 患者背景情報(ERCP)

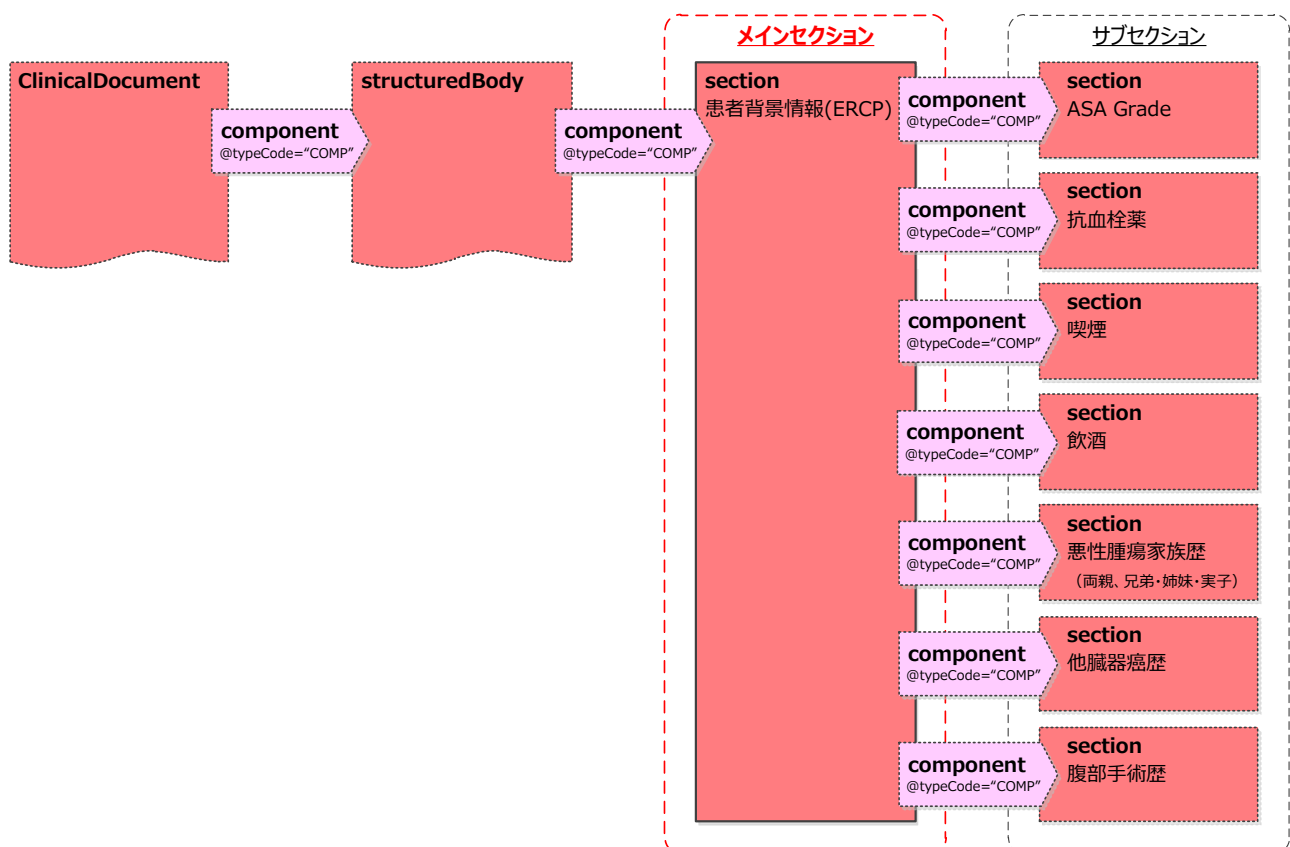

(1) 概要

JED-Project で定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。

検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、入力項目指標(Type)が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

(2) 患者背景情報(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-5 患者背景情報(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:患者背景情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2 – Patient Background Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の患者背景情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				患者背景情報(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		患者背景情報(ERCP)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		患者背景情報(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	41200000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient Background Information (ERCP)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			患者背景情報(ERCP)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root = '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2'] [8.4.2.3.ASA Grade] 参照
5210	component	1..1	M		section [templateId/@root = '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3'] [8.4.2.4.抗血栓薬] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root = '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4'] [8.4.2.5.喫煙] 参照

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5'] [8.4.2.6.飲酒] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6'] [8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8'] [8.4.2.9.他臓器癌歴] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11'] [8.4.2.12.腹部手術歴] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2"/>
  <code code="31200000" displayName="Patient Background Information (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>患者背景情報(ERCP)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.3.ASA Grade\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.4.抗血栓薬\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.5.喫煙\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.6.飲酒\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>

```

```

    </section>
  </component>
<component>
  <section>

    <!-- サブセクション「8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)」参照 -->

    ...

  </section>
</component>
<component>
  <section>

    <!-- サブセクション「8.4.2.9.他臓器癌歴」参照 -->

    ...

  </section>
</component>
<component>
  <section>


    <!-- サブセクション「8.4.2.12.腹部手術歴」参照 -->

    ...

  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.6. 依頼情報(上部)

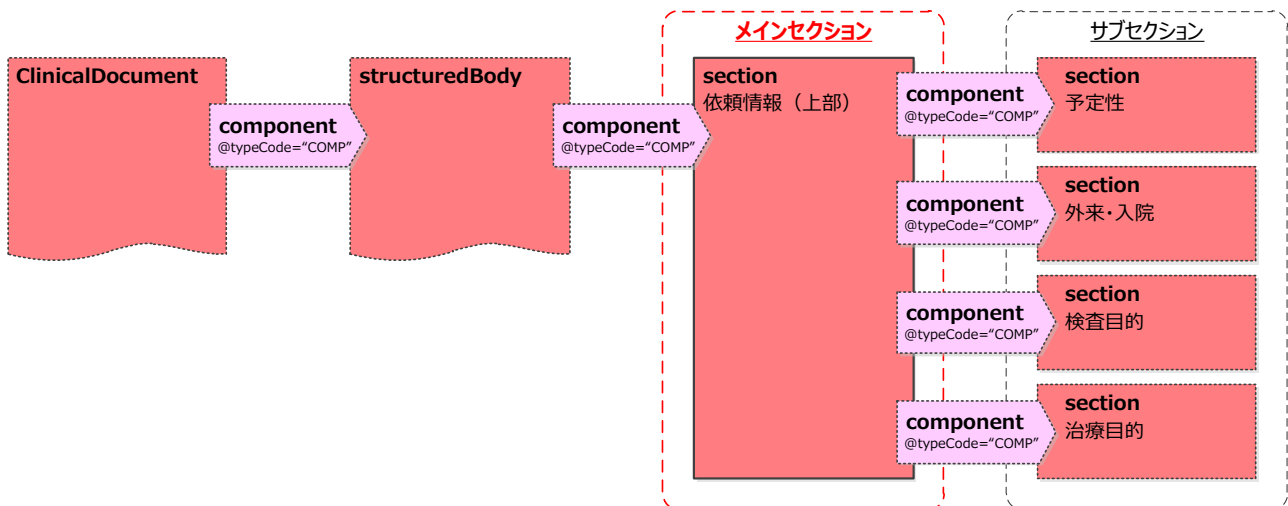

(1) 概要

JED-Project で定義されている依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、上部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 依頼情報(上部)記述 XML 仕様

表 8-6 依頼情報(上部)セクション記述 XML 仕様

Template:依頼情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3 – Information to Be Requested (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				依頼情報(上部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		依頼情報(上部)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		依頼情報(上部)セクションコード
	@code	1..1	M	11300000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Information to Be Requested (upper endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			依頼情報(上部)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1'] [8.4.2.13.予定性] 参照
2310	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2'] [8.4.2.14.外来・入院] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3'] [8.4.2.15.検査目的] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					[8.4.2.16.治療目的] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3"/>
  <code code="11300000" displayName="Information to Be Requested (upper
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>依頼情報(上部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.13.予定性」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.14.外来・入院」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.15.検査目的」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.16.治療目的」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.7. 依頼情報(下部)

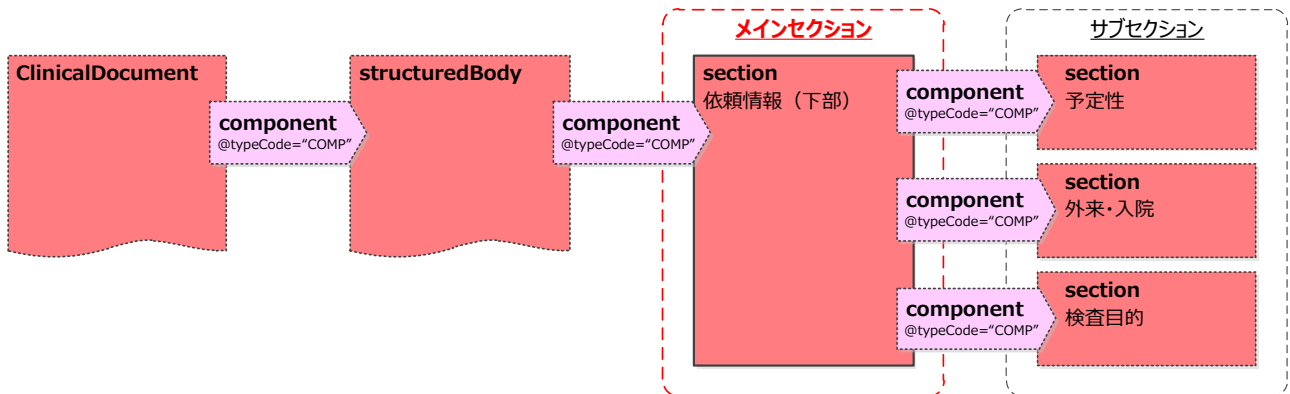

(1) 概要

JED-Project で定義されている依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、下部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 依頼情報(下部)記述 XML 仕様

表 8-7 依頼情報(下部)セクション記述 XML 仕様

Template:依頼情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3 – Information to Be Requested (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				依頼情報(下部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		依頼情報(下部)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		依頼情報(下部)セクションコード
	@code	1..1	M	21300000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Information to Be Requested (colonoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			依頼情報(下部)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1'] [8.4.2.13.予定性] 参照
3310	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2'] [8.4.2.14.外来・入院] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3'] [8.4.2.15.検査目的] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3"/>
  <code code="21300000" displayName="Information to Be Requested (colonoscopy)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>依頼情報(下部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.13.予定性\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.14.外来・入院\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.15.検査目的\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```


8.4.1.8. 依頼情報(小腸)

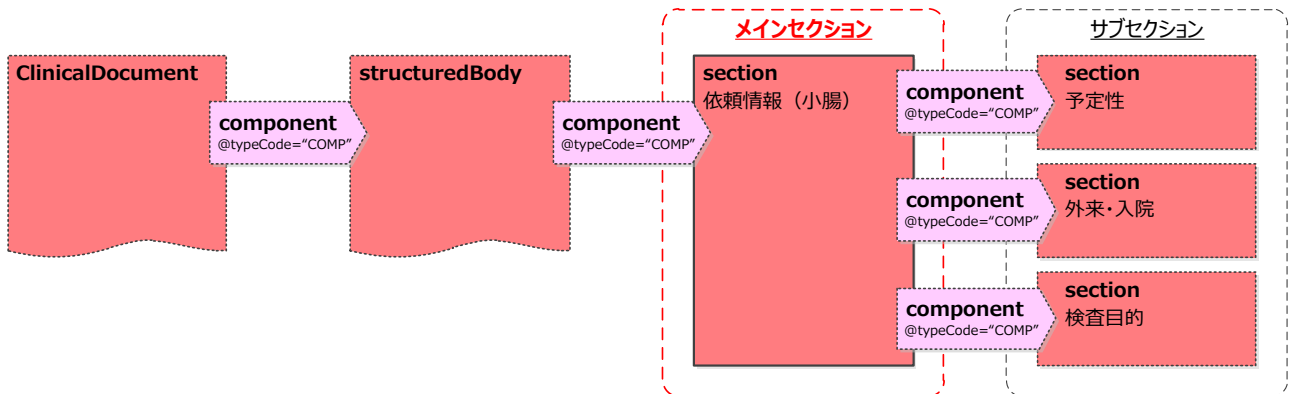

(1) 概要

JED-Project で定義されている依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、小腸内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 依頼情報(小腸)記述 XML 仕様

表 8-8 依頼情報(小腸)セクション記述 XML 仕様

Template:依頼情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3 – Information to Be Requested (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				依頼情報(小腸)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		依頼情報(小腸)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		依頼情報(小腸)セクションコード
	@code	1..1	M	31300000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Information to Be Requested (small intestinal endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			依頼情報(小腸)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1'] [8.4.2.13.予定性] 参照
4310	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2'] [8.4.2.14.外来・入院] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3'] [8.4.2.15.検査目的] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3"/>
  <code code="31300000" displayName="Information to Be Requested (small intestinal
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>依頼情報(小腸)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.13.予定性\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.14.外来・入院\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.15.検査目的\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.9. 依頼情報(ERCP)

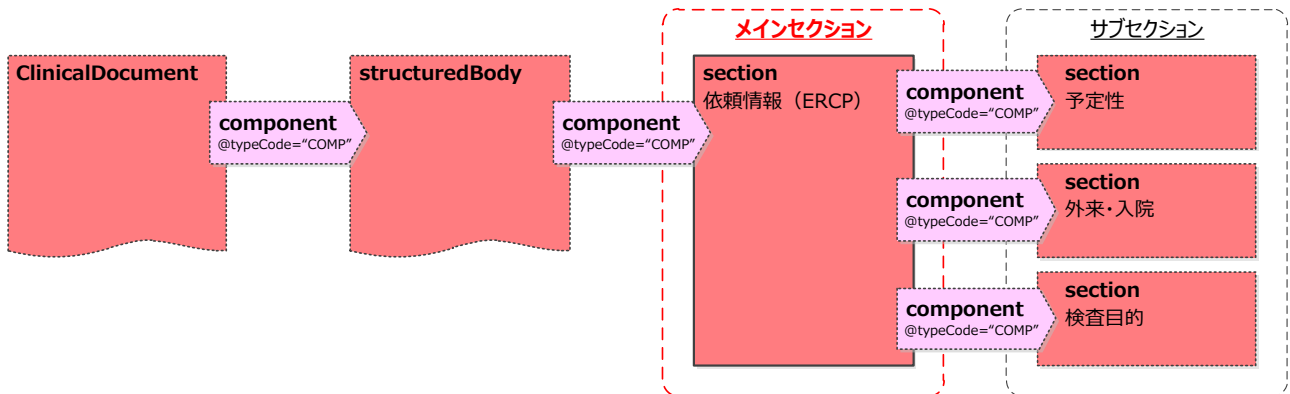

(1) 概要

JED-Project で定義されている依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

(2) 依頼情報(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-9 依頼情報(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:依頼情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3 – Information to Be Requested (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の依頼情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				依頼情報(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		依頼情報(ERCP)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		依頼情報(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	41300000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Information to Be Requested (ERCP)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			依頼情報(ERCP)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1'] [8.4.2.13.予定性] 参照
5310	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2'] [8.4.2.14.外来・入院] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3'] [8.4.2.15.検査目的] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3"/>
  <code code="41300000" displayName="Information to Be Requested (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>依頼情報(ERCP)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.13.予定性\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.14.外来・入院\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.15.検査目的\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.10. 検査時情報(上部)

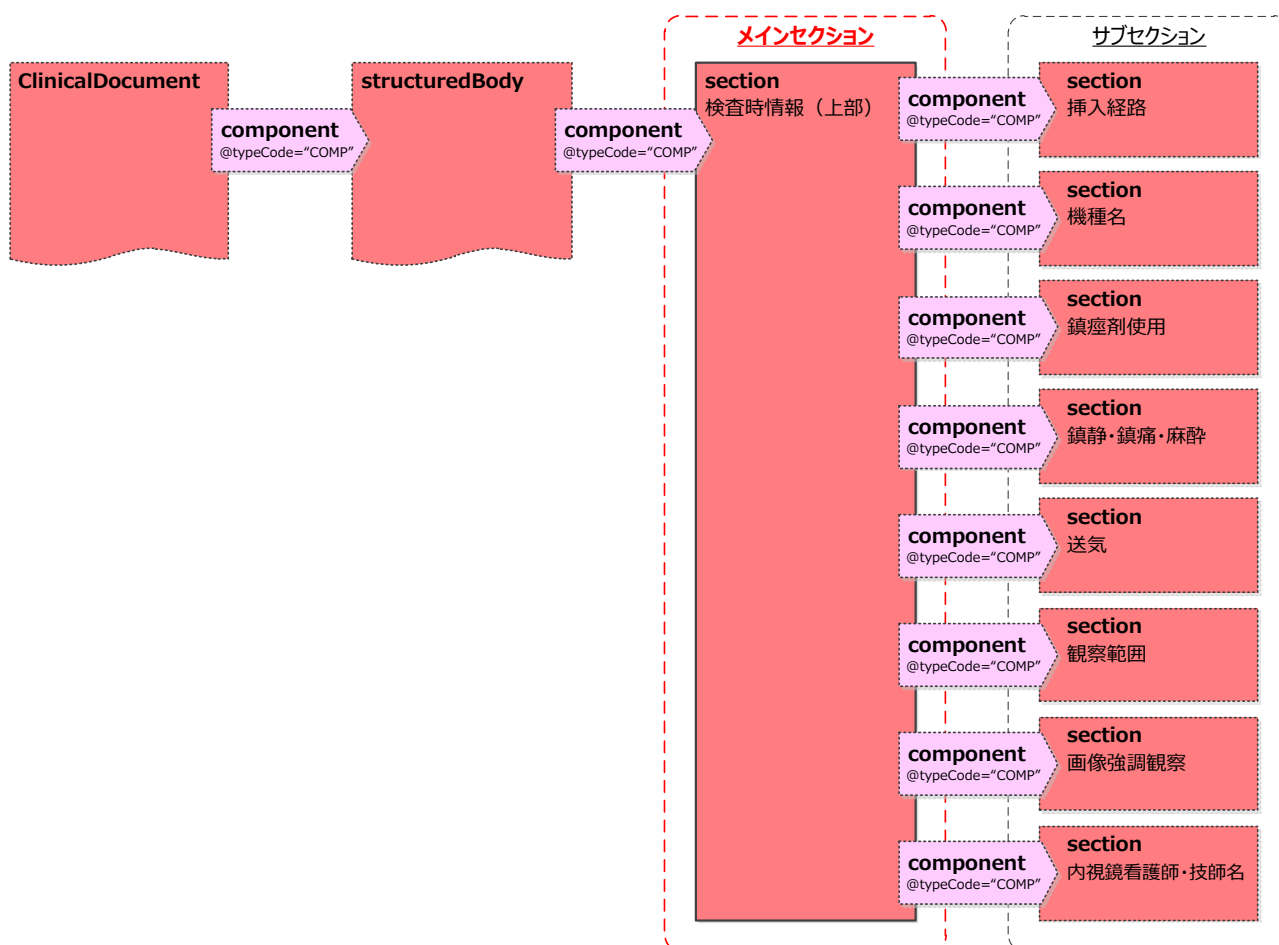

(1) 概要

JED-Project で定義されている検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、上部内視鏡検査のセクションとして定義する。

注)検査時情報(上部)のうち以下サブカテゴリーの情報は CDA ヘッダ部に記述する。

- 手技開始時間
- 手技終了時間
- 主実施医師名
- 副実施医師名

詳細は、7.4.11. 検査・診療等行為 参照

(2) 検査時情報(上部)記述 XML 仕様

表 8-10 検査時情報(上部)セクション記述 XML 仕様

Template:検査時情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4 - Examination Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語ーメインカテゴリー

解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。
----	---------------------------------------------------------------------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				検査時情報(上部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査時情報(上部)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査時情報(上部)セクションコード
	@code	1..1	M	I1400000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Examination Information (upper endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査時情報(上部)	本規約指定値
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1'] [8.4.2.17.挿入経路] 参照
2410	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2'] [8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3'] [8.4.2.19.鎮痙剤使用] 参照
2420	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4'] [8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5'] [8.4.2.21.送気] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6'] [8.4.2.22.観察範囲] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8'] [8.4.2.24.画像強調観察] 参照

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
2430	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17'] [8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名] 参照

(3) XML 記述サンプル


```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4"/>
  <code code="11400000" displayName="Examination Information (upper endoscopy)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査時情報(上部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.17.挿入経路」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.19.鎮痙剤使用」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.21.送気」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>

```

```
<!-- サブセクション「8.4.2.22.観察範囲」参照 -->
...
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.24.画像強調観察」参照 -->
    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>
  <!-- サブセクション「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」参照 -->
  ...
  </section>
</component>
</section>
```


8.4.1.11.検査時情報(下部)

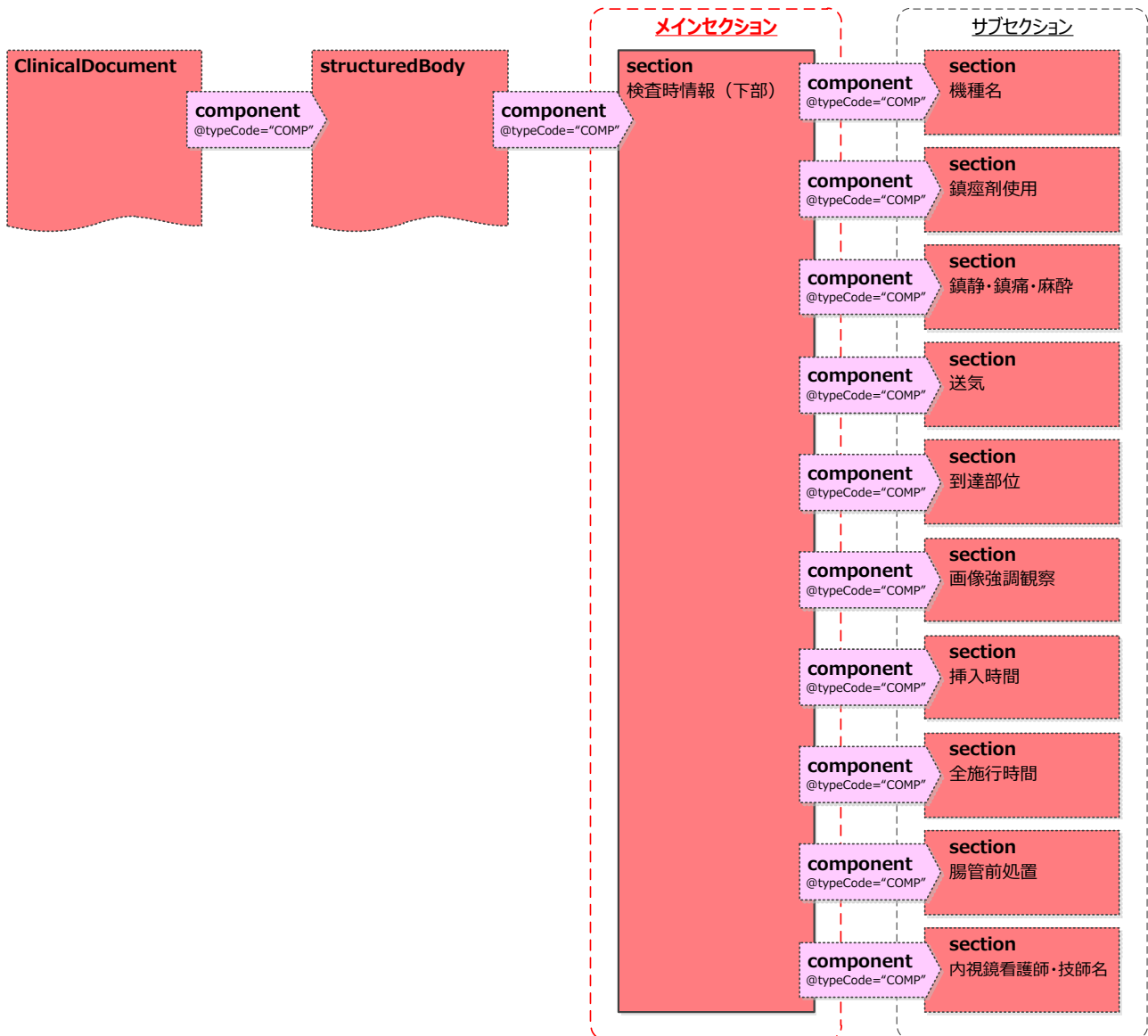

(1) 概要

JED-Project で定義されている検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、下部内視鏡検査のセクションとして定義する。

注)検査時情報(下部)のうち以下サブカテゴリーの情報は CDA ヘッダ部に記述する。

- ・ 手技開始時間
- ・ 手技終了時間
- ・ 主実施医師名
- ・ 副実施医師名

詳細は、7.4.11. 検査・診療等行為 参照

(2) 検査時情報(下部)記述 XML 仕様

表 8-11 検査時情報(下部)セクション記述 XML 仕様

Template:検査時情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4 – Examination Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				検査時情報(下部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査時情報(下部)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査時情報(下部)セクションコード
	@code	1..1	M	21400000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Examination Information (colonoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査時情報(下部)	本規約指定値
3410	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2'] [8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)] 参照
3420	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3'] [8.4.2.19.鎮痙剤使用] 参照
3430	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4'] [8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5'] [8.4.2.21.送気] 参照

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7'] [8.4.2.23.到達部位] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8'] [8.4.2.24.画像強調観察] 参照
3440	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9'] [8.4.2.25.挿入時間] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13'] [8.4.2.29.全施行時間] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14'] [8.4.2.30.腸管前処置] 参照
3450	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17'] [8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"/>
  <code code="21400000" displayName="Examination Information (colonoscopy)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査時情報(下部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.19.鎮痙剤使用」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>

```

```

<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.21.送気」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.23.到達部位」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.24.画像強調観察」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.25.挿入時間」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.29.全施行時間」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.30.腸管前処置」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」参照 -->
    ...

```

```
</section>
</component>
</section>
```

8.4.1.12. 検査時情報(小腸)



(1) 概要

JED-Project で定義されている検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、小腸内視鏡検査のセクションとして定義する。

注)検査時情報(小腸)のうち以下サブカテゴリーの情報は CDA ヘッダ部に記述する。

- ・ 手技開始時間
- ・ 手技終了時間
- ・ 主実施医師名
- ・ 副実施医師名

詳細は、7.4.11. 検査・診療等行為 参照

(2) 検査時情報(小腸)記述 XML 仕様

表 8-12 検査時情報(小腸)セクション記述 XML 仕様

Template:検査時情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4 – Examination Information (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				検査時情報(小腸)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査時情報(小腸)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査時情報(小腸)セクションコード
	@code	1..1	M	31400000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Examination Information (small intestinal endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査時情報(小腸)	本規約指定値
4410	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1'] [8.4.2.17.挿入経路] 参照
4420	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2']

					[8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)]参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3'] [8.4.2.19.鎮痙剤使用]参照
4430	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4'] [8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔]参照
4440	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5'] [8.4.2.21.送気]参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6'] [8.4.2.22.観察範囲]参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8'] [8.4.2.24.画像強調観察]参照
4450	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9'] [8.4.2.25.挿入時間]参照
4460	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10'] [8.4.2.26.抜去時間]参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11'] [8.4.2.27.治療時間]参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14'] [8.4.2.30.腸管前処置]参照
4470	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17'] [8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名]参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"/>
  <code code="31400000" displayName="Examination Information (small intestinal
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査時情報(小腸)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.17.挿入経路\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>

```

```

        <!-- サブセクション「8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.19.鎮座剤使用」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.21.送気」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.22.観察範囲」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.24.画像強調観察」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.25.挿入時間」参照 -->
        ...
    </section>
</component>

```





```

<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.26.抜去時間」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.27.治療時間」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.30.腸管前処置」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.13. 検査時情報(ERCP)

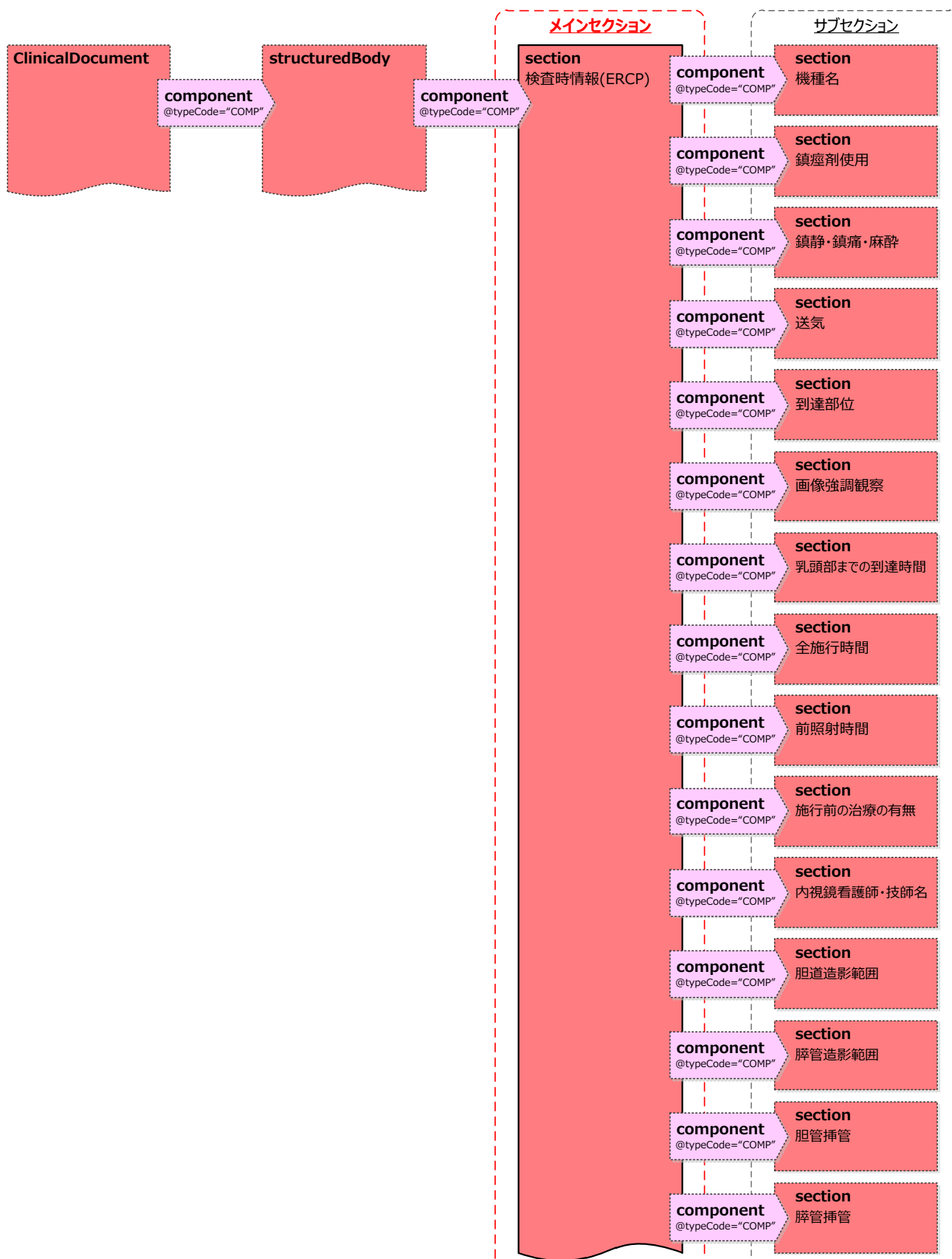

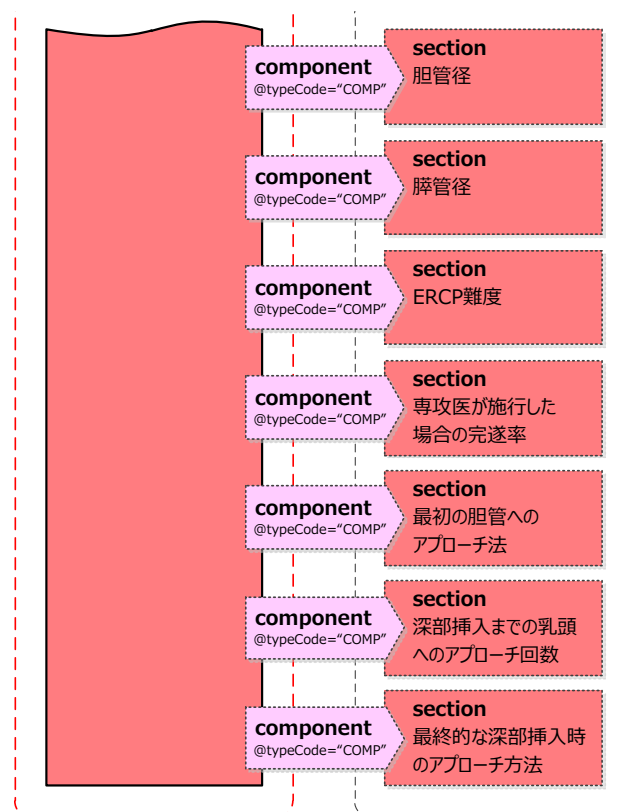

(1) 概要

JED-Project で定義されている検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

注)検査時情報(ERCP)のうち以下サブカテゴリーの情報は CDA ヘッダ部に記述する。

- 手技開始時間
- 手技終了時間
- 主実施医師名
- 副実施医師名

詳細は、7.4.11. 検査・診療等行為 参照

(2) 検査時情報(小腸)記述 XML 仕様

表 8-13 検査時情報(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:検査時情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4 - Examination Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語ーメインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の検査時情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				検査時情報(ERCP)

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査時情報(ERCP)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査時情報(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	41400000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Examination Information (ERCP)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査時情報(ERCP)	本規約指定値
5410	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2'] [8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3'] [8.4.2.19.鎮痙剤使用] 参照
5420	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4'] [8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5'] [8.4.2.21.送気] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7'] [8.4.2.23.到達部位] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8'] [8.4.2.24.画像強調観察] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12'] [8.4.2.28.乳頭部までの到達時間] 参照
5430	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					[8.4.2.29.全施行時間] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15'] [8.4.2.31.全照射時間] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16'] [8.4.2.32.施行前の治療の有無] 参照
5440	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17'] [8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18'] [8.4.2.34.胆道造影範囲] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19'] [8.4.2.35.膵管造影範囲] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20'] [8.4.2.36.胆管挿管] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21'] [8.4.2.37.膵管挿管] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22'] [8.4.2.38.胆管径] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23'] [8.4.2.39.膵管径] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24'] [8.4.2.40.ERCP 難度] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25'] [8.4.2.41.専攻医が施行した場合の完遂率 (%)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26'] [8.4.2.42.最初の胆管へのアプローチ法] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27'] [8.4.2.43.深部挿入までの乳頭へのアプロ ーチ回数] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28'] [8.4.2.44.最終的な深部挿入時のアプロ

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					チ方法 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4"/>
  <code code="41400000" displayName="Examination Information (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査時情報(ERCP)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.18.機種名(スコープ機種名)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.19.鎮痙剤使用」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.20.鎮静・鎮痛・麻酔」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.21.送気」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.23.到達部位」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.24.画像強調観察」参照 -->

```

```

...
</section>
</component>
<component>
  <section>

    <!-- サブセクション「8.4.2.28.乳頭部までの到達時間」参照 -->

    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>

  <!-- サブセクション「8.4.2.29.全施行時間」参照 -->

  ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>

    <!-- サブセクション「8.4.2.31.全照射時間」参照 -->

    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>

  <!-- サブセクション「8.4.2.32.施行前の治療の有無」参照 -->

  ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>

    <!-- サブセクション「8.4.2.33.内視鏡看護師・技師名」参照 -->

    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>

  <!-- サブセクション「8.4.2.34.胆道造影範囲」参照 -->

  ...
  </section>
</component>
</component>
<section>

```

```

        <!-- サブセクション「8.4.2.35.膵管造影範囲」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.36.胆管挿管」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.37.膵管挿管」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.38.胆管径」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.39.膵管径」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.40.ERCP 難度」参照 -->
        ...
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <!-- サブセクション「8.4.2.41.専攻医が施行した場合の完遂率\(%\)」参照 -->
        ...
    </section>
</component>

```




```

<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.42.最初の胆管へのアプローチ法」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.43.深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.44.最終的な深部挿入時のアプローチ方法」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.1.14. 検査後情報(ERCP)

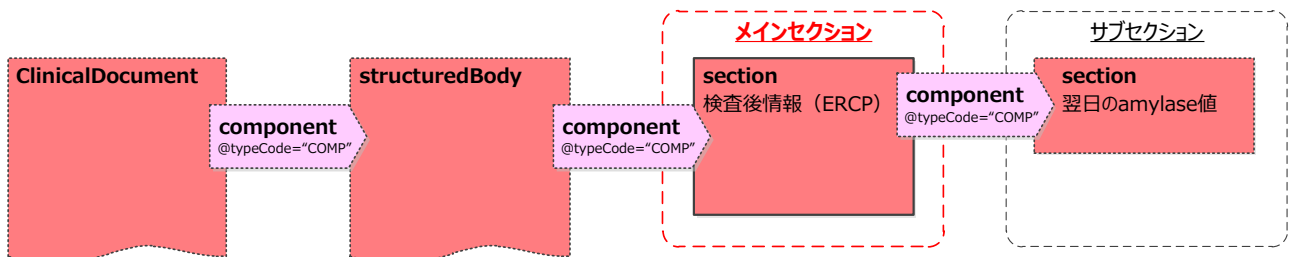

(1) 概要

JED-Project で定義されている検査後情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

(2) 検査後情報(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-14 検査後情報(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:検査後情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5 – Post-Examination Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の検査後情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				検査後情報(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査後情報(ERCP)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査後情報(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	41500000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Post-Examination Information (ERCP)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査後情報(ERCP)	本規約指定値
	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1'] 「8.4.2.45.翌日の amylase 値」参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5"/>
  <code code="41500000" displayName="Post-Examination Information (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査後情報(ERCP)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.45.翌日の amylase 値」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.15. 偶発症情報(上部)

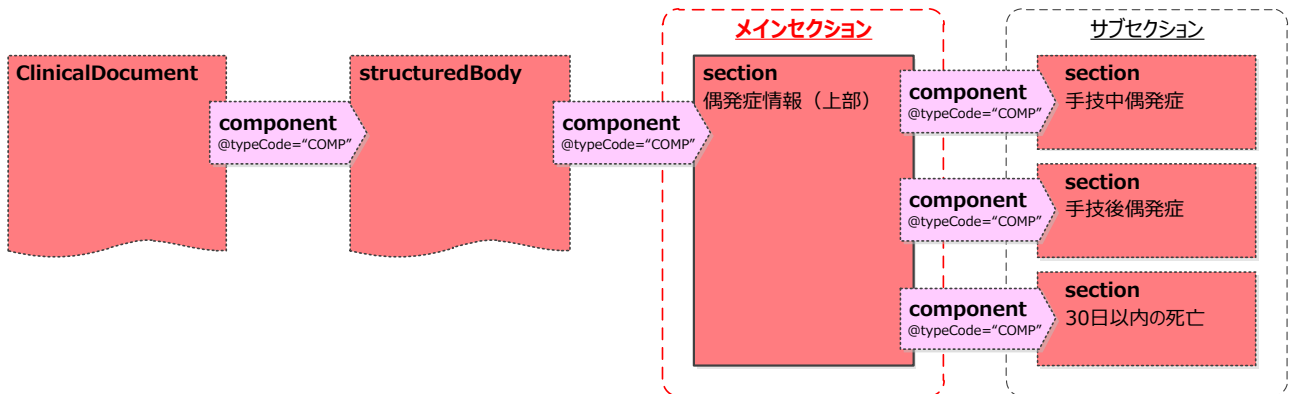

(1) 概要

JED-Project で定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、上部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 偶発症情報(上部)記述 XML 仕様

表 8-15 偶発症情報(上部)セクション記述 XML 仕様

Template:偶発症情報(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6 – Adverse Events Information (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている上部内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				偶発症情報(上部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		偶発症(上部)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症情報(上部)セクションコード
	@code	1..1	M	11600000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Adverse Events Information (upper endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			偶発症情報(上部)	本規約指定値
2510	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1'] [8.4.2.46.手技中偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2'] [8.4.2.47.手技後偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4'] [8.4.2.49.30 日以内の死亡] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6"/>
  <code code="11600000" displayName="Adverse Events Information (upper
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>偶発症情報(上部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.46.手技中偶発症」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.47.手技後偶発症」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.49.30 日以内の死亡」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.16. 偶発症情報(下部)

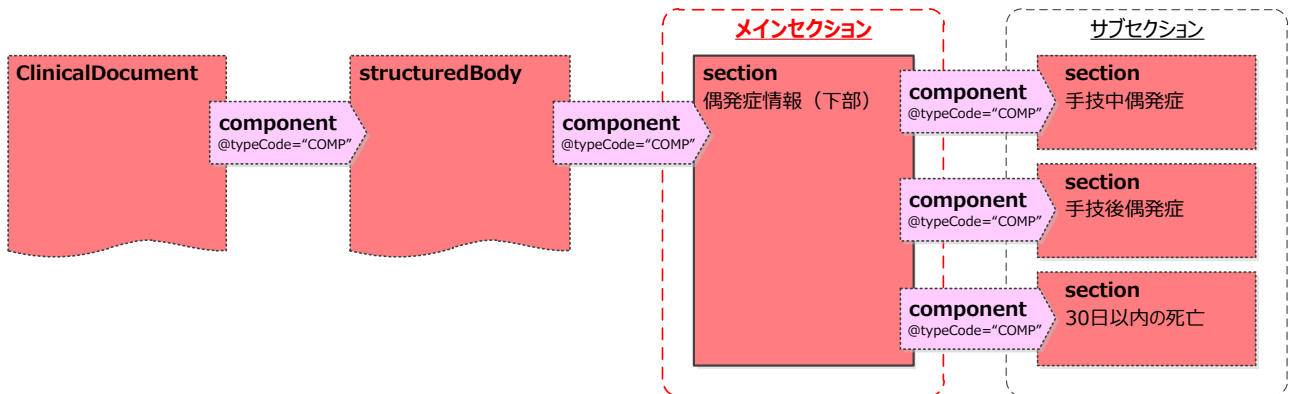

(1) 概要

JED-Project で定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、下部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 偶発症情報(下部)記述 XML 仕様

表 8-16 偶発症情報(下部)セクション記述 XML 仕様

Template:偶発症情報(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6 – Adverse Events Information (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 –メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている下部内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				偶発症情報(下部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		偶発症(下部)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症情報(下部)セクションコード
	@code	1..1	M	21600000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Adverse Events Information (colonoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			偶発症情報(下部)	本規約指定値
3510	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1'] [8.4.2.46.手技中偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2'] [8.4.2.47.手技後偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4'] [8.4.2.49.30 日以内の死亡] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6"/>
  <code code="21600000" displayName="Adverse Events Information (colonoscopy)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>偶発症情報(下部)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.46.手技中偶発症\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.47.手技後偶発症\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.49.30 日以内の死亡\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.17. 偶発症情報(小腸)

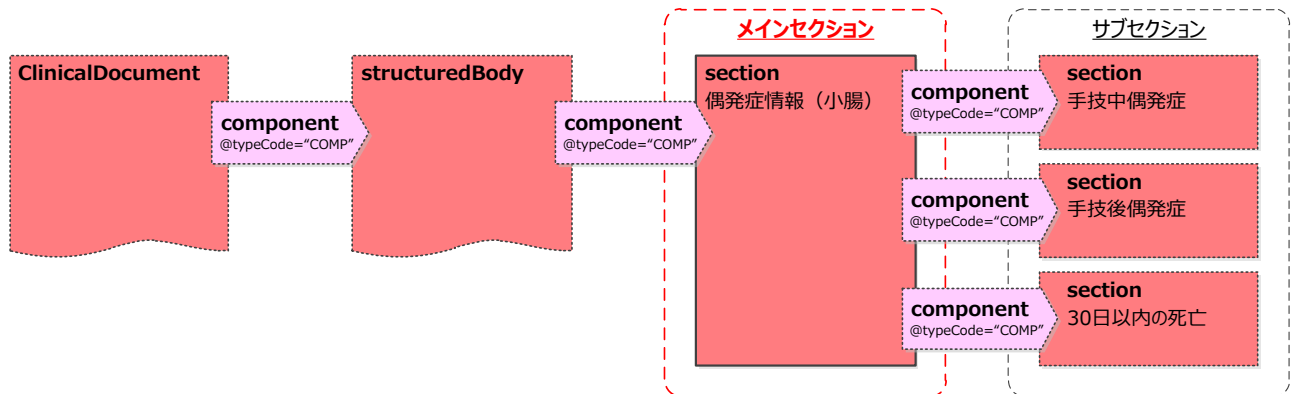

(1) 概要

JED-Project で定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、小腸内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 偶発症情報(小腸)記述 XML 仕様

表 8-17 偶発症情報(小腸)セクション記述 XML 仕様

Template:偶発症情報(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6 – Adverse Events Information (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 –メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている小腸内視鏡検査の偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				偶発症情報(小腸)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		偶発症(小腸)セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症情報(小腸)セクションコード
	@code	1..1	M	31600000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Adverse Events Information (small intestinal endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			偶発症情報(小腸)	本規約指定値
4510	component	1..1	M		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1'] [8.4.2.46.手技中偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2'] [8.4.2.47.手技後偶発症] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4'] [8.4.2.49.30 日以内の死亡] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6"/>
  <code code="31600000" displayName="Adverse Events Information (small intestinal
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>偶発症情報(小腸)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.46.手技中偶発症\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.47.手技後偶発症\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.49.30 日以内の死亡\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```


8.4.1.18. 偶発症情報(ERCP)

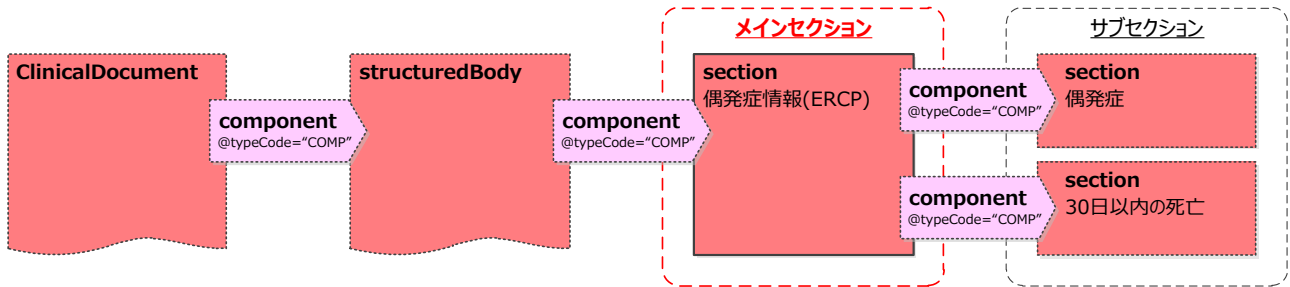

(1) 概要

JED-Project で定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目、項目値、入力項目指標(Type)が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

(2) 偶発症情報(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-18 偶発症情報(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:偶発症情報(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6 – Adverse Events Information (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 –メインカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP 検査の偶発症情報のサブカテゴリーの項目をグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				偶発症情報(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		偶発症(ERCP)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症情報(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	41600000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Adverse Events Information (ERCP)	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			偶発症情報(ERCP)	本規約指定値
	component	1..1	M		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3 '] [8.4.2.48.偶発症(ERCP)] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4'] [8.4.2.49.30 日以内の死亡] 参照


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6"/>
  <code code="41600000" displayName="Adverse Events Information (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>偶発症情報(ERCP)</title>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.48.偶発症\(ERCP\)」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.49.30 日以内の死亡」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.19. 総合診断(上部)

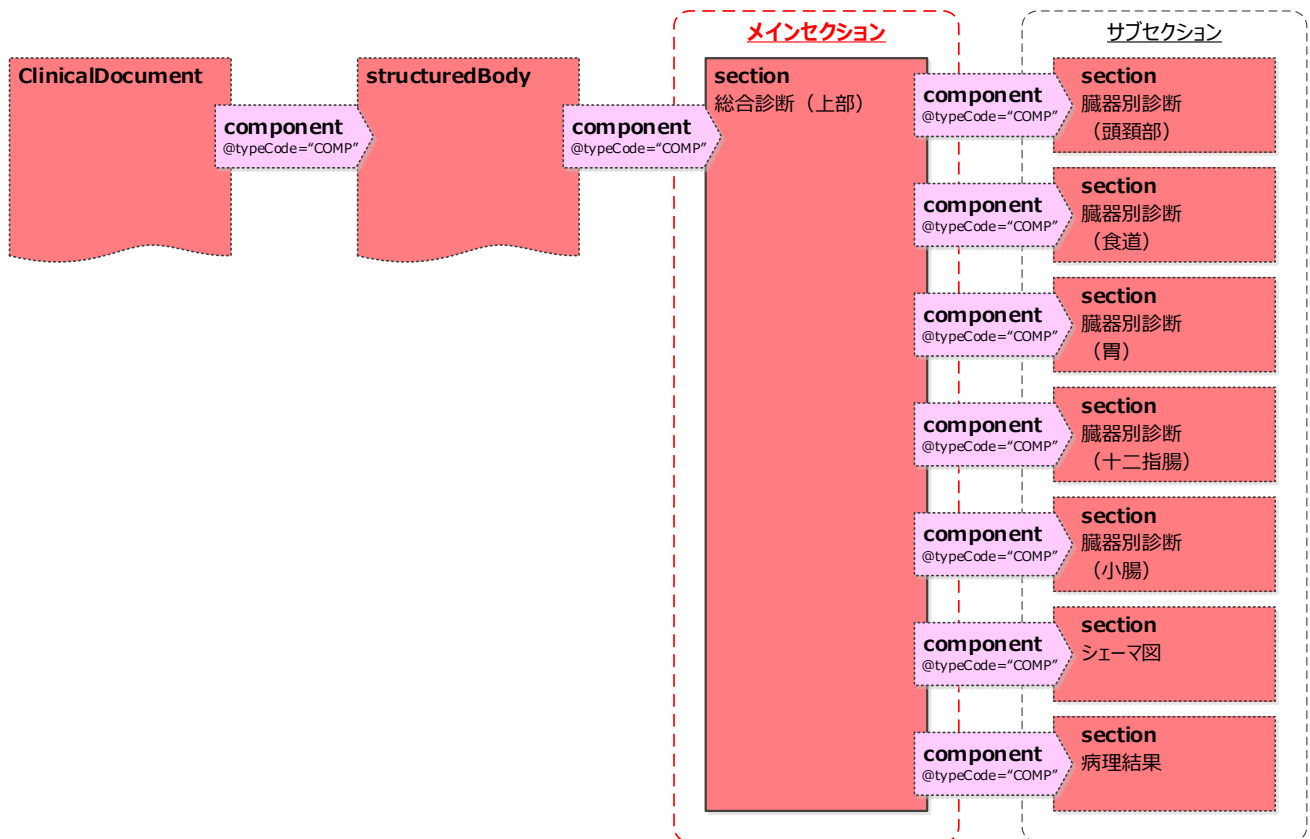

(1) 概要

JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、上部内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 総合診断(上部)記述 XML 仕様

表 8-19 総合診断(上部)セクション記述 XML 仕様

Template:総合診断(上部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7 - Comprehensive Diagnosis (upper endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	上部内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				総合診断(上部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		総合診断(上部)セクションテンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		総合診断(上部)セクションコード
	@code	1..1	M	1A000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Comprehensive Diagnosis (upper endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			総合診断(上部)	本規約指定値
	text	0..1	R		総合診断
	text()			ex. [主/胃]:胃癌 [副/胃]:過形成性ポリープ(無 茎性)	診断の主要な情報、検査全体に関するコメン トなどをテキストで記述。
	component	0..1	R		頭頸部診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] 「8.4.2.50.臓器別診断」 参照 JED code:ZAA00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		食道診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] 「8.4.2.50.臓器別診断」 参照 JED code:ZAB00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		胃診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] 「8.4.2.50.臓器別診断」 参照 JED code:ZAC00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		十二指腸診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] 「8.4.2.50.臓器別診断」 参照 JED code:ZAD00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		小腸診断

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAJ00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2'] [8.4.2.51.シエーマ図] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3'] [8.4.2.52.病理結果] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7"/>
  <code code="1A000000" displayName="Comprehensive Diagnosis (upper
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>総合診断(上部)</title>
  <text>
    <paragraph>[主/胃]:胃癌</paragraph>
    <paragraph>[副/胃]:過形成性ポリープ(無茎性)</paragraph>
    <paragraph>[副/十二指腸]:十二指腸潰瘍</paragraph>
  </text>
  <component>
    <section>
      <!-- 頭頸部診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 食道診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 胃診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>


```

```

<!-- 十二指腸診断「8.4.2.50.臓器別診断」参照 -->
...
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- 小腸診断「8.4.2.50.臓器別診断」参照 -->
    ...
    </section>
  </component>
</component>
<section>
  <!-- サブセクション「8.4.2.51.シエマ図」参照 -->
  ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.52.病理結果」参照 -->
    ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.20. 総合診断(下部)

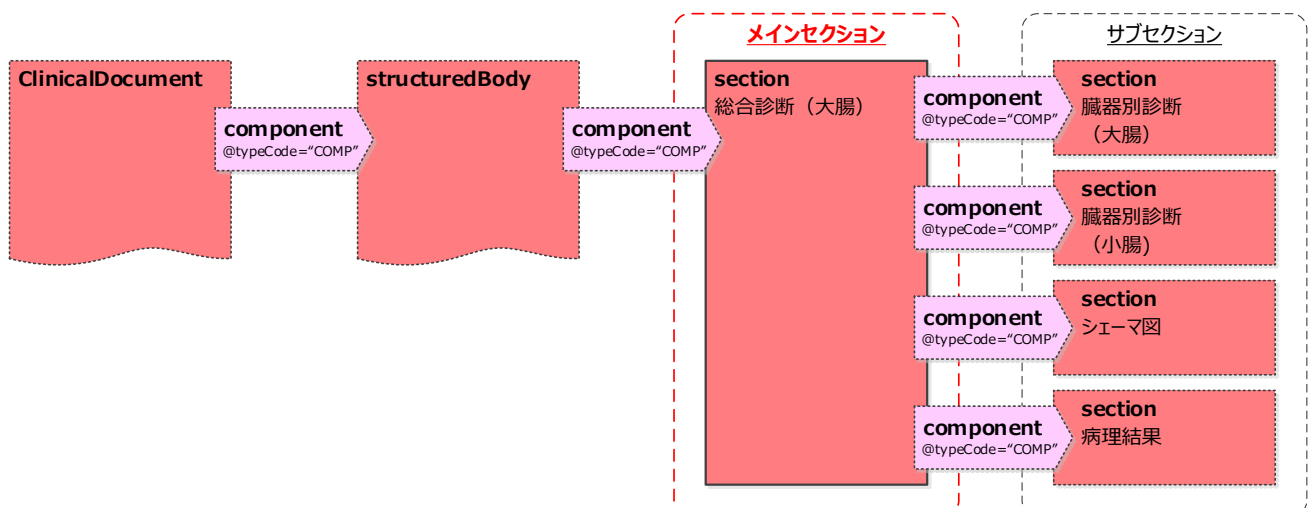

(1) 概要

JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、下部内視鏡検査のセクションとして定義する。

© JAHIS 2026

(2) 総合診断(下部)記述 XML 仕様

表 8-20 総合診断(下部)セクション記述 XML 仕様

Template:総合診断(下部)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7 – Comprehensive Diagnosis (colonoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	下部内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断/処置/病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				総合診断(下部)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		総合診断(下部)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		総合診断(下部)セクションコード
	@code	1..1	M	2A000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Comprehensive Diagnosis (colonoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()				総合診断(下部)
	text	0..1	R		総合診断
	text()			ex. [主/大腸]: 悪性リンパ腫 (MALT リンパ腫) [副/大腸]: 憩室	診断の主要な情報、検査全体に関するコメントなどをテキストで記述。
	component	0..1	R		大腸診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAL00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		小腸診断

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAJ00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2'] [8.4.2.51.シェーマ図] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3'] [8.4.2.52.病理結果] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7"/>
  <code code="2A000000" displayName="Comprehensive Diagnosis (colonoscopy)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>総合診断(下部)</title>
  <text>
    [主／大腸]:悪性リンパ腫(MALT リンパ腫)
    [副／大腸]:憩室
  </text>
  <component>
    <section>
      <!-- 大腸診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 小腸診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.51.シェーマ図\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション\[8.4.2.52.病理結果\]参照 -->

```




```

...
</section>
</component>
</section>

```

8.4.1.21. 総合診断(小腸)

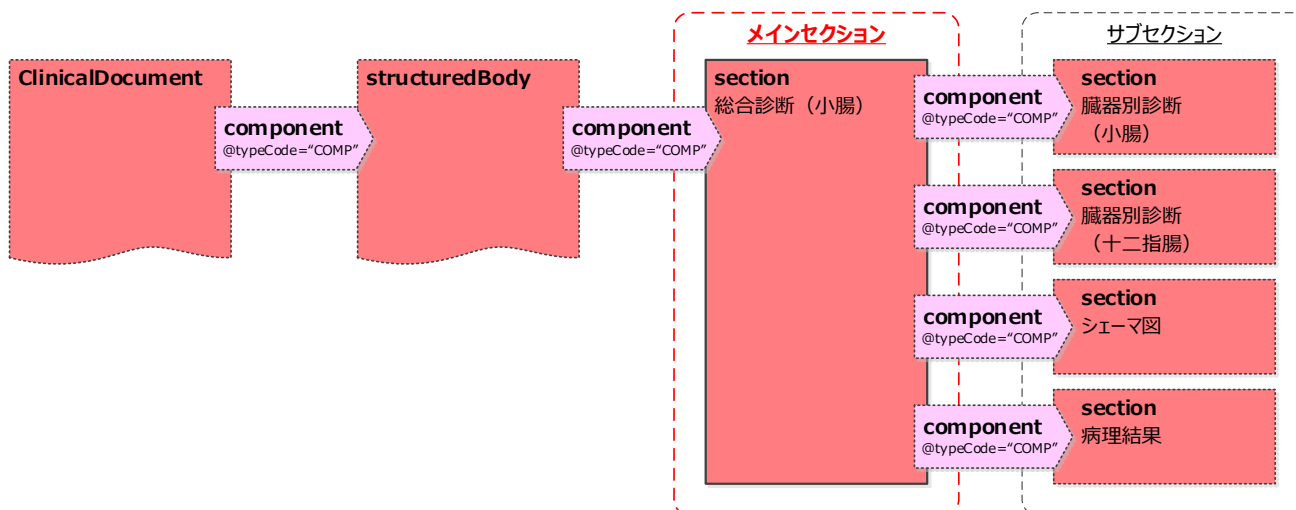

(1) 概要

JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、小腸内視鏡検査のセクションとして定義する。

(2) 総合診断(小腸)記述 XML 仕様

表 8-21 総合診断(小腸)セクション記述 XML 仕様

Template:総合診断(小腸)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7 - Comprehensive Diagnosis (small intestinal endoscopy) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	小腸内視鏡検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				総合診断(小腸)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		総合診断(小腸)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		総合診断(小腸)セクションコード
	@code	1..1	M	3A000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Comprehensive Diagnosis (small intestinal endoscopy)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			総合診断(小腸)	本規約指定値
	text	0..1	R		総合診断
	text()			ex. [主/小腸]:悪性リンパ腫(T 細胞リンパ腫) [副/小腸]:メッケル憩室	診断の主要な情報、検査全体に関するコメントなどをテキストで記述。
	component	0..1	R		小腸診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAJ00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		十二指腸診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAD00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2'] [8.4.2.51.シェーマ図] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3'] [8.4.2.52.病理結果] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7"/>
  <code code="3A000000" displayName="Comprehensive Diagnosis (small intestinal
    endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>総合診断(小腸)</title>
  <text>
    [主/小腸]:悪性リンパ腫(T 細胞リンパ腫)
  </text>


```

```

    [副／小腸]:メッケル憩室
  </text>
  <component>
    <section>
      <!-- 小腸診断「8.4.2.50.臓器別診断」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 十二指腸診断「8.4.2.50.臓器別診断」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.51.シェーマ図」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- サブセクション「8.4.2.52.病理結果」参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
</section>

```

8.4.1.22. 総合診断(ERCP)

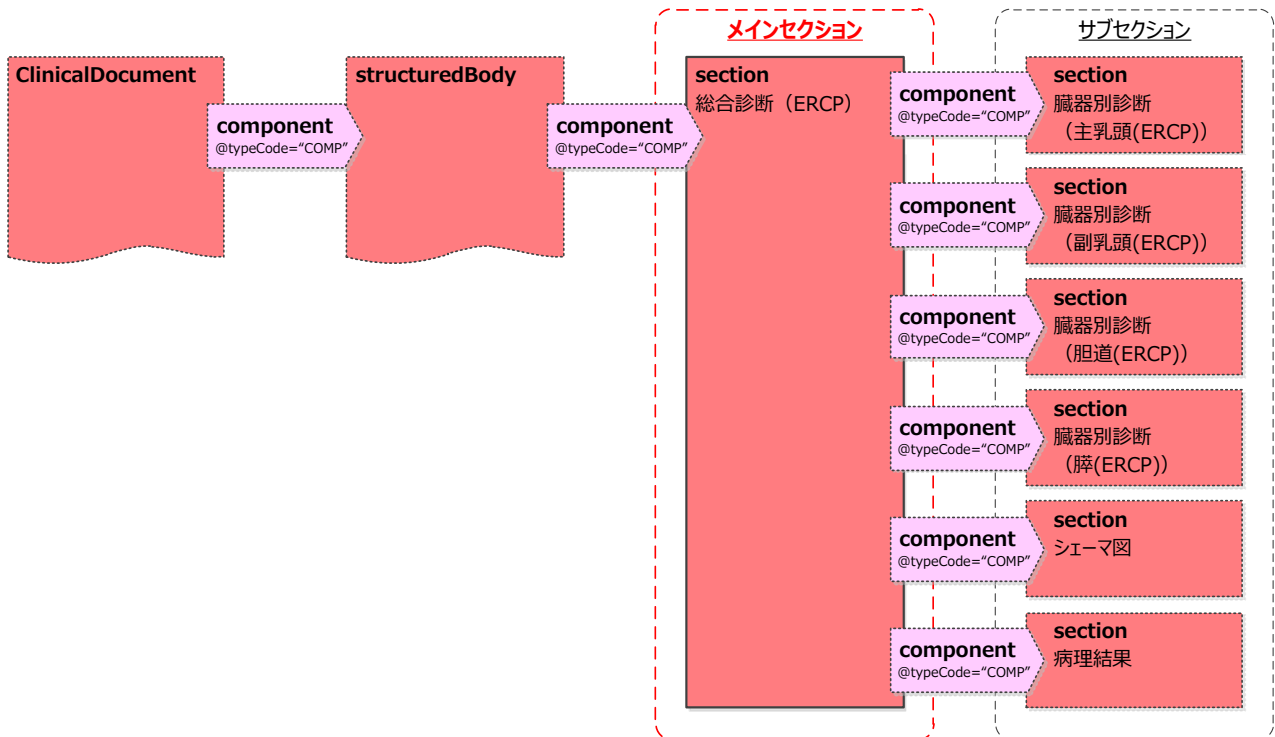

(1) 概要

JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用する。検査種別により要求されるサブカテゴリーの項目および項目値が異なるため、ERCP 検査のセクションとして定義する。

(2) 総合診断(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-22 総合診断(ERCP)セクション記述 XML 仕様

Template:総合診断(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7 – Comprehensive Diagnosis (ERCP) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	ERCP 検査の総合診断情報(任意)を記述するとともに、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用して作成したサブセクションをグルーピングするために使用するセクションレベルのテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section				総合診断(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		総合診断(ERCP)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				104.7	
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		総合診断(ERCP)セクションコード
	@code	1..1	M	4A000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Comprehensive Diagnosis (ERCP)	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			総合診断(ERCP)	本規約指定値
	text	0..1	R		総合診断
	text()			ex. [主/胆道(ERCP)]:急性胆嚢 炎 [全体コメント]バイアスピリン、 クロビドグレル内服中であり、 ESTは施行せず。	診断の主要な情報、検査全体に関するコメン トなどをテキストで記述。
	component	0..1	R		主乳頭(ERCP)診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAF00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		副乳頭(ERCP)診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAG00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		胆道(ERCP)診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAH00000 LOINC : T.B.D.
	component	0..1	R		膵(ERCP)診断 section [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1'] [8.4.2.50.臓器別診断] 参照 JED code:ZAM00000 LOINC : T.B.D.

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2'] [8.4.2.51.シェーマ図] 参照
	component	0..1	R		section [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3'] [8.4.2.52.病理結果] 参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7"/>
  <code code="4A000000" displayName="Comprehensive Diagnosis (ERCP)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>総合診断(ERCP)</title>
  <text>
    <paragraph>[主/胆道(ERCP)]:腫瘍性疾患</paragraph>
    <paragraph>[全体コメント]:バイアスピリン、クロピドグレル内服中であり、EST は施行せず。
    </paragraph>
  </text>
  <component>
    <section>
      <!-- 主乳頭(ERCP)診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 副乳頭(ERCP)診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 胆道(ERCP)診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <!-- 膵(ERCP)診断\[8.4.2.50.臓器別診断\]参照 -->
      ...
    </section>
  </component>

```

```

<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.51.シェーマ図」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <!-- サブセクション「8.4.2.52.病理結果」参照 -->
    ...
  </section>
</component>
</section>

```

8.4.2. サブセクション


メインセクションの component となるセクション。

基本情報のサブカテゴリーの各項目、および JED-Project で診断／処置／病理用語として定義されている各情報を記述するために使用する。

情報の考え方、用語の解説については JED-Project の下記 URL を参照のこと。

<https://jedproject.jges.net/about/terms-commentary/>

8.4.2.1. 年齢

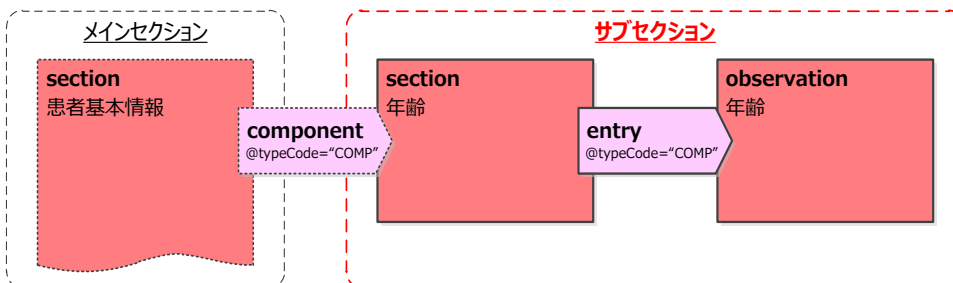

(1) 概要

JED-Project で患者基本情報として定義されている“年齢”を、テキストで記述するために使用する。

(2) 年齢記述 XML 仕様

表 8-23 年齢セクション記述 XML 仕様

Template:年齢セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1 – Age Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの 1 つ “年齢”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				年齢
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		年齢セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		年齢コード
	@code	1..1	M	Z1110003 または 30525-0	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Age	
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			年齢	本規約指定値
	text	1..1	M		年齢
	text()				年齢をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1'] 「表 8-24 年齢オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-24 年齢オブザベーション記述 XML 仕様

Template:年齢オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1 – Age Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者基本情報のサブカテゴリーの 1 つ “年齢” を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				年齢
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されている

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					るため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		Age Observation
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		年齢オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		年齢コード
	@code	1..1	M	Z1110003 または 30525-0	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Age	
	value	1..1	M		年齢値
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 50	患者の年齢 “数値”
	@unit	1..1	F	a	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1"/>
  <code code="Z1110003" displayName="Age"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>年齢</title>
  <text>50</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1"/>
      <code code="Z1110003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="50" unit="a"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.2.検査回数(生涯)

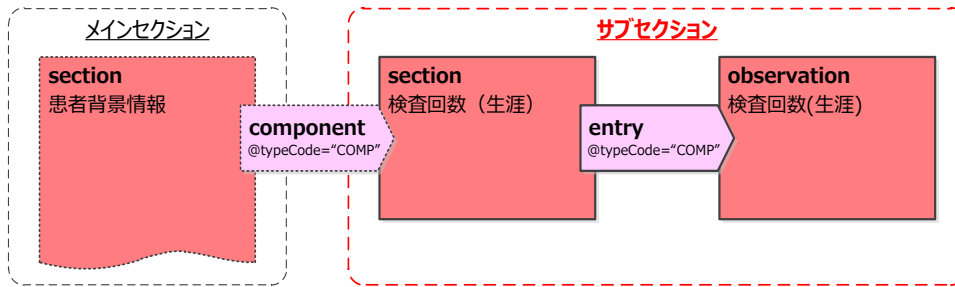

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“検査回数(生涯)”を記述するために使用する。

(2) 検査回数(生涯)記述 XML 仕様

表 8-25 検査回数(生涯)セクション XML 仕様

Template:検査回数(生涯)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1 – Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “検査回数(生涯)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				検査回数(生涯)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査回数(生涯)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査回数(生涯)コード
	@code	1..1	M	Z1210001 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Number of Colonoscopies/ Enteroscopies (Lifetime)	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	title	1..1	M		セクションタイトル
	text()			検査回数(生涯)	本規約指定値
	text	1..1	M		検査回数(生涯)
	text()				検査回数(生涯)の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1'] [表 8-26 検査回数(生涯)オブザベーション記述 XML 仕様]参照

表 8-26 検査回数(生涯)オブザベーション記述 XML 仕様

Template:検査回数(生涯)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1 – Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “検査回数(生涯)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				検査回数(生涯)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Observation
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		検査回数(生涯)オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		検査回数(生涯)コード
	@code	1..1	M	Z1210001 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	0..1	O	Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime)	
	value	1..1	M		検査回数(生涯)の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
  <code code="Z1210001" displayName="Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査回数(生涯)</title>
  <text>初回</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1"/>
      <code code="Z1210001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.3.ASA Grade

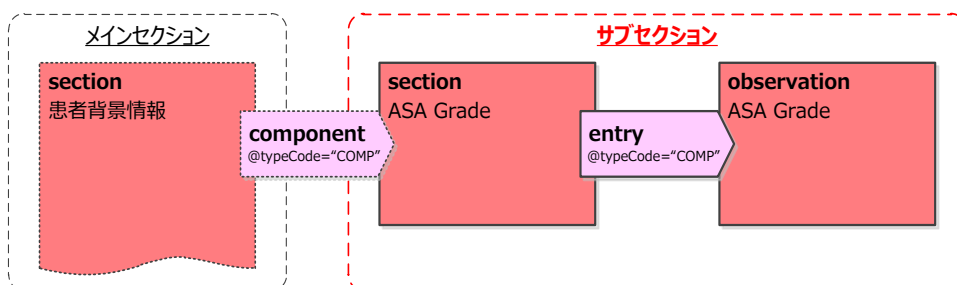

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“ASA Grade”を記述するために使用する。

(2) ASA Grade 記述 XML 仕様

表 8-27 ASA Grade セクション XML 仕様

Template:ASA Grade セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2 – ASA Physical Status Classification Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ASA Grade”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				ASA Grade
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		ASA Grade セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ASA Grade コード
	@code	1..1	M	Z1210002 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	ASA Physical Status Classification	
	title	1..1	M		ASA Grade セクションタイトル
	text()			ASA Grade	本規約指定値
	text	1..1	M		ASA Grade
	text()				ASA Grade の “項目値” をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2'] 「表 8-28 ASA Grade オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-28 ASA Grade オブザベーション記述 XML 仕様

Template:ASA Grade オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2 – ASA Physical Status Classification Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2

バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ASA Grade”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				ASA Grade
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		ASA Grade
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		ASA Grade オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ASA Grade コード
	@code	1..1	M	Z1210002 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	ASA Physical Status Classification	
	value	1..1	M		ASA Grade の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2"/>
  <code code="Z1210002" displayName="ASA Physical Status Classification"


```

```

codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>ASA Grade</title>
<text>1:大きな問題はない</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2"/>
    <code code="Z1210002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1220011"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.4.抗血栓薬

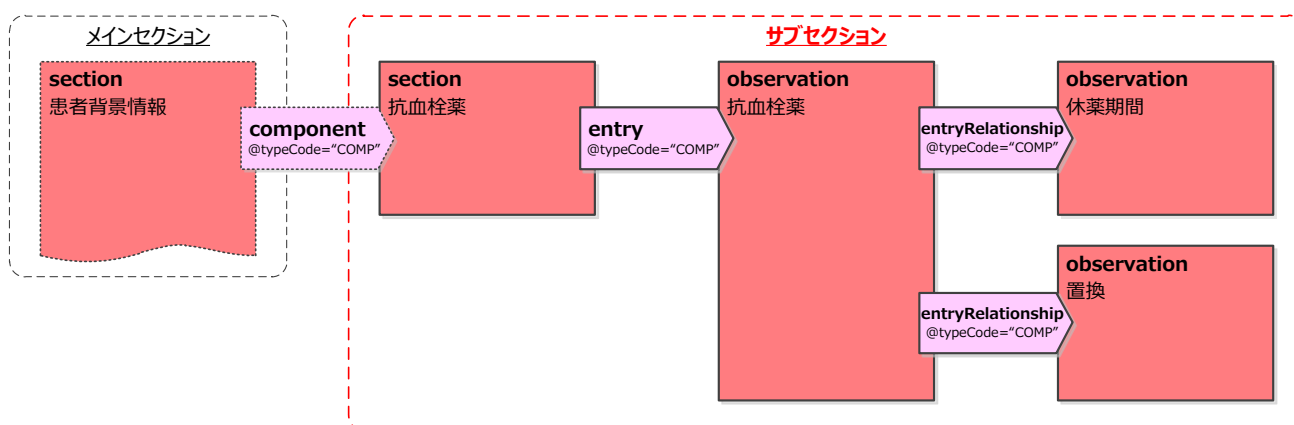

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“抗血栓薬”を記述するために使用する。

(2) 抗血栓薬記述 XML 仕様

表 8-29 抗血栓薬セクション XML 仕様

Template:抗血栓薬セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3 - Antithrombotic Agents Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				抗血栓薬
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	templateId	1..1	M		抗血栓薬セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		抗血栓薬コード
	@code	1..1	M	Z1210003 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Antithrombotic Agents	
	title	1..1	M		抗血栓薬セクションタイトル
	text()			抗血栓薬	本規約指定値
	text	1..1	M		抗血栓薬
	text()				主情報/副情報の"項目名"を見出しに、"項目値"を"項目名"に対するデータとして表形式で記述する
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3'] 「表 8-30 抗血栓薬オブザベーション記述 XML 仕様」 参照 複数種類ある場合は個別に記述する

表 8-30 抗血栓薬オブザベーション記述 XML 仕様

Template:抗血栓薬オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3 - Antithrombotic Agents Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				抗血栓薬
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		抗血栓薬
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		抗血栓薬オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		抗血栓薬コード
	@code	1..1	M	Z1210003 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Antithrombotic Agents	
	value	1..1	M		抗血栓薬の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1'] 「表 8-31 休薬期間オブザベーション記述 XML仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2'] 「表 8-32 置換オブザベーション記述 XML仕様」 参照

表 8-31 休薬期間オブザベーション記述 XML仕様

Template:休薬期間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1 - Drug Withdrawal Period Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “抗血栓薬”の“休薬期間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				休薬期間

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		休薬期間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		休薬期間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		休薬期間コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Drug Withdrawal Period	
	value	1..1	M		休薬期間の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	副情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-32 置換オブザベーション記述 XML 仕様

Template:置換オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2 - Replace Medicine Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ "抗血栓薬" の "置換" を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				置換
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォ

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		置換
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		置換オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		置換コード
	@code	1..1	M	JED用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Replace Medicine	
	value	1..1	M		置換の"項目値"コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	副情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"/>
  <code code="Z1210003" displayName="Antithrombotic Agents"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>抗血栓薬</title>
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>抗血栓薬</th>
          <th>休薬期間</th>
          <th>置換</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>

```

```

        <td>アスピリン</td>
        <td>当日のみ休薬</td>
        <td>置換なし</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>ワルファリン</td>
        <td>休薬なし</td>
        <td>置換なし</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
        <code code="Z1210003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220021"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
                <code code="Z1Z30001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
                <value xsi:type="CD" code="Z1Z40002"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2"/>
                <code code="Z1Z30011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
                <value xsi:type="CD" code="Z1Z40021"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
        <code code="Z1210003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220024"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
                <code code="Z1Z30001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
                <value xsi:type="CD" code="Z1Z40001"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.2"/>
        <code code="Z1Z30012" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1Z40021"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
</section>


```

(4) (3) XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

抗血栓薬

抗血栓薬	休薬期間	置換
アスピリン	当日のみ休薬	置換なし
ワルファリン	休薬なし	置換なし

8.4.2.5.喫煙

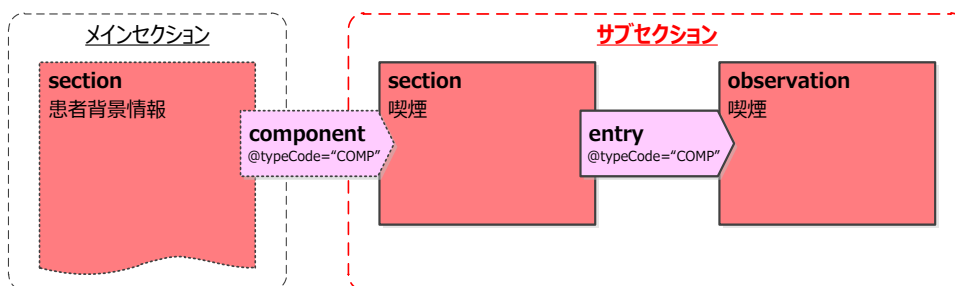

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“喫煙”を記述するために使用する。

(2) 喫煙記述 XML 仕様

表 8-33 喫煙セクション XML 仕様

Template:喫煙セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4 – Smoker/Non-smoker Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “喫煙”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/				喫煙

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
section					
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		喫煙セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		喫煙コード
	@code	1..1	M	Z1210004 または 72166-2	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Smoker/Non-smoker	
	title	1..1	M		喫煙セクションタイトル
	text()			喫煙	本規約指定値
	text	1..1	M		喫煙
	text()				喫煙の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4'] 「表 8-34 喫煙オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-34 喫煙オブザベーション記述 XML 仕様

Template:喫煙オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4 - Smoker/Non-smoker Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ "喫煙" を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry					
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	observation	1..1	M		喫煙
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		喫煙 オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		喫煙コード
	@code	1..1	M	Z1210004 または 72166-2	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Smoker/Non-smoker	
	value	1..1	M		喫煙の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4"/>
  <code code="Z1210004" displayName="Smoker/Non-smoker"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>喫煙</title>
  <text>非喫煙者</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4"/>
      <code code="Z1210004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220033"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.6. 飲酒

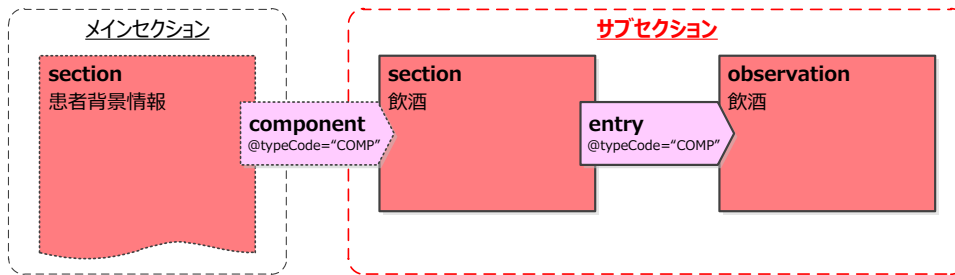

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“飲酒”を記述するために使用する。

(2) 飲酒記述 XML 仕様

表 8-35 飲酒セクション XML 仕様

Template: 飲酒セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5 - Drinking History and Condition Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “飲酒”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				飲酒
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		飲酒セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		飲酒コード
	@code	1..1	M	Z1210005 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Drinking History and Condition	
	title	1..1	M		飲酒セクションタイトル

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text()			飲酒	本規約指定値
	text	1..1	M		飲酒
	text()				飲酒の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5'] 「表 8-36 飲酒オブザベーション記述 XML仕様」参照

表 8-36 飲酒オブザベーション記述 XML仕様

Template:飲酒オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5 – Drinking History and Condition Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “飲酒”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				飲酒
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		飲酒
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		飲酒 オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		飲酒コード
	@code	1..1	M	Z1210005 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Drinking History and Condition	
	value	1..1	M		飲酒の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5"/>
  <code code="Z1210005" displayName="Drinking History and Condition"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>飲酒</title>
  <text>習慣飲酒者</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5"/>
      <code code="Z1210005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220041"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.7.悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)

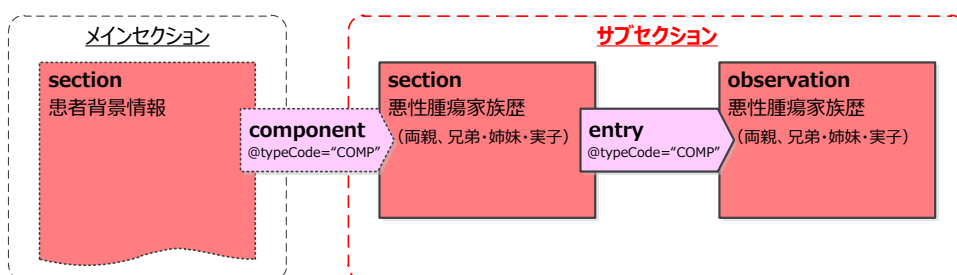

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するために使用する。

(2) 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)記述 XML 仕様

表 8-37 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション XML 仕様

Template:悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6 – Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/ Biological Child) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6
バージョン	2021.8.10

CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) コード
	@code	1..1	M	Z1210006 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/ Biological Child)	
	title	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) セクションタイトル
	text()			悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	本規約指定値
	text	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	text()				悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) の “項目値” をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6'] 「表 8-38 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-38 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション記述 XML 仕様
Template:悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6 – Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)コード
	@code	1..1	M	Z1210006 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/ Biological Child)	
	value	1..1	M		悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または 2.16.840.1.113883.6.1	上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6"/>
  <code code="Z1210006" displayName="Family History of Malignant Tumor (Parents,
    Brother/Sister/Biological Child)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED"/>
  <title>悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)</title>
  <text>なし</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6"/>
      <code code="Z1210006" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.8.大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)

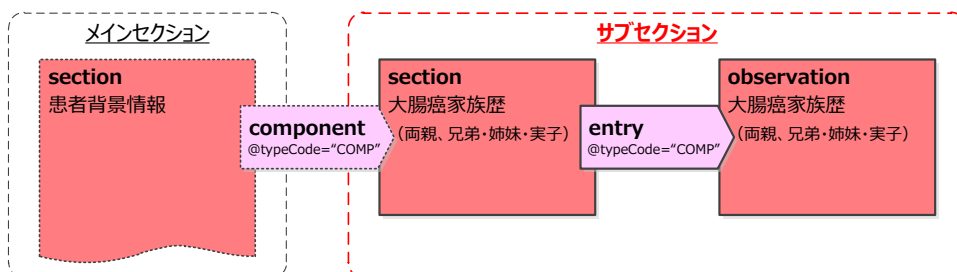

(1) 概要

JED-Projectで患者背景情報として定義されている“大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するために使用する。

(2) 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)記述 XML 仕様

表 8-39 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション XML 仕様

Template:大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7 – Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー

解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。
----	------------------------------------------------------------------------------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) コード
	@code	1..1	M	Z1210007 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child)	
	title	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) セクションタイトル
	text()			大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)	本規約指定値
	text	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	text()				大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)の “項目値” をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7'] 「表 8-40 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-40 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション記述 XML 仕様
Template:大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7 – Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7
バージョン	2021.8.10

CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ“大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) コード
	@code	1..1	M	Z1210007 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child)	
	value	1..1	M		大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル


<section>

```

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7"/>
<code code="Z1210007" displayName="Family History of Colon Cancer (Parents,
  Brother/Sister/Biological Child)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
  codeSystemName="JED"/>
<title>大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)</title>
<text>なし</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7"/>
    <code code="Z1210007" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.9.他臓器癌歴

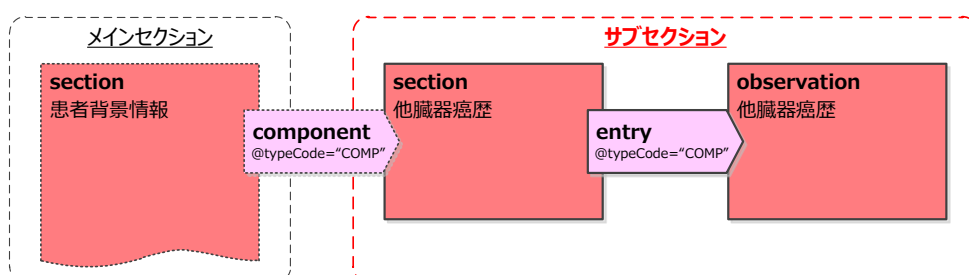

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“他臓器癌歴”を記述するために使用する。

(2) 他臓器癌歴記述 XML 仕様

表 8-41 他臓器癌歴セクション XML 仕様

Template:他臓器癌歴セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8 - Previous History of Other Organ Cancer Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “他臓器癌歴”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				他臓器癌歴
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	templateId	1..1	M		他臓器癌歴セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		他臓器癌歴コード
	@code	1..1	M	Z1210008 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Previous History of Other Organ Cancer	
	title	1..1	M		他臓器癌歴セクションタイトル
	text()			他臓器癌歴	本規約指定値
	text	1..1	M		他臓器癌歴
	text()				他臓器癌歴の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8'] 「表 8-42 他臓器癌歴オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-42 他臓器癌歴オブザベーション記述 XML 仕様

Template:他臓器癌歴オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8 - Previous History of Other Organ Cancer Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ "他臓器癌歴" を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				他臓器癌歴
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		他臓器癌歴
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		他臓器癌歴オブザベーションテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		他臓器癌歴コード
	@code	1..1	M	Z1210008 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Previous History of Other Organ Cancer	
	value	1..1	M		他臓器癌歴の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8"/>
  <code code="Z1210008" displayName="Previous History of Other Organ Cancer"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>他臓器癌歴</title>
  <text>なし</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8"/>
      <code code="Z1210008" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.10. 萎縮度(木村竹本分類)

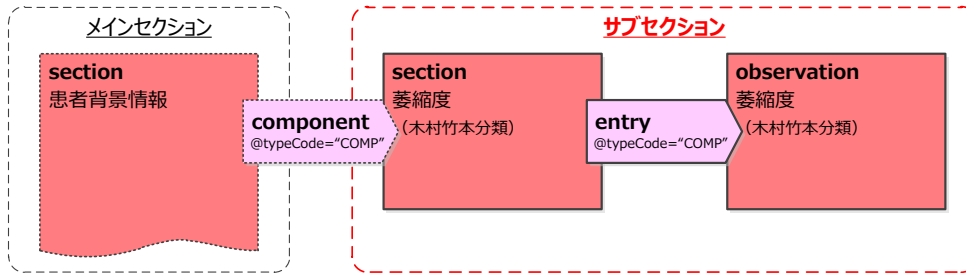

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“萎縮度(木村竹本分類)”を記述するために使用する。

(2) 萎縮度(木村竹本分類)記述 XML 仕様

表 8-43 萎縮度(木村竹本分類)セクション XML 仕様

Template:萎縮度(木村竹本分類)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9 – Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “萎縮度(木村竹本分類)”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				萎縮度(木村竹本分類)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)コード
	@code	1..1	M	Z1210009 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification)	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	title	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)セクションタイトル
	text()			萎縮度(木村竹本分類)	本規約指定値
	text	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)
	text()				萎縮度(木村竹本分類)の“項目値”をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9'] 「表 8-44 萎縮度(木村竹本分類)オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-44 萎縮度(木村竹本分類)オブザベーション記述 XML 仕様

Template:萎縮度(木村竹本分類)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9 - Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “萎縮度(木村竹本分類)”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				萎縮度(木村竹本分類)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)コード
	@code	1..1	M	Z1210009 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	0..1	O	Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification)	
	value	1..1	M		萎縮度(木村竹本分類)の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9"/>
  <code code="Z1210009" displayName="Atrophy Degree (Kimura-Takemoto
    Classification)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED"/>
  <title>萎縮度(木村竹本分類)</title>
  <text>C-1</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9"/>
      <code code="Z1210009" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220052"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.11. ヘリコバクター・ピロリ感染状態

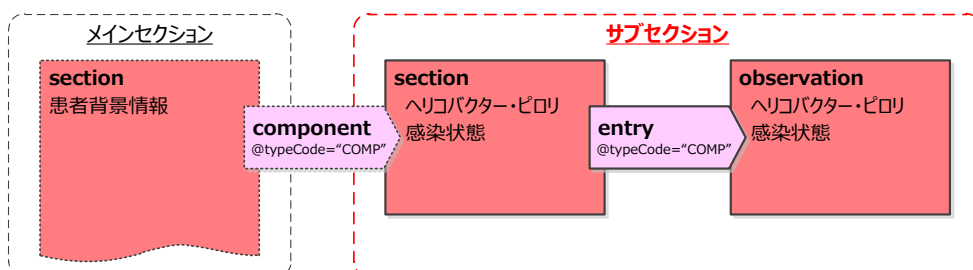

(1) 概要

JED-Projectで患者背景情報として定義されている“ヘリコバクター・ピロリ感染状態”を記述するために使用する。

(2) ヘリコバクター・ピロリ感染状態記述 XML 仕様

表 8-45 ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクション XML 仕様

Template:ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.10 – Helicobacter Pylori and Infection State Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.10
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ヘリコバクター・ピロリ感染状態”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				ヘリコバクター・ピロリ感染状態
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態コード
	@code	1..1	M	Z1210010 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Helicobacter Pylori and Infection State	
	title	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクションタイトル
	text()			ヘリコバクター・ピロリ感染状態	本規約指定値
	text	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態
	text()				ヘリコバクター・ピロリ感染状態の “項目値” をテキストで記述する。“項目値”が“その他 (記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10'] 「表 8-46 ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-46 ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーション記述 XML 仕様

Template:ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10 – Helicobacter Pylori and Infection State Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの1つ “ヘリコバクター・ピロリ感染状態”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				ヘリコバクター・ピロリ感染状態
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態コード
	@code	1..1	M	Z1210010 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Helicobacter Pylori and Infection State	
	value	1..1	M		ヘリコバクター・ピロリ感染状態の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10"/>
  <code code="Z1210010" displayName="Helicobacter Pylori and Infection State"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>ヘリコバクター・ピロリ感染状態</title>
  <text>陰性</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10"/>
      <code code="Z1210010" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220074"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.12. 腹部手術歴

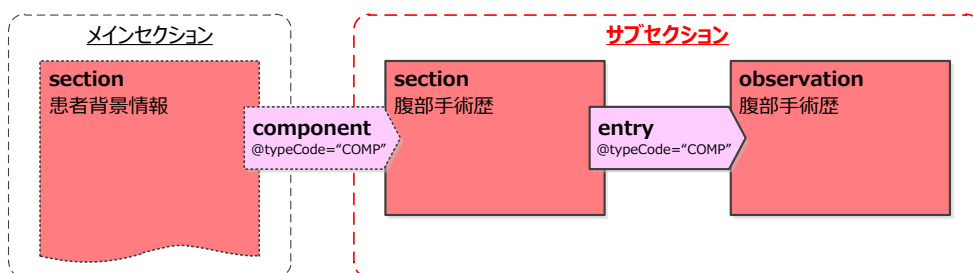

(1) 概要

JED-Project で患者背景情報として定義されている“腹部手術歴”を記述するために使用する。

(2) 腹部手術歴記述 XML 仕様

表 8-47 腹部手術歴セクション XML 仕様

Template:腹部手術歴セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11 - Previous Record of Abdominal Surgeries Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ “腹部手術歴”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				腹部手術歴

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		腹部手術歴セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		腹部手術歴コード
	@code	1..1	M	Z1210011 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Previous Record of Abdominal Surgeries	
	title	1..1	M		腹部手術歴セクションタイトル
	text()			腹部手術歴	本規約指定値
	text	1..1	M		腹部手術歴
	text()				腹部手術歴の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11'] 「表 8-48 腹部手術歴オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-48 腹部手術歴オブザベーション記述 XML 仕様

Template:腹部手術歴オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11 - Previous Record of Abdominal Surgeries Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている患者背景情報のサブカテゴリーの 1 つ "腹部手術歴" を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				腹部手術歴
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	observation	1..1	M		腹部手術歴
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		腹部手術歴オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		腹部手術歴コード
	@code	1..1	M	Z1210011 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Previous Record of Abdominal Surgeries	
	value	1..1	M		腹部手術歴の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11"/>
  <code code="Z1210011" displayName="Previous Record of Abdominal Surgeries"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>腹部手術歴</title>
  <text>なし</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11"/>
      <code code="Z1210011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.13. 予定性

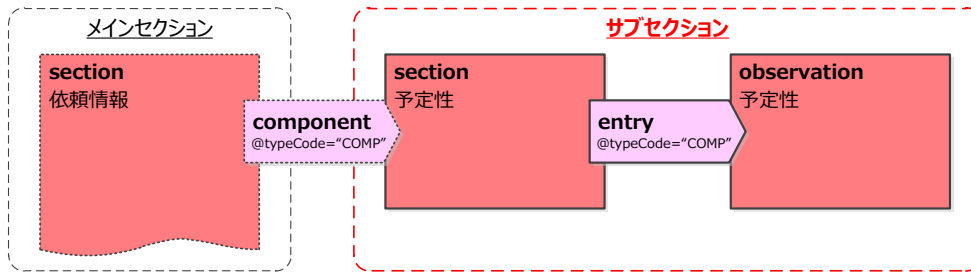

(1) 概要

JED-Project で依頼情報として定義されている“予定性”を記述するために使用する。

(2) 予定性記述 XML 仕様

表 8-49 予定性セクション XML 仕様

Template: 予定性セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1 – Procedure Urgency Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “予定性”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				予定性
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		予定性セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		予定性コード
	@code	1..1	M	Z1310001 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Procedure Urgency	
	title	1..1	M		予定性セクションタイトル
	text()			予定性	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text	1..1	M		予定性
	text()				予定性の "項目値" をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1'] 「表 8-50 予定性オブザベーション記述 XML仕様」参照

表 8-50 予定性オブザベーション記述 XML仕様

Template: 予定性オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1 - Procedure Urgency Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ "予定性"を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				予定性
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		予定性
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		予定性オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1	予定性
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		予定性コード
	@code	1..1	M	Z1310001 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Procedure Urgency	
	value	1..1	M		予定性の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1"/>
  <code code="Z1310001" displayName="Procedure Urgency"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>予定性</title>
  <text>予定</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1"/>
      <code code="Z1310001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1320001"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.14. 外来・入院

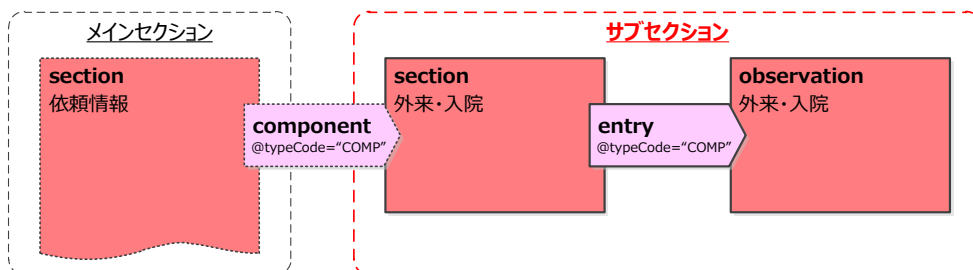

(1) 概要

JED-Project で依頼情報として定義されている“外来・入院”を記述するために使用する。

(2) 外来・入院記述 XML 仕様

表 8-51 外来・入院セクション XML 仕様

Template:外来・入院セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2 – Patient Type Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ “外来・入院”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				外来・入院
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		外来・入院セッションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		外来・入院コード
	@code	1..1	M	Z1310002 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Patient Type	
	title	1..1	M		外来・入院セッションタイトル
	text()			外来・入院	本規約指定値
	text	1..1	M		外来・入院
	text()				外来・入院の“項目値”をテキストで記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2'] 「表 8-52 外来・入院オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-52 外来・入院オブザベーション記述 XML 仕様

Template:外来・入院オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2 – Patient Type Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの1つ“外来・入院”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				外来・入院
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されている

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					るため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		外来・入院
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		外来・入院オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2	外来・入院
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		外来・入院コード
	@code	1..1	M	Z1310002 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Patient Type	
	value	1..1	M		外来・入院の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の "項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"/>
  <code code="Z1310002" displayName="Patient Type"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>外来・入院</title>
  <text>外来</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2"/>
      <code code="Z1310002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1320011"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.15. 検査目的

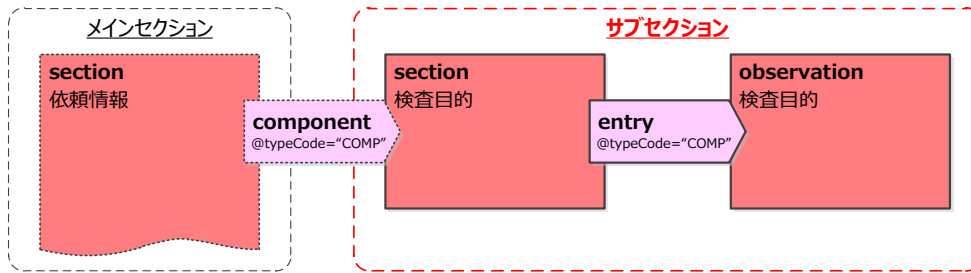

(1) 概要

JED-Project で依頼情報として定義されている“検査目的”を記述するために使用する。

(2) 検査目的記述 XML 仕様

表 8-53 検査目的セクション XML 仕様

Template:検査目的セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3 - Purpose of Examination Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “検査目的”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				検査目的
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		検査目的セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		検査目的コード
	@code	1..1	M	Z1310003 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Purpose of Examination	
	title	1..1	M		検査目的セクションタイトル
	text()			検査目的	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text	1..1	M		検査目的
	text()				検査目的の“項目値”をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3'] 「表 8-54 検査目的オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-54 検査目的オブザベーション記述 XML 仕様

Template:検査目的オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3 - Purpose of Examination Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “検査目的”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				検査目的
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		検査目的
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		検査目的オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		検査目的コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11310001/T.B.D. (上部) 21310001/T.B.D. (下部) 31310001/T.B.D. (小腸) 41310001/T.B.D. (ERCP)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	0..1	O	Purpose of Examination	
	value	1..*	M		検査目的の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1310003" displayName="Purpose of Examination"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>検査目的</title>
  <text>治療前精査、吐・下血以外の有症状</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3" extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="11310001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1320024"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1320023"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/></observation>
    </entry>
  </section>

```

8.4.2.16. 治療目的

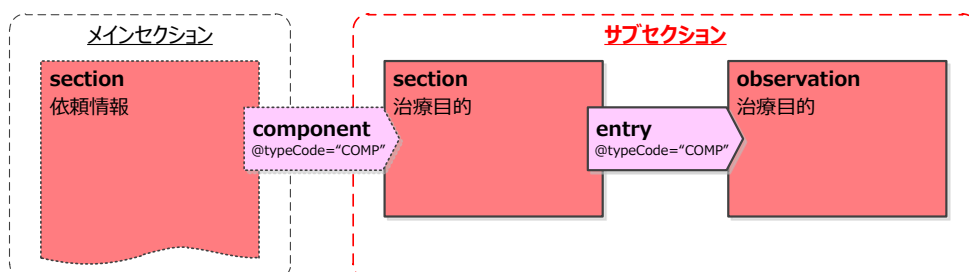

(1) 概要

JED-Project で依頼情報として定義されている“治療目的”を記述するために使用する。

(2) 治療目的記述 XML 仕様

表 8-55 治療目的セクション XML 仕様

Template:治療目的セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4 - Purpose of Treatment Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “治療目的”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				治療目的
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		治療目的セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		治療目的コード
	@code	1..1	M	Z1310004 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Purpose of Treatment	
	title	1..1	M		治療目的セクションタイトル
	text()			治療目的	本規約指定値
	text	1..1	M		治療目的
	text()				治療目的の “項目値” をテキストで記述する。“項目値”が”その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4'] 「表 8-56 治療目的オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-56 治療目的オブザベーション記述 XML 仕様

Template:治療目的オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4 - Purpose of Treatment Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4

バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “治療目的”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				治療目的
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		治療目的
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		治療目的オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		治療目的コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11310002/T.B.D. (上部)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Purpose of Treatment	
	value	1..*	M		治療目的の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の “項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が “その他(記述する)” の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

(3) XML 記述サンプル

<section>


<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.4" extension="2026-XX-XX"/>

```

<code code="Z1310004" displayName="Purpose of Treatment"
  codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>治療目的</title>
<text>EMR</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.4" extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="11310002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="ZZZ05121"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.17. 挿入経路

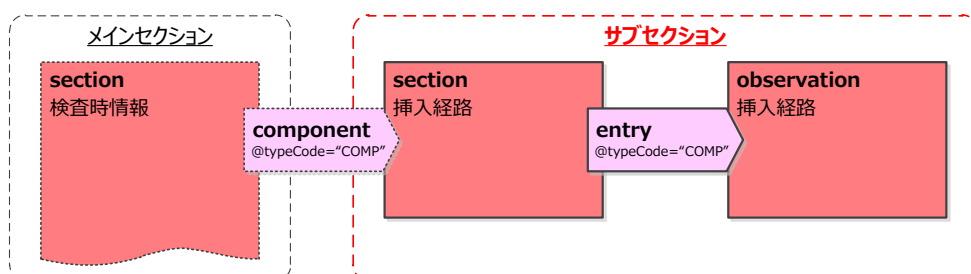

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“挿入経路”を記述するために使用する。

(2) 挿入経路記述 XML 仕様

表 8-57 挿入経路セクション XML 仕様

Template:挿入経路セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1 – Insertion Route Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “挿入経路”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				挿入経路
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		挿入経路セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				1.4.1	
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		挿入経路コード
	@code	1..1	M	Z1410001 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Insertion Route	
	title	1..1	M		挿入経路セクションタイトル
	text()			挿入経路	本規約指定値
	text	1..1	M		挿入経路
	text()				挿入経路の“項目値”をテキストで記述する。 “項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1'] 「表 8-58 挿入経路オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-58 挿入経路オブザベーション記述 XML 仕様

Template:挿入経路オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1 – Insertion Route Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “挿入経路”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				挿入経路
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		挿入経路
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		挿入経路オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				4.1	
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		挿入経路コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11410001/T.B.D. (上部) 31410001/T.B.D. (小腸)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Insertion Route	
	value	1..1	M		挿入経路の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の "項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が "その他(記述する)" の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1"/>
  <code code="Z1410001" displayName="Insertion Route"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>挿入経路</title>
  <text>経口</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1"/>
      <code code="11410001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1420001"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.18. 機種名(スコープ機種名)

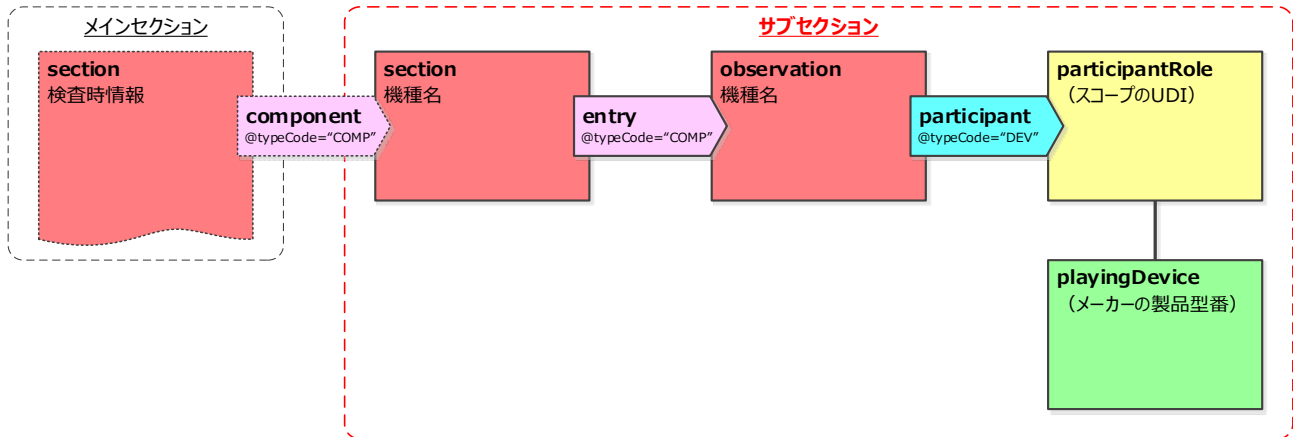

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“機種名”を記述するために使用する。

(2) 機種名記述 XML 仕様

表 8-59 機種名セクション XML 仕様

Template:機種名セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2 - Vender Model Number Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “機種名”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				機種名
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		機種名セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		機種名コード
	@code	1..1	M	Z1410002 または 19785-5	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Vender Model Number of Endoscope	
	title	1..1	M		機種名セクションタイトル
	text()			スコープ機種名	本規約指定値
	text	1..1	M		機種名
	text()				機種名をテキストで記述。", "区切りで複数機種名記載可
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2'] 「表 8-60 機種名オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-60 機種名オブザベーション記述 XML 仕様

Template: 機種名オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2 - Vender Model Number of Endoscope Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “機種名”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				機種名
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		機種名
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		機種名オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		機種名コード
	@code	1..1	M	Z1410002 または 19785-5	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	0..1	O	Vender Model Number of Endoscope	
	participant	0..*	R		スコープの UDI。複数機種の場合、個別に記載
	@typeCode	1..1	F	DEV	本規約指定値
S	@contextControlCode	1..1	F	OP	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	participantRole	1..1	M		
	@classCode	1..1	F	MANU	本規約指定値
	templateId	1..1	M		
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	R		スコープの UDI。検査時に読み込める場合記載する
	@root	1..1	F	2.16.840.1.113883.3.3719	本規約指定値。UID を示す OID
	@extension	0..1	R		スコープの UDI
	playingDevice	1..1	M		スコープの JAN(GTIN)コード
	@classCode	1..1	F	DEV	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"DEV"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	code	0..1	R		JAN(GTIN)の登録がある場合記載する
	@code	1..1	M		スコープの JAN(GTIN)コード
	@codeSystem	1..1	F	1.2.392.200250.2.2.8	本規約指定値。JAN コード OID
	@displayName	0..1	O	Scope JAN Code	
	manufacturer ModelName	0..1	R		メーカー製品型番
	text()				メーカーの製品型番をテキストで記述

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"/>
  <code code="Z1410002" displayName="Vender Model Name"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>スコープ機種名</title>
  <text>GIF-H290Z</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2"/>
      <code code="Z1410002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <participant typeCode="DEV">
        <participantRole classCode="MANU">


```

```

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2.1"/>
<playingDevice>
  <code code="4953170363702" displayName="Scope JAN Code"
    codeSystem="1.2.392.200250.2.2.8"/>
  <manufacturerModelName>GIF-H290Z
</manufacturerModelName>
</playingDevice>
</participantRole>
</participant>
</observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.19. 鎮痙剤使用

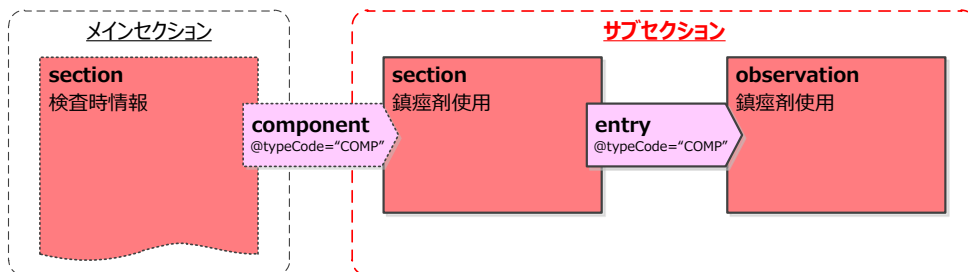

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“鎮痙剤使用”を記述するために使用する。

(2) 鎮痙剤使用記述 XML 仕様

表 8-61 鎮痙剤使用セクション XML 仕様

Template: 鎮痙剤使用セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3 – Status of Use of Antispasmodic Agents Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “鎮痙剤使用”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				鎮痙剤使用
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		鎮痙剤セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		鎮痙剤コード
	@code	1..1	M	Z1410003 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Status of Use of Antispasmodic Agents	
	Title	1..1	M		鎮痙剤使用セッションタイトル
	text()			鎮痙剤使用	本規約指定値
	Text	1..1	M		鎮痙剤使用
	text()				鎮痙剤使用の“項目値”をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	Entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3'] 「表 8-62 鎮痙剤使用オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-62 鎮痙剤使用オブザベーション記述 XML 仕様

Template:鎮痙剤使用オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3 – Status of Use of Antispasmodic Agents Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “鎮痙剤使用”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				鎮痙剤使用
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		鎮痙剤使用
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		鎮痙剤使用オブザベーションテンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		鎮痙剤使用コード
	@code	1..1	M	Z1410003 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Status of Use of Antispasmodic Agents	
	value	1..1	M		鎮痙剤の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の "項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が "その他(記述する)" の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3"/>
  <code code="Z1410003" displayName="Status of Use of Antispasmodic Agents"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>鎮痙剤使用</title>
  <text>抗コリン薬</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3"/>
      <code code="Z1410003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1420012"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.20. 鎮静・鎮痛・麻酔

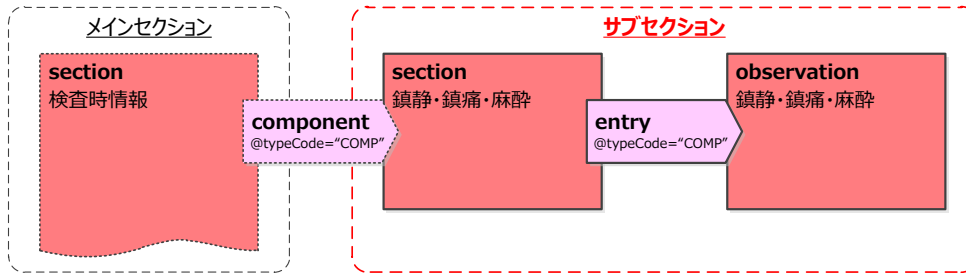

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“鎮静・鎮痛・麻酔”を記述するために使用する。

(2) 鎮静・鎮痛・麻酔記述 XML 仕様

表 8-63 鎮静・鎮痛・麻酔セクション XML 仕様

Template: 鎮静・鎮痛・麻酔セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4 – Sedation/Analgesia/Anesthesia Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “鎮静・鎮痛・麻酔”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				鎮静・鎮痛・麻酔
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔コード
	@code	1..1	M	Z1410004 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Sedation/Analgesia/ Anesthesia	
	title	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔セクションタイトル

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text()			鎮静・鎮痛・麻酔	本規約指定値
	text	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔
	text()				鎮静・鎮痛・麻酔の“項目値”をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4'] [表 8-64 鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーション記述 XML 仕様]参照

表 8-64 鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーション記述 XML 仕様

Template:鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4 – Sedation/Analgesia/Anesthesia Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “鎮静・鎮痛・麻酔”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				鎮静・鎮痛・麻酔
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		鎮静・鎮痛・麻酔コード
	@code	1..1	M	Z1410004 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Sedation/Analgesia/	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				Anesthesia	
	value	1..*	M		鎮静・鎮痛・麻酔の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値か“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410004" displayName="Sedation/Analgesia/Anesthesia"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>鎮静・鎮痛・麻酔</title>
  <text>BZD</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4" extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1420021"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.21. 送気

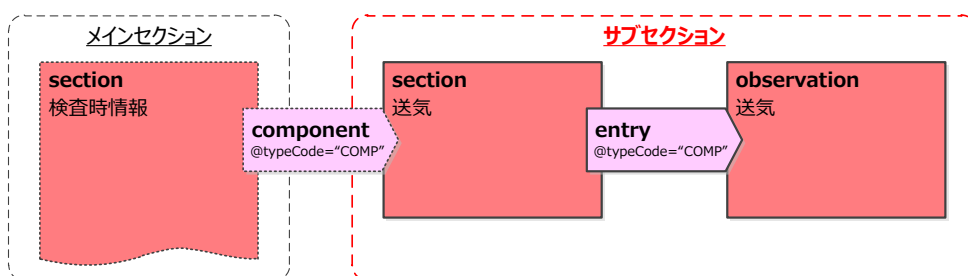

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“送気”を記述するために使用する。

(2) 送気記述 XML 仕様

表 8-65 送気セクション XML 仕様

Template:送気セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5 – Type of Air/Gas Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “送気”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				送気
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		送気セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		送気コード
	@code	1..1	M	Z1410005 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Type of Air/Gas	
	title	1..1	M		送気セクションタイトル
	text()			送気	本規約指定値
	text	1..1	M		送気
	text()				送気の “項目値” をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5'] 「表 8-66 送気オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-66 送気オブザベーション記述 XML 仕様

Template:送気オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5 – Type of Air/Gas Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート

JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “送気”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				送気
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		送気
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		送気オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		送気コード
	@code	1..1	M	Z1410005 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Type of Air/Gas	
	value	1..1	M		送気の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の “項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5"/>
  <code code="Z1410005" displayName="Type of Air/Gas"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>送気</title>
  <text>空気</text>
</entry>


```

```

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5"/>
  <code code="Z1410005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  <value xsi:type="CD" code="Z1420032" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
</observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.22. 観察範囲

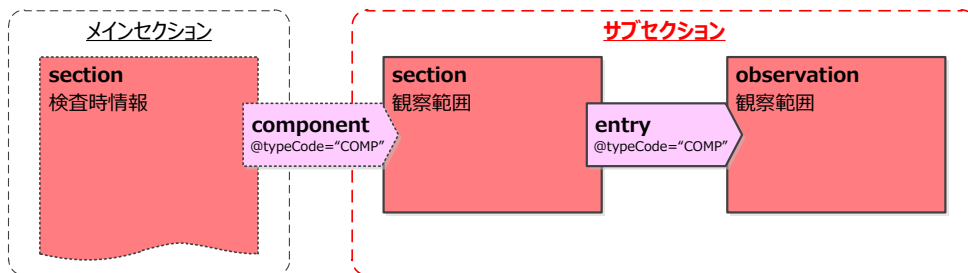

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“観察範囲”を記述するために使用する。

(2) 観察範囲記述 XML 仕様

表 8-67 観察範囲セクション XML 仕様

Template:観察範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6 – Scope of Observation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “観察範囲”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				観察範囲
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		観察範囲セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		観察範囲コード
	@code	1..1	M	Z1410006	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または T.B.D.	上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Scope of Observation	
	title	1..1	M		観察範囲セクションタイトル
	text()			観察範囲	本規約指定値
	text	1..1	M		観察範囲
	text()				観察範囲の "項目値" をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6'] 「表 8-68 観察範囲オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-68 観察範囲オブザベーション記述 XML 仕様

Template:観察範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6 – Scope of Observation Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “観察範囲” を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				観察範囲
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		観察範囲
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		観察範囲オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		観察範囲コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED／右側 LOINC)

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					11410002/T.B.D. (上部) 31410002/T.B.D. (小腸)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Scope of Observation	
	value	1..*	M		観察範囲の“項目値”コード。観察範囲が複数ある場合 value を複数記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.6"/>
  <code code="Z1410006" displayName="Scope of Observation"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>観察範囲</title>
  <text>食道、胃、十二指腸</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.6"/>
      <code code="11410002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZB00000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZC00000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZD00000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.23. 到達部位

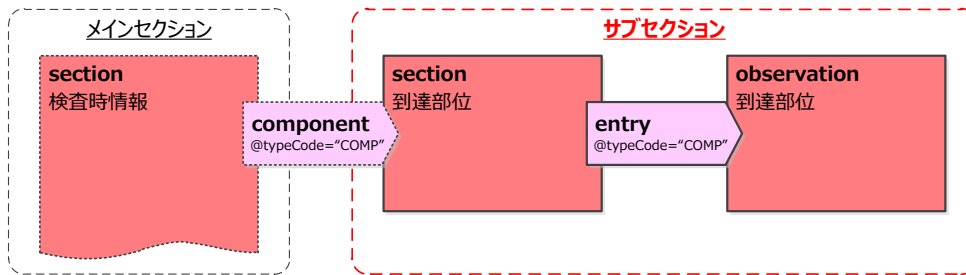

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“到達部位”を記述するために使用する。

(2) 到達部位記述 XML 仕様

表 8-69 到達部位セクション XML 仕様

Template:到達部位セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7 – Reached Area Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “到達部位”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				到達部位
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		到達部位セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		到達部位コード
	@code	1..1	M	Z1410007 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Reached Area	
	title	1..1	M		到達部位セクションタイトル
	text()			到達部位	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text	1..1	M		到達部位
	text()				到達部位の "項目値" をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7'] 「表 8-70 到達部位オブザベーション記述 XML仕様」参照

表 8-70 到達部位オブザベーション記述 XML仕様

Template:到達部位オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7 – Reached Area Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “到達部位”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				到達部位
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		到達部位
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		到達部位オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		到達部位コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 21410003/T.B.D. (下部) 41410003/T.B.D. (ERCP)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Reached Area	
	value	1..1	M		到達部位の "項目値" コード

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7"/>
  <code code="Z1410007" displayName="Reached Area"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>到達部位</title>
  <text>回腸</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7"/>
      <code code="21410003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZJ20000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.24. 画像強調観察

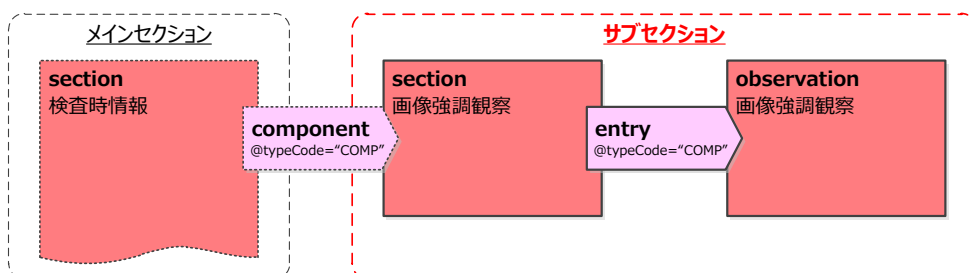

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“画像強調観察”を記述するために使用する。

(2) 画像強調観察記述 XML 仕様

表 8-71 画像強調観察セクション XML 仕様

Template:画像強調観察セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8 – Image-Enhanced Endoscopy Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート

JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “画像強調観察”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				画像強調観察
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		画像強調観察セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		画像強調観察コード
	@code	1..1	M	Z1410008 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Image-Enhanced Endoscopy	
	title	1..1	M		画像強調観察セクションタイトル
	text()			画像強調観察	本規約指定値
	text	1..1	M		画像強調観察
	text()				画像強調観察の “項目値” をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8'] 「表 8-72 画像強調観察オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-72 画像強調観察オブザベーション記述 XML 仕様

Template:画像強調観察オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8 – Image-Enhanced Endoscopy Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “画像強調観察”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				画像強調観察
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		画像強調観察
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		画像強調観察オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		画像強調観察コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11410004/T.B.D. (上部) 21410004/T.B.D. (下部) 31410004/T.B.D. (小腸) 41410004/T.B.D. (ERCP)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Image-Enhanced Endoscopy	
	value	1..*	M		画像強調観察の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"その他(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

(3) XML 記述サンプル

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8" extension="2026-XX-XX"/>


<code code="Z1410008" displayName="Image-Enhanced Endoscopy"

```

codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>画像強調観察</title>
<text>クリスタルバイオレット</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8" extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="21410004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1420043"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.25. 挿入時間

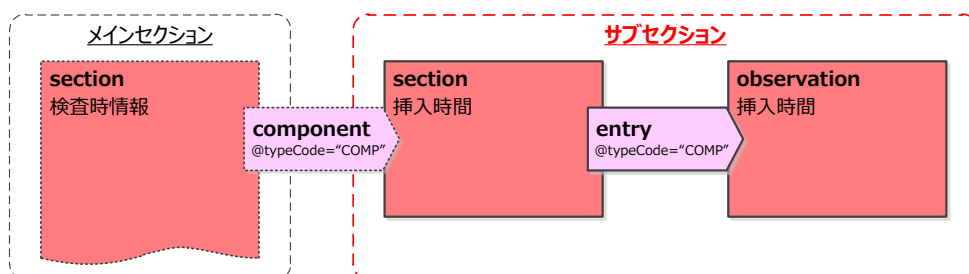

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“挿入時間”を記述するために使用する。

(2) 挿入時間記述 XML 仕様

表 8-73 挿入時間セクション XML 仕様

Template:挿入時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9 – Insertion Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “挿入時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				挿入時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		挿入時間セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。 文字列。
	code	1..1	M		挿入時間コード
	@code	1..1	M	Z1410011 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Insertion Time (min)	
	title	1..1	M		挿入時間セクションタイトル
	text()			挿入時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		挿入時間
	text()				挿入時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9'] 「表 8-74 挿入時間オブザベーション記述 XML仕様」 参照

表 8-74 挿入時間オブザベーション記述 XML仕様

Template:挿入時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9 – Insertion Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの1つ “挿入時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				挿入時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		挿入時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		挿入時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。 文字列。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	code	1..1	M		挿入時間コード
	@code	1..1	M	Z1410011 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Insertion Time (min)	
	value	1..1	M		挿入時間(分単位)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 3	挿入時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410011" displayName="Insertion Time (min)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>挿入時間(分)</title>
  <text>3</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9" extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="3" unit="min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.26. 抜去時間

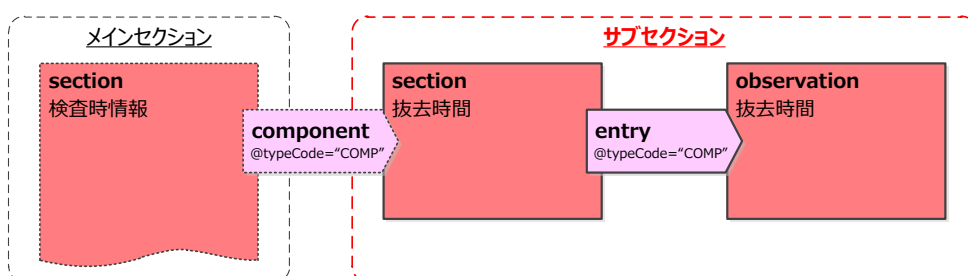

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“抜去時間”を記述するために使用する。

(2) 抜去時間記述 XML 仕様

表 8-75 抜去時間セクション XML 仕様

Template:抜去時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10 – Withdrawal Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “抜去時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				抜去時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		抜去時間セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		抜去時間コード
	@code	1..1	M	Z1410012 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Withdrawal Time (min)	
	title	1..1	M		抜去時間セクションタイトル
	text()			抜去時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		抜去時間
	text()				抜去時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10'] 「表 8-76 抜去時間オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-76 抜去時間オブザベーション記述 XML 仕様

Template:抜去時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10 – Withdrawal Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート

JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “抜去時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				抜去時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		抜去時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		抜去時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		抜去時間コード
	@code	1..1	M	Z1410012 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Withdrawal Time (min)	
	value	1..1	M		抜去時間(分単位)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 10	抜去時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値

(3) XML 記述サンプル

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10" extension="2026-XX-XX"/>

<code code="Z1410012" displayName="Withdrawal Time (min)"

codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>抜去時間(分)</title>

<text>10</text>

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.10"


extension="2026-XX-XX"/>

<code code="Z1410012" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>

<value xsi:type="PQ" value="10" unit="min"/>

</observation>
</entry>
</section>

8.4.2.27. 治療時間

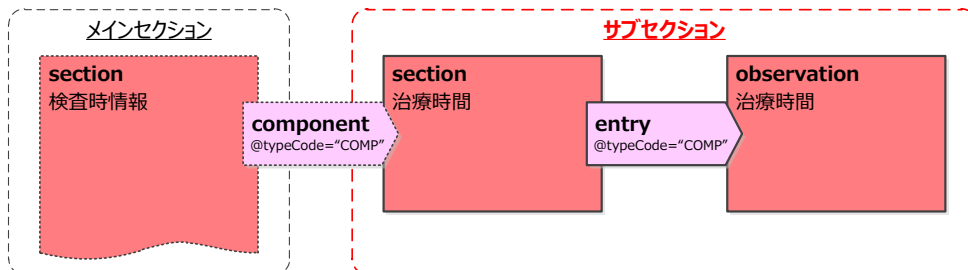

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“治療時間”を記述するために使用する。

(2) 治療時間記述 XML 仕様

表 8-77 治療時間セクション XML 仕様

Template:治療時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11 – Total Treatment Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “治療時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				治療時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		治療時間セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		治療時間コード
	@code	1..1	M	Z1410013 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または LOINC	
	@displayName	1..1	F	Total Treatment Time (min)	
	title	1..1	M		治療時間セクションタイトル
	text()			治療時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		治療時間
	text()				治療時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11'] 「表 8-78 治療時間オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-78 治療時間オブザベーション記述 XML 仕様

Template:治療時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11 – Total Treatment Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “治療時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				治療時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		治療時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		治療時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		治療時間コード
	@code	1..1	M	Z1410013 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	0..1	O	Total Treatment Time (min)	
	value	1..1	M		治療時間(分単位)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 15	治療時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.11" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410013" displayName="Total Treatment Time (min)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>治療時間(分)</title>
  <text>15</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.11"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410013" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="15" unit="min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.28. 乳頭部までの到達時間

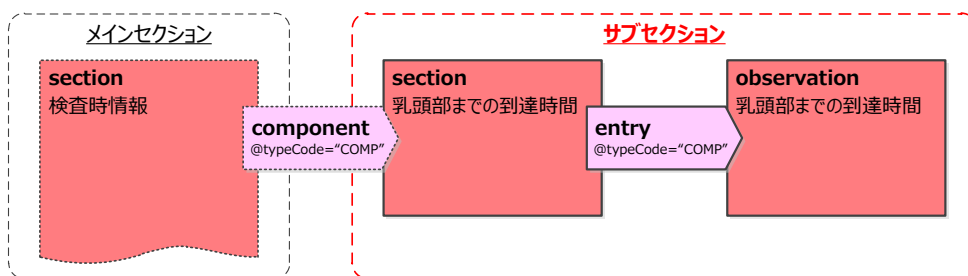

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“乳頭部までの到達時間”を記述するために使用する。

(2) 乳頭部までの到達時間記述 XML 仕様

表 8-79 乳頭部までの到達時間セクション XML 仕様

Template:乳頭部までの到達時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12 – Time to Access the Major Papilla (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “乳頭部までの到達時間”を記

	述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。
--	--------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				乳頭部までの到達時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		乳頭部までの到達時間セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		乳頭部までの到達時間コード
	@code	1..1	M	Z1410014 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Time to Access the Major Papilla (min)	
	title	1..1	M		乳頭部までの到達時間セクションタイトル
	text()			乳頭部までの到達時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		乳頭部までの到達時間
	text()				乳頭部までの到達時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12'] 「表 8-80 乳頭部までの到達時間オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-80 乳頭部までの到達時間オブザベーション記述 XML 仕様

Template:乳頭部までの到達時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12 – Time to Access the Major Papilla (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “乳頭部までの到達時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				乳頭部までの到達時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォ

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		乳頭部までの到達時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		乳頭部までの到達時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		乳頭部までの到達時間コード
	@code	1..1	M	Z1410014 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Time to Access the Major Papilla (min)	
	value	1..1	M		乳頭部までの到達時間(分単位)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 3	乳頭部までの到達時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.12" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410014" displayName="Time to Access the Major Papilla (min)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>乳頭までの到達時間(分)</title>
  <text>3</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.12"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410014" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="3" unit="min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.29.全施行時間

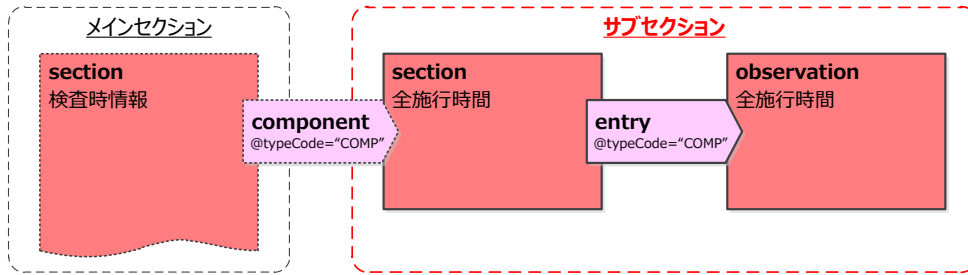

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“全施行時間”を記述するために使用する。

(2) 全施行時間記述 XML 仕様

表 8-81 全施行時間セクション XML 仕様

Template:全施行時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13 – Total Procedure Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全施行時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				全施行時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		全施行時間セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		全施行時間コード
	@code	1..1	M	Z1410015 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Total Procedure Time (min)	
	title	1..1	M		全施行時間セクションタイトル

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text()			全施行時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		全施行時間
	text()				全施行時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13'] 「表 8-82 全施行時間オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-82 全施行時間オブザベーション記述 XML 仕様

Template:全施行時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13 – Total Procedure Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全施行時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				全施行時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		全施行時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		全施行時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		全施行時間コード
	@code	1..1	M	Z1410015 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Total Procedure Time (min)	
	value	1..1	M		全施行時間(分単位)

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 32	全施行時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410015" displayName="Total Procedure Time (min)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>全施行時間(分)</title>
  <text>32</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410015" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="32" unit="min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.30. 腸管前処置

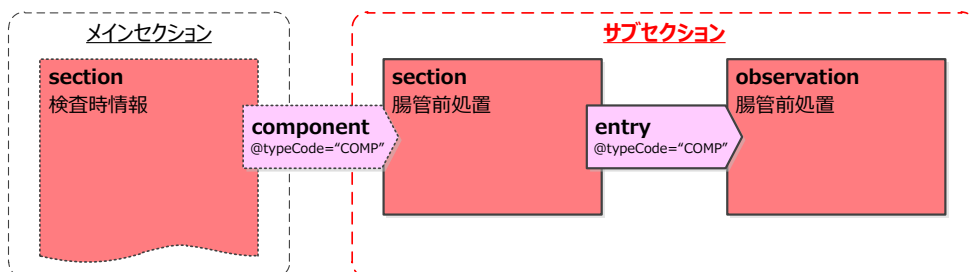

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“腸管前処置”を記述するために使用する。

(2) 腸管前処置記述 XML 仕様

表 8-83 腸管前処置セクション XML 仕様

Template: 腸管前処置セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14 – Bowel Preparation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語—サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “腸管前処置”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				腸管前処置
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		腸管前処置セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		腸管前処置コード
	@code	1..1	M	Z1410016 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Bowel Preparation	
	title	1..1	M		腸管前処置セクションタイトル
	text()			腸管前処置	本規約指定値
	text	1..1	M		腸管前処置
	text()				腸管前処置の“項目値”をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14'] 「表 8-84 腸管前処置オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-84 腸管前処置オブザベーション記述 XML 仕様

Template:腸管前処置オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14 – Bowel Preparation Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “腸管前処置”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				腸管前処置
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		腸管前処置
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		腸管前処置オペレーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		腸管前処置コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 21410005/T.B.D. (下部) 31410005/T.B.D. (小腸)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Bowel Preparation	
	value	1..1	M		腸管前処置の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

<section>


```

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14"/>
<code code="Z1410016" displayName="Bowel Preparation"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>腸管前処置</title>
<text>Excellent</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14"/>
    <code code="21410005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="ZZZ10501"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>

```

</entry>
</section>

8.4.2.31. 全照射時間

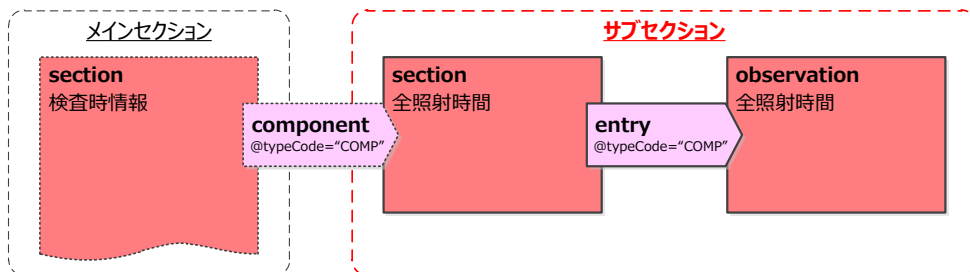

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“全照射時間”を記述するために使用する。

(2) 全照射時間記述 XML 仕様

表 8-85 全照射時間セクション XML 仕様

Template:全照射時間セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15 – Total Exposure Time (min) Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全照射時間”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				全照射時間
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		全照射時間セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		全照射時間コード
	@code	1..1	M	Z1410017 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	1..1	F	Total Exposure Time (min)	
	title	1..1	M		全照射時間セクションタイトル
	text()			全照射時間(分)	本規約指定値
	text	1..1	M		全照射時間
	text()				全照射時間を分単位で記述
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15'] 「表 8-86 全照射時間オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-86 全照射時間オブザベーション記述 XML 仕様

Template:全照射時間オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15 – Total Exposure Time (min) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “全照射時間”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				全照射時間
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		全照射時間
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		全照射時間オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15	本規約指定値
	@extension	1..1	M		テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		全照射時間コード
	@code	1..1	M	Z1410017 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	0..1	O	Total Exposure Time (min)	
	value	1..1	M		全照射時間(分単位)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M	ex. 20	全照射時間 [数値]
	@unit	1..1	F	min	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.15" extension="2026-XX-XX"/>
  <code code="Z1410017" displayName="Total Exposure Time (min)"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>全照射時間(分)</title>
  <text>20</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.15"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1410017" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="PQ" value="20" unit="min"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.32. 施行前の治療の有無

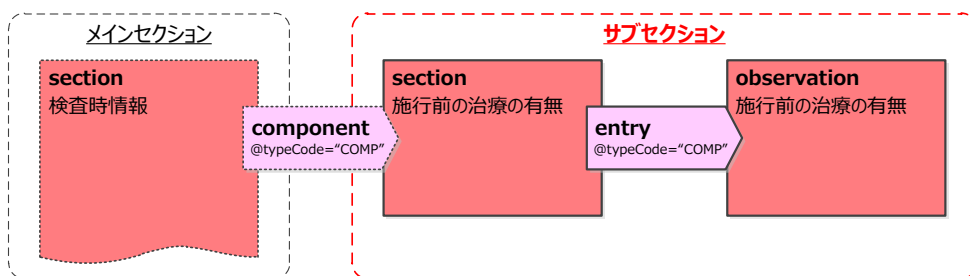

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“施行前の治療の有無”を記述するために使用する。

(2) 施行前の治療の有無記述 XML 仕様

表 8-87 施行前の治療の有無セクション XML 仕様

Template: 施行前の治療の有無セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16 – Prior Endoscopic Intervention Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “施行前の治療の有無”を記述

	するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。
--	-------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				施行前の治療の有無
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		施行前の治療の有無セクションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		施行前の治療の有無コード
	@code	1..1	M	Z1410018 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Prior Endoscopic Intervention	
	title	1..1	M		施行前の治療の有無セクションタイトル
	text()			施行前の治療の有無	本規約指定値
	text	1..1	M		施行前の治療の有無
	text()				施行前の治療の有無の“項目値”をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16'] 「表 8-88 施行前の治療の有無オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-88 施行前の治療の有無オブザベーション記述 XML 仕様

Template: 施行前の治療の有無オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16 – Prior Endoscopic Intervention Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “施行前の治療の有無”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				施行前の治療の有無

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		施行前の治療の有無
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		施行前の治療の有無オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		施行前の治療の有無コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 41410006/T.B.D. (ERCP)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Prior Endoscopic Intervention	
	value	1..1	M		施行前の治療の有無の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.16"/>
  <code code="Z1410018" displayName="Prior Endoscopic Intervention"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>施行前の治療の有無</title>
  <text>胆管 EST</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.16"/>
      <code code="41410006" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>


```

```

<value xsi:type="CD" code="41420001"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
</observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.33. 内視鏡看護師・技師名

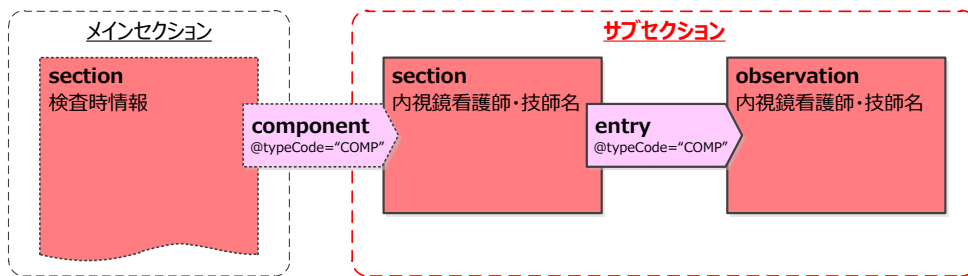

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“内視鏡看護師・技師名”を記述するために使用する。

(2) 内視鏡看護師・技師名記述 XML 仕様

表 8-89 内視鏡看護師・技師名セクション XML 仕様

Template: 内視鏡看護師・技師名セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17 - Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “内視鏡看護師・技師名”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				内視鏡看護師・技師名
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		内視鏡看護師・技師名セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		内視鏡看護師・技師名コード
	@code	1..1	M	Z1410021 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または 2.16.840.1.113883.6.1	上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians	
	title	1..1	M		内視鏡看護師・技師名セクションタイトル
	text()			内視鏡看護師・技師名	本規約指定値
	text	1..1	M		内視鏡看護師・技師名
	text()				内視鏡看護師・技師名 もしくは人数をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17'] 「表 8-90 内視鏡看護師・技師名オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-90 内視鏡看護師・技師名オブザベーション記述 XML 仕様

Template:内視鏡看護師・技師名オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17 - Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている依頼情報のサブカテゴリーの 1 つ “内視鏡看護師・技師名”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				内視鏡看護師・技師名
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		内視鏡看護師・技師名
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		内視鏡看護師・技師名オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		内視鏡看護師・技師名コード
	@code	1..1	M	Z1410021	本規約指定値。セクションと同じコードを使

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または T.B.D.	用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians	
	value	0..1	R		内視鏡看護師・技師名が人数で記載された 場合
	@xsi:type	1..1	F	INT	本規約指定値
	@value	1..1	M		内視鏡看護師・技師の人数
	text	0..1	R		内視鏡看護師・技師名が名前で記載された 場合
	text()				内視鏡看護師・技師名をテキストで記述す る。複数名の場合は“,”区切り

(3) XML 記述サンプル

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"/>

<code code="Z1410021" displayName="Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>内視鏡看護師・技師名</title>

<text>大阪二郎,福岡花子</text>

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17"/>

<code code="Z1410021" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>


<text>大阪二郎,福岡花子</text>

</observation>

</entry>

</section>

8.4.2.34.胆道造影範囲

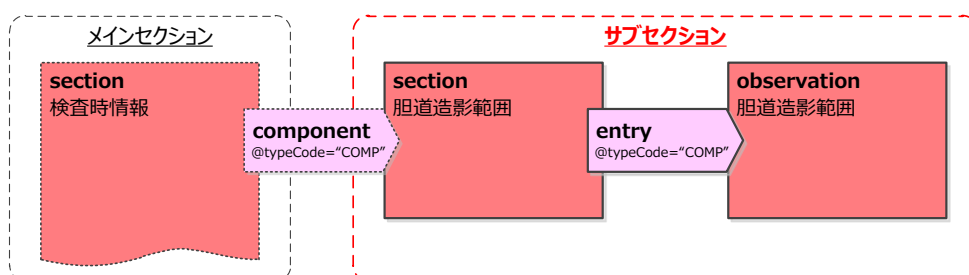

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“胆道造影範囲”を記述するために使用する。

(2) 胆道造影範囲記述 XML 仕様

表 8-91 胆道造影範囲セクション XML 仕様

Template:胆道造影範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18 – Extent of Cholangiography Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆道造影範囲” を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				胆道造影範囲
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		胆道造影範囲セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		胆道造影範囲コード
	@code	1..1	M	41410007 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Extent of Cholangiography	
	title	1..1	M		胆道造影範囲セクションタイトル
	text()			胆道造影範囲	本規約指定値
	text	1..1	M		胆道造影範囲
	text()				胆道造影範囲の “項目値” をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18'] 「表 8-92 胆道造影範囲オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-92 胆道造影範囲オブザベーション記述 XML 仕様

Template:胆道造影範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18 – Extent of Cholangiography Observation
--------	-----------------------------------------------------------------------

ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆道造影範囲”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				胆道造影範囲
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		胆道造影範囲
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		胆道造影範囲オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。文字列。
	code	1..1	M		胆道造影範囲コード
	@code	1..1	M	41410007 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Extent of Cholangiography	
	value	1..*	M		胆道造影範囲の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の “項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

```
<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.18" extension="2026-XX-XX"/>


```

```

<code code="41410007" displayName="Extent of Cholangiography"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>胆道造影範囲</title>
<text>胆嚢造影可</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.18"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="41410007" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="41420021"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.35. 膵管造影範囲

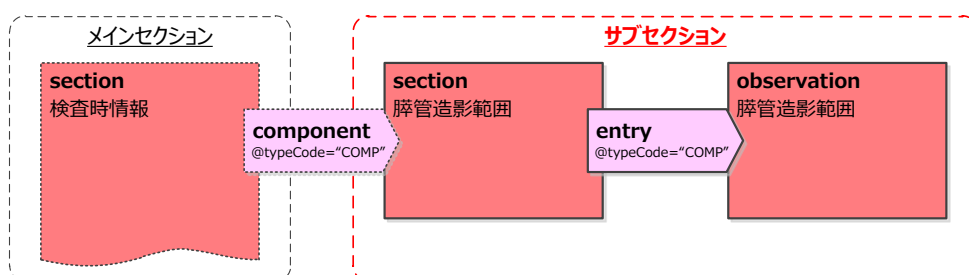

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“膵管造影範囲”を記述するために使用する。

(2) 膵管造影範囲記述 XML 仕様

表 8-93 膵管造影範囲セクション XML 仕様

Template:膵管造影範囲セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19 – Extent of Pancreatography Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管造影範囲”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				膵管造影範囲
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		膵管造影範囲セクションテンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管造影範囲コード
	@code	1..1	M	41410008 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Extent of Pancreatography	
	title	1..1	M		膵管造影範囲セクションタイトル
	text()			膵管造影範囲	本規約指定値
	text	1..1	M		膵管造影範囲
	text()				膵管造影範囲の“項目値”をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19'] 「表 8-94 膵管造影範囲オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-94 膵管造影範囲オブザベーション記述 XML 仕様

Template:膵管造影範囲オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19 – Extent of Pancreatography Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管造影範囲”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				膵管造影範囲
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		膵管造影範囲
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵管造影範囲オブザベーションテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管造影範囲コード
	@code	1..1	M	41410008 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Extent of Pancreatography	
	value	1..1	M		膵管造影範囲の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の "項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.19"/>
  <code code="41410008" displayName="Extent of Pancreatography"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>膵管造影範囲</title>
  <text>体部膵管まで</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.19"/>
      <code code="41410008" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41420042"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.36.胆管挿管

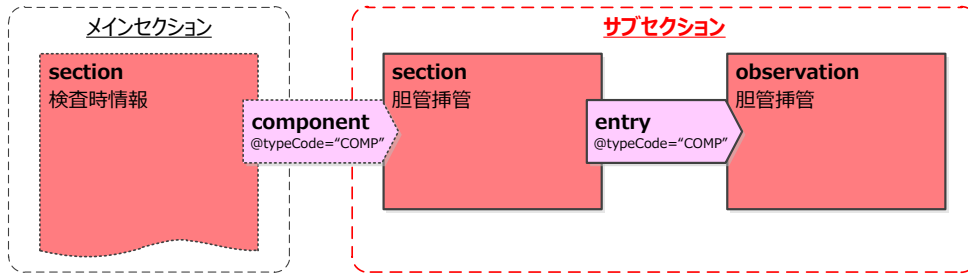

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“胆管挿管”を記述するために使用する。

(2) 胆管挿管記述 XML 仕様

表 8-95 胆管挿管セクション XML 仕様

Template:胆管挿管セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20 – Cannulation for Bile Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管挿管”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				胆管挿管
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		胆管挿管セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆管挿管コード
	@code	1..1	M	41410009 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Cannulation for Bile Duct	
	title	1..1	M		胆管挿管セクションタイトル
	text()			胆管挿管	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text	1..1	M		胆管挿管
	text()				胆管挿管の“項目値”をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20'] 「表 8-96 胆管挿管オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-96 胆管挿管オブザベーション記述 XML 仕様

Template:胆管挿管オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20 - Cannulation for Bile Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管挿管”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				胆管挿管
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		胆管挿管
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		胆管挿管オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆管挿管コード
	@code	1..1	M	41410009	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Cannulation for Bile Duct	
	value	1..1	M		胆管挿管の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.20"/>
  <code code="41410009" displayName="Cannulation for Bile Duct"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>胆管挿管</title>
  <text>胆管成功</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.20"/>
      <code code="41410009" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41420051"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.37. 膵管挿管

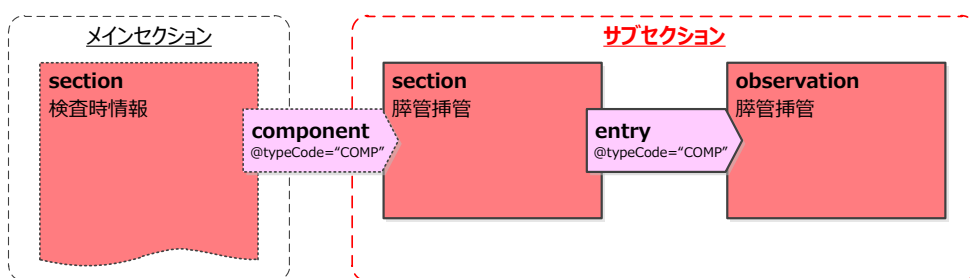

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“膵管挿管”を記述するために使用する。

(2) 膵管挿管記述 XML 仕様

表 8-97 膵管挿管セクション XML 仕様

Template:膵管挿管セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21 – Cannulation for Pancreas Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21
バージョン	2021.8.10

CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管挿管”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				膵管挿管
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		膵管挿管セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管挿管コード
	@code	1..1	M	41410010 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Cannulation for Pancreas Duct	
	title	1..1	M		膵管挿管セクションタイトル
	text()			膵管挿管	本規約指定値
	text	1..1	M		膵管挿管
	text()				膵管挿管の “項目値” をテキストで記述する。“項目値”が“その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21'] 「表 8-98 膵管挿管オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-98 膵管挿管オブザベーション記述 XML 仕様

Template:膵管挿管オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21 – Cannulation for Pancreas Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管挿管”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				膵管挿管
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	True	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		膵管挿管
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵管挿管オペレーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管挿管コード
	@code	1..1	M	41410010	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Cannulation for Bile Duct	
	value	1..1	M		膵管挿管の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"その他(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.21"/>
  <code code="41410010" displayName="Cannulation for Pancreas Duct"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>膵管挿管</title>
  <text>深部挿管</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.21"/>


```

```

<code code="41410010" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
<value xsi:type="CD" code="41Z20001"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
</observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.38.胆管径

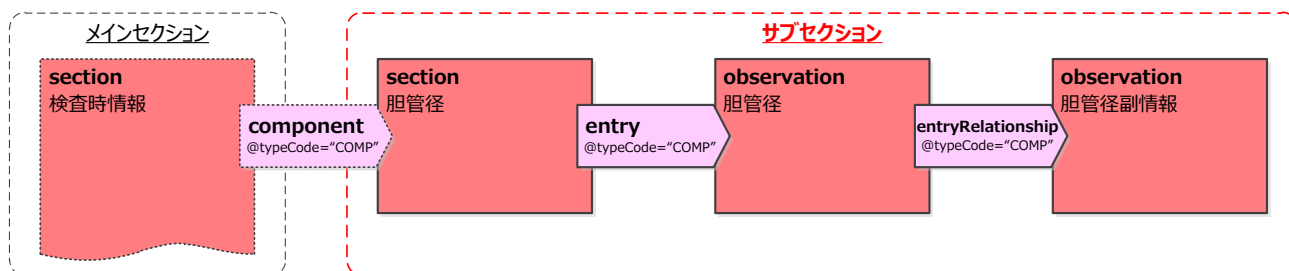

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“胆管径”を記述するために使用する。

(2) 胆管径記述 XML 仕様

表 8-99 胆管径セクション XML 仕様

Template:胆管径セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22 – Bile Duct Diameter Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				胆管径
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		胆管径セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆管径コード
	@code	1..1	M	41410011 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または 2.16.840.1.113883.6.1	上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Bile Duct Diameter	
	title	1..1	M		胆管径セクションタイトル
	text()			胆管径	本規約指定値
	text	1..1	M		胆管径
	text()				“計測値あり(記述する)”の場合:副情報の” 項目名”を見出しに,”項目値”を”項目名”に 対するデータとして表形式で記述する。 “計測値なし(胆管造影せず)”の場合:”計測 値なし(胆管造影せず)”を記述する。
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22'] 「表 8-100 胆管径オブザベーション記述 XML仕様」 参照

表 8-100 胆管径オブザベーション記述 XML仕様

Template:胆管径オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22 - Bile Duct Diameter Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				胆管径
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値”COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		胆管径
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		胆管径オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆管径コード
	@code	1..1	M	41410011	本規約指定値。セクションと同じコードを使

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または T.B.D.	用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Bile Duct Diameter	
	value	1..1	M		胆管径の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	entryRelationship	0..*	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1'] 「表 8-101 胆管径副情報オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-101 胆管径副情報オブザベーション記述 XML 仕様

Template:胆管径副情報オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1 – Bile Duct Diameter (Sub Information) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “胆管径”の“副情報”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				胆管径副情報
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		胆管径副情報
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		胆管径副情報オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆管径副情報 項目名コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		副情報の“項目名”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	value	1..1	M		胆管径(mm)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M		胆管径 [数値]
	@unit	1..1	F	mm	本規約指定値

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.22"/>
  <code code="41410011" displayName="Bile Duct Diameter"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>胆管径</title>
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>胆管最大径(mm)</th>
          <th>胆管径(上部)(mm)</th>
          <th>胆管径(中部)(mm)</th>
          <th>胆管径(下部)(mm)</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>7.5</td>
          <td>4.3</td>
          <td>7.5</td>
          <td>6.6</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
</entry>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.22"/>
  <code code="41410011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>

```

```

<value xsi:type="CD" code="41Z20011"
  codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
    <code code="41430001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="PQ" value="7.5" unit="mm"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
    <code code="41430002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="PQ" value="4.3" unit="mm"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
    <code code="41430003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="PQ" value="7.5" unit="mm"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
    <code code="41430004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="PQ" value="6.6" unit="mm"/>
  </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
</section>


```

(4) (3) XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

胆管径

胆管最大径 (mm)	胆管径 (上部) (mm)	胆管径 (中部) (mm)	胆管径 (下部) (mm)
7.5	4.3	7.5	6.6

8.4.2.39. 膵管径

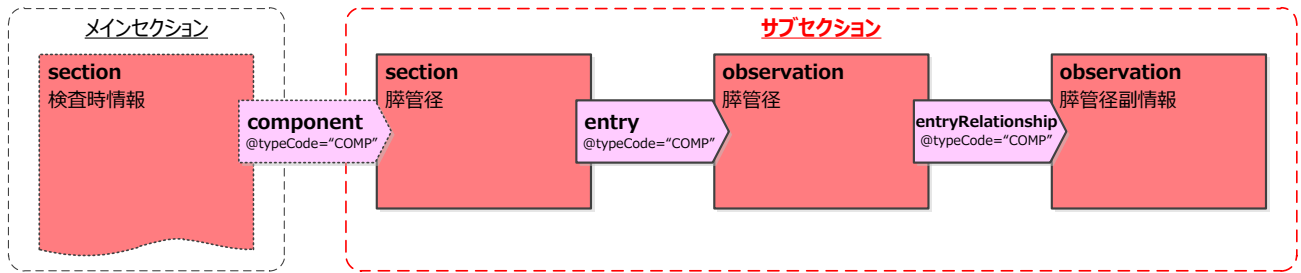

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“膵管径”を記述するために使用する。

(2) 膵管径記述 XML 仕様

表 8-102 膵管径セクション XML 仕様

Template:膵管径セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23 – Pancreas Duct Diameter Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				膵管径
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		膵管径セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管径コード
	@code	1..1	M	41410012 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Pancreas Duct Diameter	
	title	1..1	M		膵管径セクションタイトル
	text()			膵管径	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text	1..1	M		膵管径
	text()				“計測値あり(記述する)”の場合:副情報の”項目名”を見出しに,”項目値”を”項目名”に対するデータとして表形式で記述する。 “計測値なし(膵管造影せず)”の場合:”計測値なし(膵管造影せず)”を記述する。
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23'] 「表 8-103 膵管径オブザベーション記述 XML仕様」参照

表 8-103 膵管径オブザベーション記述 XML仕様

Template:膵管径オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23 - Pancreas Duct Diameter Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				膵管径
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値”COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		膵管径
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵管径オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管径コード
	@code	1..1	M	41410012 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Pancreas Duct Diameter	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	value	1..1	M		膵管径の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	entryRelationship	0..*	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1'] 「表 8-104 膵管径副情報オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-104 膵管径副情報オブザベーション記述 XML 仕様

Template:膵管径副情報オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1 – Pancreas Duct Diameter (Sub Information) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査情報のサブカテゴリーの 1 つ “膵管径”の“副情報”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				膵管径副情報
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		膵管径副情報
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵管径副情報オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵管径副情報 項目名コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		副情報の“項目名”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	value	1..1	M		膵管径(mm)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M		膵管径 [数値]
	@unit	1..1	F	mm	本規約指定値


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.23"/>
  <code code="41410012" displayName="Pancreas Duct Diameter"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>膵管径</title>
  <text>計測値なし(膵管造影せず)</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.23"/>
      <code code="41410012" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41Z20012"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.40. ERCP 難度

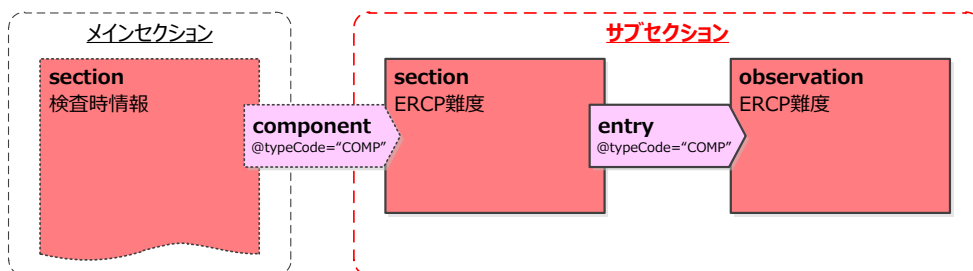

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“ERCP 難度”を記述するために使用する。

(2) ERCP 難度記述 XML 仕様

表 8-105 ERCP 難度セクション XML 仕様

Template:ERCP 難度セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24 – Grading the Difficulty of ERCP Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート

JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “ERCP 難度”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				ERCP 難度
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		ERCP 難度セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ERCP 難度コード
	@code	1..1	M	41410013 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Grading the Difficulty of ERCP	
	title	1..1	M		ERCP 難度セクションタイトル
	text()			ERCP 難度	本規約指定値
	text	1..1	M		ERCP 難度
	text()				ERCP 難度の “項目値” をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24'] 「表 8-106 ERCP 難度オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-106 ERCP 難度オブザベーション記述 XML 仕様

Template:ERCP 難度オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24 - Grading the Difficulty of ERCP Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “ERCP 難度”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/				ERCP 難度

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
section/entry					
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		ERCP 難度
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		ERCP 難度オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		ERCP 難度コード
	@code	1..1	M	41410013 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Grading the Difficulty of ERCP	
	value	1..1	M		ERCP 難度の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.24"/>

<code code="41410013" displayName="Grading the Difficulty of ERCP"
codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>ERCP 難度</title>

<text>Grade 1X</text>

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.24"/>


<code code="41410013" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>

```

<value xsi:type="CD" code="41420072"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
</observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.41. 専攻医が施行した場合の完遂率(%)

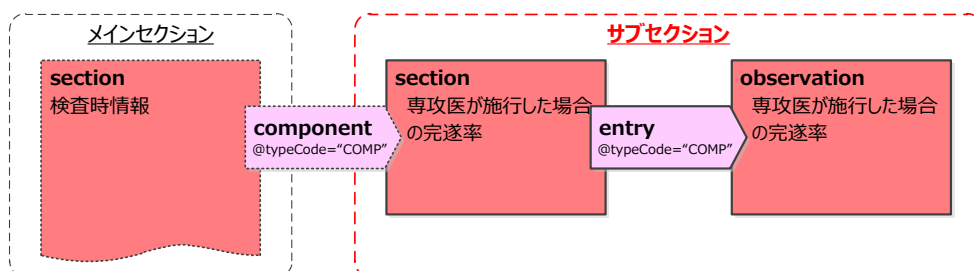

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“専攻医が施行した場合の完遂率(%)”を記述するために使用する。

(2) 専攻医が施行した場合の完遂率(%)記述 XML 仕様

表 8-107 専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクション XML 仕様

Template: 専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25 – Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “専攻医が施行した場合の完遂率(%)”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				専攻医が施行した場合の完遂率(%)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)コード
	@code	1..1	M	41410014 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%)	
	title	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクションタイトル
	text()			専攻医が施行した場合の完遂率(%)	本規約指定値
	text	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)
	text()				専攻医が施行した場合の完遂率(%)の "項目値" をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25'] 「表 8-108 専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-108 専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーション記述 XML 仕様

Template:専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25 -Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%)
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ "専攻医が施行した場合の完遂率(%) " を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				専攻医が施行した場合の完遂率(%)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)コード
	@code	1..1	M	41410014 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%)	
	value	1..1	M		専攻医が施行した場合の完遂率(%)の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.25"/>
  <code code="41410014" displayName="Compression Rate of the Procedure by
    Resident Physician (%)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED"/>
  <title>専攻医が施行した場合の完遂率(</title>
  <text>76-99%</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.25"/>
      <code code="41410014" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41420085"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.42. 最初の胆管へのアプローチ法

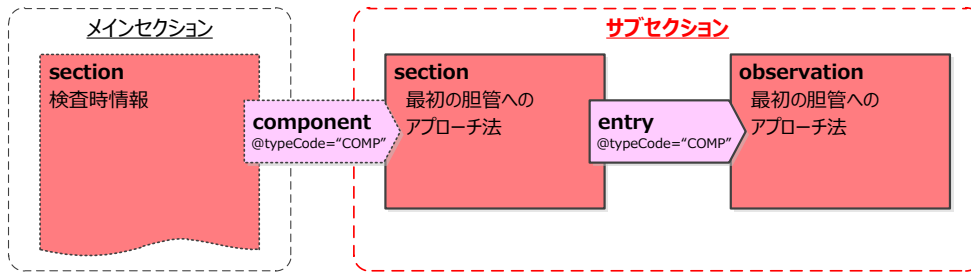

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“最初の胆管へのアプローチ法”を記述するために使用する。

(2) 最初の胆管へのアプローチ法記述 XML 仕様

表 8-109 最初の胆管へのアプローチ法セクション XML 仕様

Template:最初の胆管へのアプローチ法セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26 – First Approach Method to Bile Duct Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最初の胆管へのアプローチ法”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				最初の胆管へのアプローチ法
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法コード
	@code	1..1	M	41410015 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	First Approach Method to	

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				Bile Duct	
	title	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法セクションタイトル
	text()			最初の胆管へのアプローチ法	本規約指定値
	text	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法
	text()				最初の胆管へのアプローチ法の "項目値" をテキストで記述する。"項目値"が"その他(記述する)"の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26'] 「表 8-110 最初の胆管へのアプローチ法オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-110 最初の胆管へのアプローチ法オブザベーション記述 XML 仕様

Template:最初の胆管へのアプローチ法オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26 - First Approach Method to Bile Duct Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの1つ “最初の胆管へのアプローチ法”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				最初の胆管へのアプローチ法
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法コード
	@code	1..1	M	41410015 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	First Approach Method to Bile Duct	
	value	1..1	M		最初の胆管へのアプローチ法の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する 場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.26"/>
  <code code="41410015" displayName="First Approach Method to Bile Duct"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>最初の胆管へのアプローチ法</title>
  <text>カニキュラ+造影剤</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26"/>
      <code code="41410015" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41Z20021"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.43. 深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数

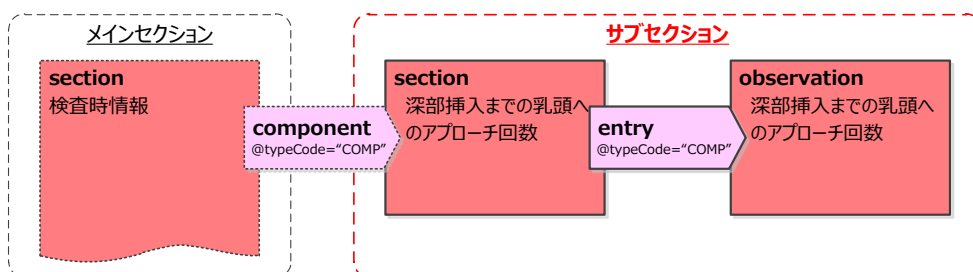

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数”を記述するために使用する。

(2) 深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数記述 XML 仕様

表 8-111 深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクション XML 仕様

Template:深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27 - Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数”を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数コード
	@code	1..1	M	41410016 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation	
	title	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクションタイトル
	text()			深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数	本規約指定値
	text	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数
	text()				深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数の “項目値” をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27'] [表 8-112 深部挿入までの乳頭へのアプロ

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					一チ回数オブザベーション記述 XML 仕様 参照

表 8-112 深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数オブザベーション記述 XML 仕様
Template:深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27 - Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語-サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数
	@code	1..1	M	41410016 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation	
	value	1..1	M		深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.27"/>
  <code code="41410016" displayName="Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数</title>
  <text>1 回</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.27"/>
      <code code="41410016" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="41420091" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.44. 最終的な深部挿入時のアプローチ方法

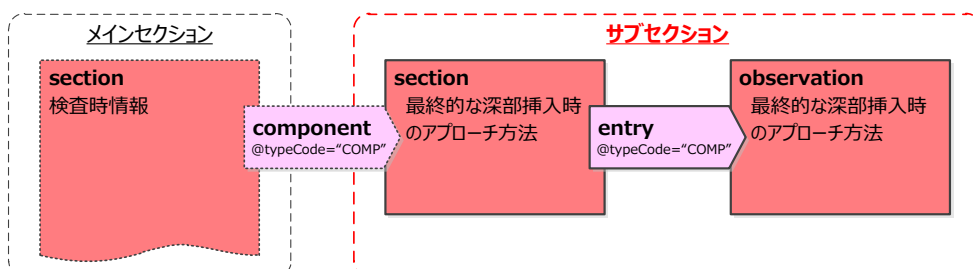

(1) 概要

JED-Project で検査時情報として定義されている“最終的な深部挿入時のアプローチ方法”を記述するために使用する。

(2) 最終的な深部挿入時のアプローチ方法記述 XML 仕様

表 8-113 最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクション XML 仕様

Template:最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28 – Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最終的な深部挿入

	時のアプローチ方法を記述するためのテンプレート。
--	--------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				最終的な深部挿入時のアプローチ方法
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法
	@code	1..1	M	41410017 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation	
	title	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクションタイトル
	text()			最終的な深部挿入時のアプローチ方法	本規約指定値
	text	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法
	text()				最終的な深部挿入時のアプローチ方法の ”項目値” をテキストで記述する。”項目値” が”その他(記述する)”の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.28'] 「表 8-114 最終的な深部挿入時のアプローチ方法オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-114 最終的な深部挿入時のアプローチ方法オブザベーション記述 XML 仕様
Template:最終的な深部挿入時のアプローチ方法オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.28 - Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.28
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー

解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の検査時情報のサブカテゴリーの 1 つ “最終的な深部挿入時のアプローチ方法” を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				最終的な深部挿入時のアプローチ方法
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法オプザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.28	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法コード
	@code	1..1	M	41410017 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation	
	value	1..1	M		最終的な深部挿入時のアプローチ方法の ”項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の”項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が”その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

(3) XML 記述サンプル


<section>

```

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.28"/>
<code code="41410017" displayName="Final Approach Method to Bile Duct as Deep
  Cannulation" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>最終的な深部挿入時のアプローチ方法</title>
<text>カニュラ+造影剤</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.26"/>
    <code code="41410017" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="41Z20021"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>

```

8.4.2.45.翌日の amylase 値

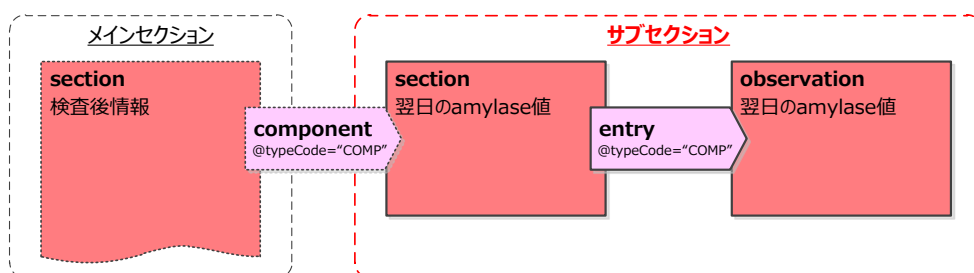

(1) 概要

JED-Project で検査後情報として定義されている“翌日の amylase 値”を記述するために使用する。

(2) 翌日の amylase 値記述 XML 仕様

表 8-115 翌日の amylase 値セクション XML 仕様

Template:翌日の amylase 値セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1 – Amylase Value of Next Day Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査後情報のサブカテゴリーの 1 つ “翌日の amylase 値”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				翌日の amylase 値
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		翌日の amylase 値セクションテンプレート

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		翌日の amylase 値
	@code	1..1	M	Z1510001 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Amylase Value of Next Day	
	title	1..1	M		翌日の amylase 値セクションタイトル
	text()			翌日の amylase 値	本規約指定値
	text	1..1	M		翌日の amylase 値
	text()				翌日の amylase 値(IU / L)をテキストで記述する。
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1'] 「表 8-116 翌日の amylase 値オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-116 翌日の amylase 値オブザベーション記述 XML 仕様

Template:翌日の amylase 値オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1 – Amylase Value of Next Day Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている検査後情報のサブカテゴリーの 1 つ “翌日の amylase 値”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				翌日の amylase 値
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		翌日の amylase 値
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	templateId	1..1	M		翌日の amylase 値オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		翌日の amylase 値
	@code	1..1	M	Z1510001 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Amylase Value of Next Day	
	value	1..1	M		翌日の amylase 値(IU / L)
	@xsi:type	1..1	F	PQ	本規約指定値
	@value	1..1	M		翌日の amylase 値(IU / L)
	@unit	1..1	F	IU / L	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1"/>

<code code="Z1510001" displayName="Amylase Value of Next Day"
codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>翌日の amylase 値</title>

<text>109</text>

<entry>

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.5.1"/>

<code code="Z1510001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>


<value xsi:type="PQ" value="109" unit="IU / L"/>

</observation>

</entry>

</section>

8.4.2.46. 手技中偶発症

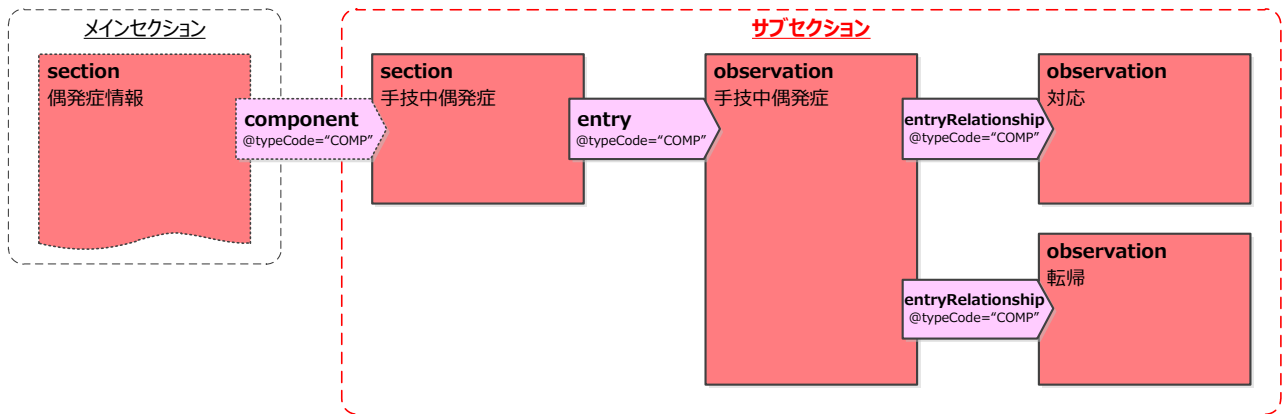

(1) 概要

JED-Project で偶発症情報として定義されている“手技中偶発症”を記述するために使用する。

(2) 手技中偶発症記述 XML 仕様

表 8-117 手技中偶発症セクション XML 仕様

Template: 手技中偶発症セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1 – Adverse Events during Procedure Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				手技中偶発症
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		手技中偶発症セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		手技中偶発症コード
	@code	1..1	M	Z1610001 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	1..1	F	Adverse Events during Procedure	
	title	1..1	M		手技中偶発症セクションタイトル
	text()			手技中偶発症	本規約指定値
	text	1..1	M		手技中偶発症
	text()				主情報/副情報の“項目名”を見出しに、“項目値/項目値詳細”を“項目名”に対するデータとして表形式で記述する
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1'] 「表 8-118 手技中偶発症オブザベーション記述 XML 仕様」参照 複数種類ある場合は個別に記述する

表 8-118 手技中偶発症オブザベーション記述 XML 仕様

Template:手技中偶発症オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1 – Adverse Events during Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				手技中偶発症
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		手技中偶発症
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		手技中偶発症オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		手技中偶発症コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11610001/T.B.D. (上部) 21610001/T.B.D. (下部)

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					31610001/T.B.D. (小腸)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Adverse Events during Procedure	
	value	1..1	M		手技中偶発症の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1'] 「表 8-119 対応オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2'] 「表 8-120 転帰オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-119 対応オブザベーション記述 XML 仕様

Template:対応オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1 - Handling (Actions) Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技中偶発症”の“対応”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				対応
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		対応

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		対応オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		対応コード
	@code	1..1	M	Z1Z30021 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Handling (Actions)	
	value	1..1	M		対応の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	副情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-120 転帰オブザベーション記述 XML 仕様

Template:転帰オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2 – Outcome Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ "手技中偶発症"の"転帰"を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				転帰
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		転帰
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	templateId	1..1	M		転帰オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		転帰コード
	@code	1..1	M	Z1Z30031 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Outcome	
	value	1..1	M		転帰の“項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	副情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

(3) XML 記述サンプル

<section>

```

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"/>
<code code="Z1610001" displayName="Adverse Events during Procedure"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
<title>手技中偶発症</title>
<text>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>手技中偶発症(上部)</th>
        <th>対応</th>
        <th>転帰</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>出血</td>
        <td>内視鏡的治療</td>
        <td>軽快</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

```

```

</table>
</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1"/>
    <code code="11610001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1Z20011"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1"/>
        <code code="Z1Z30021" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1Z40032"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2"/>
        <code code="Z1Z30031" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1Z40041"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
</section>


```

(4) (3) XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

手技中偶発症

手技中偶発症（上部）	対応	転帰
出血	内視鏡的治療	軽快

8.4.2.47. 手技後偶発症

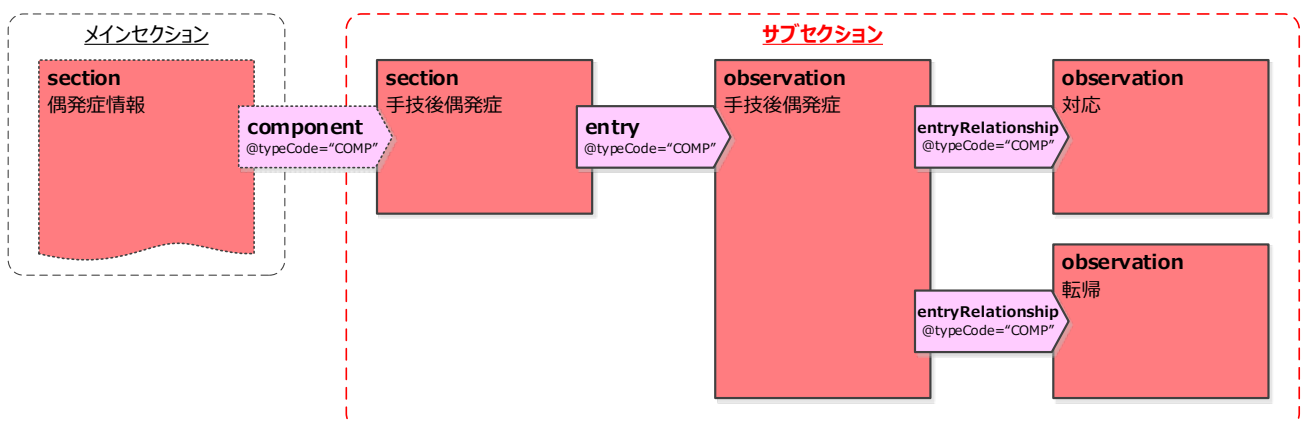

(1) 概要

JED-Project で偶発症情報として定義されている“手技後偶発症”を記述するために使用する。

(2) 手技後偶発症記述 XML 仕様

表 8-121 手技後偶発症セクション XML 仕様

Template:手技後偶発症セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2 – Adverse Events after Procedure Section				
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2				
バージョン	2021.8.10				
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート				
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー				
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技後偶発症”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。				

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				手技後偶発症
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		手技後偶発症セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		手技後偶発症コード
	@code	1..1	M	Z1610002 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED / 下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Adverse Events after Procedure	
	title	1..1	M		手技後偶発症セクションタイトル
	text()			手技後偶発症	本規約指定値
	text	1..1	M		手技後偶発症
	text()				主情報/副情報の“項目名”を見出しに、“項目値/項目値詳細”を“項目名”に対するデータとして表形式で記述する
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2'] 「表 8-122 手技後偶発症オブザベーション記述 XML 仕様」 参照 複数種類ある場合は個別に記述する

表 8-122 手技後偶発症オブザベーション記述 XML 仕様

Template:手技後偶発症オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2 – Adverse Events after Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “手技後偶発症”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				手技後偶発症
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		手技後偶発症
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		手技後偶発症オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		手技後偶発症コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。セクションとは別コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) 11610002/T.B.D. (上部) 21610002/T.B.D. (下部) 31610002/T.B.D. (小腸)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Adverse Events after Procedure	
	value	1..1	M		手技後偶発症の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の“項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.1'] 「表 8-119 対応オブザベーション記述 XML 仕様」参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2'] 「表 8-120 転帰オブザベーション記述 XML 仕様」参照

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2"/>
  <code code="Z1610002" displayName="Adverse Events after Procedure"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>手技後偶発症</title>
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>手技後偶発症(上部)</th>
          <th>対応</th>
          <th>転帰</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>なし</td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2"/>
      <code code="11610002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>


```

(4) (3) XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

手技後偶発症

手技後偶発症（上部）	対応	転帰
なし		

8.4.2.48. 偶発症(ERCP)

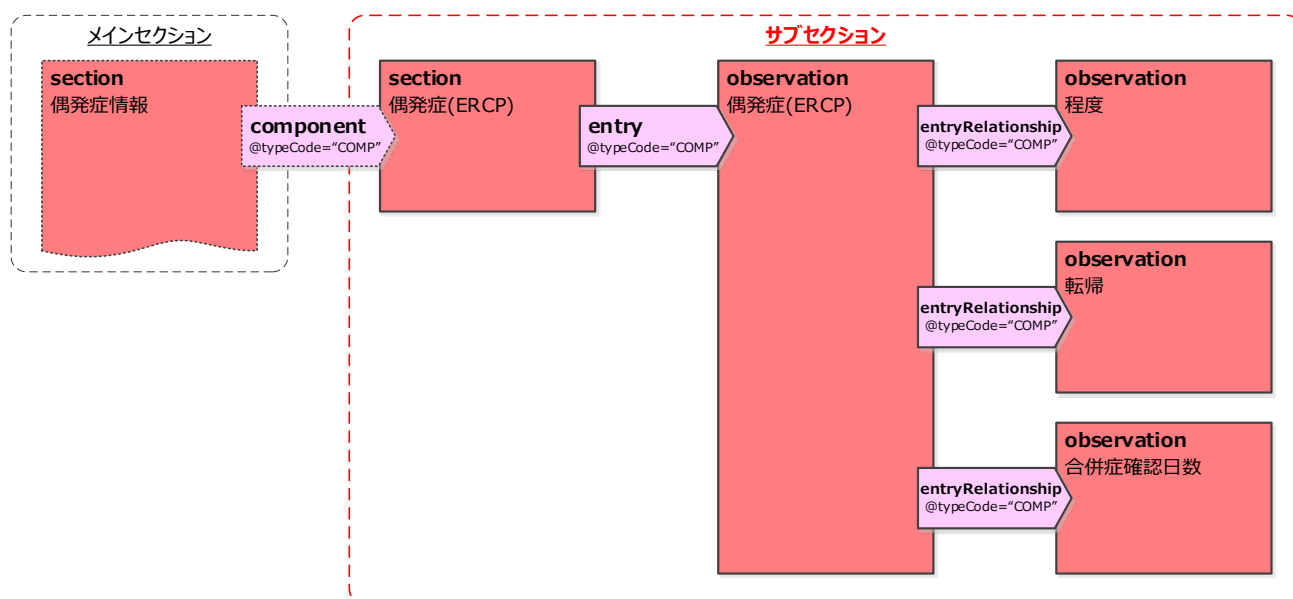

(1) 概要

JED-Project で偶発症情報として定義されている“偶発症(ERCP)”を記述するために使用する。

(2) 偶発症(ERCP)記述 XML 仕様

表 8-123 偶発症(ERCP)セクション XML 仕様

Template:偶発症(ERCP)セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3 – Adverse Events by ERCP Procedure Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)” を記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				偶発症(ERCP)
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		偶発症(ERCP)セクションテンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症(ERCP)コード
	@code	1..1	M	Z1610003 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Adverse Events by ERCP Procedure	
	title	1..1	M		偶発症(ERCP)セクションタイトル
	text()			偶発症(ERCP)	本規約指定値
	text	1..1	M		偶発症(ERCP)
	text()				主情報/副情報の"項目名"を見出しに、"項目値/項目値詳細"を"項目名"に対するデータとして表形式で記述する
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3'] 「表 8-124 偶発症(ERCP)オブザベーション記述 XML 仕様」参照 複数種類ある場合は個別に記述する

表 8-124 偶発症(ERCP)オブザベーション記述 XML 仕様

Template:偶発症(ERCP)オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3 – Adverse Events by ERCP Procedure Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 – サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)” を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				偶発症(ERCP)
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		偶発症(ERCP)
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		偶発症(ERCP)オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		偶発症(ERCP)コード
	@code	1..1	M	41610003	本規約指定値。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Adverse Events by ERCP Procedure	
	value	1..1	M		偶発症(ERCP)の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"その他(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3'] 「表 8-125 程度オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2'] 「表 8-120 転帰オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4'] 「表 8-126 合併症確認日数オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-125 程度オブザベーション記述 XML 仕様

Template:程度オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3 – Degree Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート

JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている ERCP の偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)” の“程度”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				程度
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		程度
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		程度オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		程度コード
	@code	1..1	M	Z1Z30041 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Degree	
	value	1..1	M		程度の “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	副情報の “項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-126 合併症確認日数オブザベーション記述 XML 仕様

Template:合併症確認日数オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4 – Number of Confirmed Days of Complication Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “偶発症(ERCP)” の“合併症確認日数”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				合併症確認日数
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		合併症確認日数
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		合併症確認日数オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		合併症確認日数コード
	@code	1..1	M	Z1Z30051 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Number of Confirmed Days of Complication	
	value	1..1	M		合併症日数の"項目値"コード
	@xsi:type	1..1	F	INT	本規約指定値
	@value	1..1	M		日数 [整数値]
	@unit	1..1	F	day	本規約指定値

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3"/>
  <code code="Z1610003" displayName="Adverse Events by ERCP Procedure"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>偶発症(ERCP)</title>
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>偶発症(ERCP)</th>
          <th>程度</th>
          <th>転帰</th>
          <th>合併症確認日数</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
  </text>

```

```

        <tbody>
          <tr>
            <td>肺炎</td>
            <td>轻度</td>
            <td>轻快</td>
            <td>1</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.3"/>
        <code code="41610003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1Z20051"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.3"/>
            <code code="Z1Z30041" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            <value xsi:type="CD" code="Z1Z40051"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.2"/>
            <code code="Z1Z30031" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            <value xsi:type="CD" code="Z1Z40041"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.100.4"/>
            <code code="Z1Z30051" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            <value xsi:type="INT" value="1" unit="day"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>


```

(4) (3)XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

偶発症（ERCP）

偶発症（ERCP）	程度	転帰	合併症確認日数
膵炎	軽度	軽快	1

8.4.2.49. 30 日以内の死亡

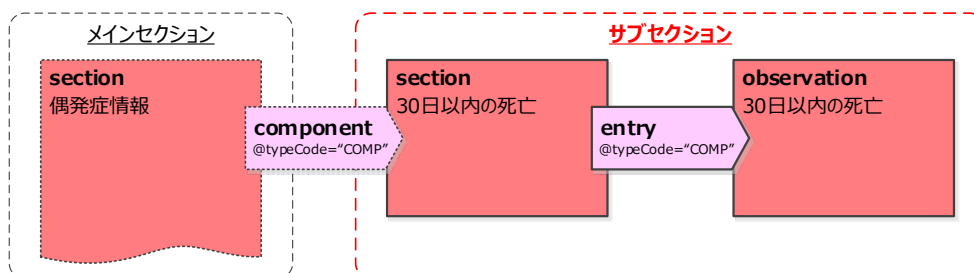

(1) 概要

JED-Project で偶発症情報として定義されている“30 日以内の死亡”を記述するために使用する。

(2) 30 日以内の死亡記述 XML 仕様

表 8-127 30 日以内の死亡セクション XML 仕様

Template:30 日以内の死亡セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4 - Death within 30 Days Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語－サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ “30 日以内の死亡”を記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				30 日以内の死亡
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		30 日以内の死亡セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		30 日以内の死亡コード
	@code	1..1	M	Z1610004 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				2.16.840.1.113883.6.1	
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Death within 30 Days	
	title	1..1	M		30 日以内の死亡セクションタイトル
	text()			30 日以内の死亡	本規約指定値
	text	1..1	M		30 日以内の死亡
	text()				治療目的の "項目値" をテキストで記述する。"項目値" が "あり(記述する)" の場合は自由記載
	entry	0..1	R		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4'] 「表 8-128 30 日以内の死亡オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-128 30 日以内の死亡オブザベーション記述 XML 仕様

Template:30 日以内の死亡オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4 - Death within 30 Days Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	基本情報用語 - サブカテゴリー
解説	JED-Project で基本情報用語として定義されている偶発症情報のサブカテゴリーの 1 つ "30 日以内の死亡" を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別を問わず共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				30 日以内の死亡
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値 "COMP" を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		30 日以内の死亡
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		30 日以内の死亡オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		30 日以内の死亡コード
	@code	1..1	M	Z1610004	本規約指定値。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				2.16.840.1.113883.6.1	
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Death within 30 Days	
	value	1..1	M		30 日以内の死亡の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	主情報の"項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"あり(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.4"/>
  <code code="Z1610004" displayName="Death within 30 Days"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>30 日以内の死亡</title>
  <text>なし</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.4"/>
      <code code="Z1610004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.50.臓器別診断

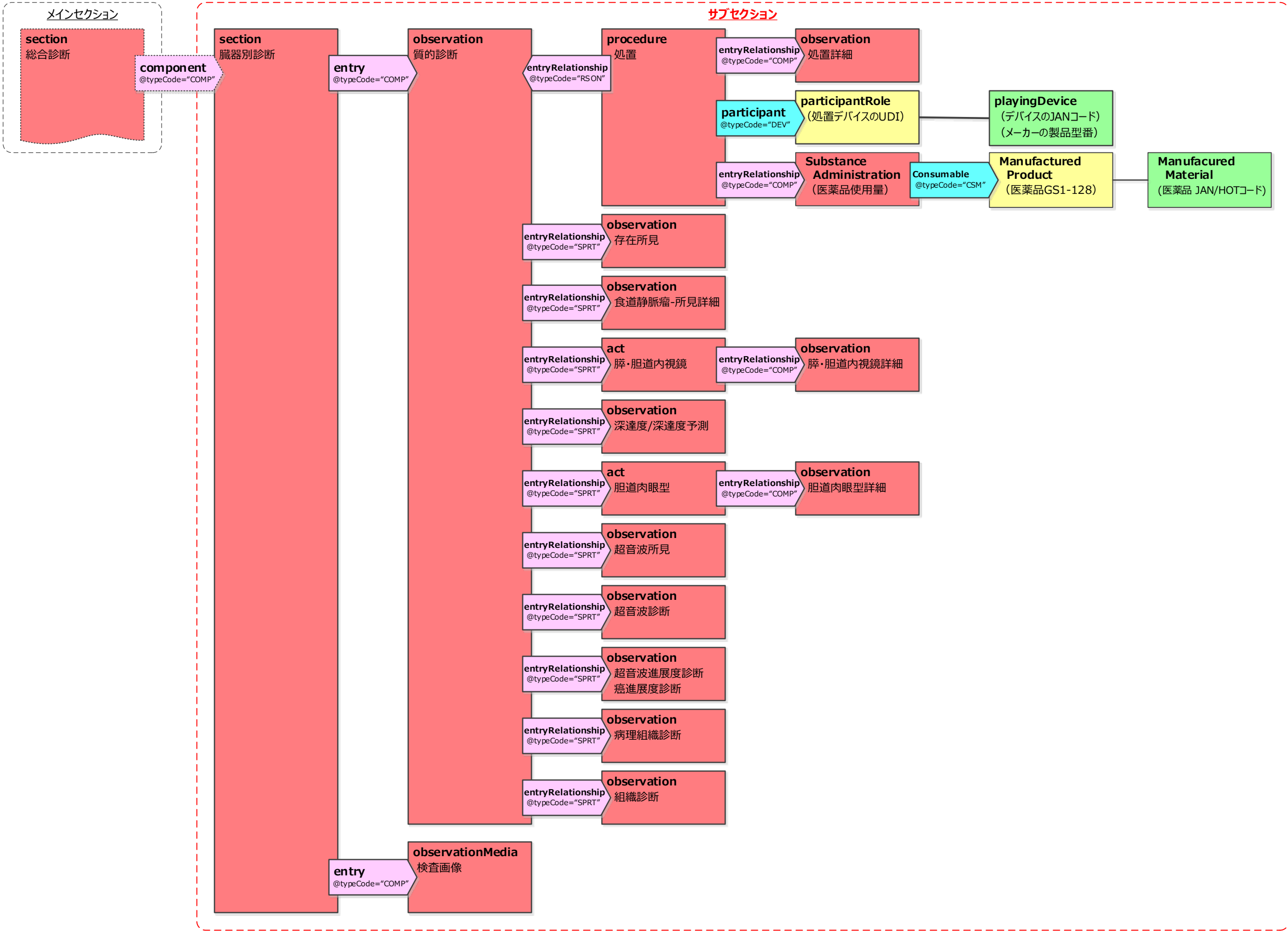

(1) 概要

JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用し、臓器別の診断情報を記述するために使用する。テンプレートは、検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

※ 空腸、回腸末端の質的診断は自由記載のため、セクションのみの構造とする。

(2) 臓器別診断記述 XML 仕様

表 8-129 臓器別診断セクション XML 仕様

Template:臓器別診断セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1 – Specific Organ's Diagnosis Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	診断処置用語
解説	総合診断情報を構成するサブカテゴリーの 1 つとして、JED-Project で定義されている診断／処置／病理の各用語を使用し、臓器別の診断情報を記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				臓器別診断セクション
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		臓器別診断セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		臓器別診断コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。臓器別診断コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) ZAA00000/T.B.D. (頭頸部診断) ZAB00000/T.B.D. (食道診断) ZAC00000/T.B.D. (胃診断) ZAD00000/T.B.D. (十二指腸診断) ZAL00000/T.B.D. (大腸診断) ZAJ00000/T.B.D. (小腸診断) ZAF00000/T.B.D. (主乳頭(ERCP)診断) ZAG00000/T.B.D. (副乳頭(ERCP)診断) ZAH00000/T.B.D. (胆道(ERCP)診断) ZAM00000/T.B.D. (膵(ERCP)診断)
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	M		対象臓器に応じて以下の名称を使用する Neck Diagnosis (頭頸部診断) Esophagus Diagnosis (食道診断) Stomach Diagnosis (胃診断) Duodenum Diagnosis (十二指腸診断) Colon Diagnosis (大腸診断) Small Intestine Diagnosis (小腸診断) Major Papilla Diagnosis (主乳頭 (ERCP)診断) Minor Papilla Diagnosis (副乳頭 (ERCP)診断) Bile Duct Diagnosis (胆道 (ERCP) 診 断) Pancreas Diagnosis (膵 (ERCP) 診断)
	title	1..1	M		臓器別診断セクションタイトル
	text()			臓器別診断	本規約指定値
	text	1..1	M		臓器別診断
	text()				主に JED 診断用語の主項目名を見出しと し、病変単位(1 病変-1 レコード)で診断情 報を表形式のテキストで記述する。 以下のような項目を見出しとする。 ・質的診断 ・部位 ・存在所見 ・膵・胆道内視鏡 ・胆道肉眼型 ・深達度 ・超音波所見 ・超音波診断 ・超音波進展度診断 ・深達度予測 ・処置 ・使用デバイス ・使用薬剤 ・病理組織診断 ・病変コメント ・検体 No. ・検体バーコード情報 ・検体個数 ・病理依頼時コメント など
	entry	0..*	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11'] [表 8-130 質的診断オブザベーション記述]

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					XML仕様 参照
	entry	0..*	R		[検査画像をレポートに内包する場合] observationMedia [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1'] 「表 8-142 検査画像1 オブザベーションメ ディア記述XML仕様」 参照
	entry	0..*	R		[検査画像のリンクソースを指定する場合] observationMedia [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2'] 「表 8-143 検査画像2 オブザベーションメ ディア記述XML仕様」 参照

表 8-130 質的診断オブザベーション記述 XML仕様

Template:質的診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11 – Characterization Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11
バージョン	2026.XX.XX
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—質的診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“質的診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				質的診断
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		質的診断
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		質的診断オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11	本規約指定値
	@extension	1..1	M	2026-XX-XX	テンプレートの版管理用属性。 文字列。
	code	1..1	M		質的診断コード
	@code	1..1	M		本規約指定値。臓器別質的診断コードを使用する。(左側 JED/右側 LOINC) Z2A30000/T.B.D. (頭頸部) Z2B30000/T.B.D. (食道) Z2C30000/T.B.D. (胃) Z2D30000/T.B.D. (十二指腸)

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					Z2L30000/T.B.D. (大腸診断) Z2J30000/T.B.D. (小腸診断) Z2F30000/T.B.D. (主乳頭(ERCP)) Z2G30000/T.B.D. (副乳頭(ERCP)) Z2H30000/T.B.D. (胆道(ERCP)) Z2M30000/T.B.D. (膵(ERCP))
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Characterization	
	value	1..*	M		質的診断の "項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。JED 診断用語—質的診断 の"項目値"コード 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	指定した質的診断の"項目値" [主項目値 + 副項目値]。LOINC コードを採用する場 合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"その他(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ
	targetSiteCode	0..*	R		部位コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。JED 診断用語—部位の"項 目値"コード 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		指定した部位の"項目値"。LOINC コードを 採用する場合は英語表記を推奨する。
	entryRelationship	0..*	R		procedure [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12'] 「表 8-131 処置プロシージャ記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19'] 「表 8-132 存在所見オブザベーション記述 XML仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					「表 8-133 食道静脈瘤—所見詳細オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	O		act [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22'] 「表 8-134 膵・胆道内視鏡アクト記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24'] 「表 8-135 深達度／深達度予測オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		act [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25'] 「表 8-136 胆道肉眼型アクト記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	O		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27'] 「表 8-137 超音波所見オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	O		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28'] 「表 8-138 超音波診断オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	O		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29'] 「表 8-139 超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21'] 「表 8-140 病理組織診断オブザベーション記述 XML 仕様」 参照
	entryRelationship	0..1	R		observation [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30'] 「表 8-141 組織診断オブザベーション記述 XML 仕様」 参照

表 8-131 処置プロシージャー記述 XML 仕様

Template:処置プロシージャー

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12 – Endoscopic Procedure
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	処置用語
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“処置”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/				処置

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	entry/observation/entryRelationship				
	@typeCode	1..1	F	RSON	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	@inversionInd	1..1	F	true	本規約指定値
	procedure	1..1	M		処置
	@classCode	1..1	F	PROC	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		処置プロシージャールテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		臓器毎の内視鏡的処置コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Endoscopic Procedure	
	methodCode	1..1	M		処置(治療内容)コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	処置(治療内容)。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	entryRelationship	0..*	R		処置詳細
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		処置詳細
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		処置詳細オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.13	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	code	1..1	M		処置詳細 “項目名” コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		処置詳細の“項目名”。LOINC コード を採用する場合は英語表記を推奨する。
	value	1..1	M		処置詳細 “項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	処置詳細の“項目値”。LOINC コード を採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が “記述する” の場合
	text()				自由記載のテキストデータ
	participant	0..*	R		処置デバイスの UDI。複数機種の 場合、個別に記載
	@typeCode	1..1	F	DEV	本規約指定値
S	@contextControlCode	1..1	F	OP	固定値。HL7 V3 スキーマで規定さ れているため本属性の記述は省略可 能
	participantRole	1..1	M		
	@classCode	1..1	F	MANU	本規約指定値
	templateId	1..1	M		
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3. 7.1.14	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	R		処置デバイスの UDI。検査時に読み 込める場合記載する
	@root	1..1	F	2.16.840.1.113883.3.3719	本規約指定値。UID を示す OID
	@extension	0..1	R		処置デバイスの UDI
	playingDevice	1..1	M		処置デバイスの JAN(GTIN)コード
	@classCode	1..1	F	DEV	HL7 V3 スキーマで規定されている デフォルト値“DEV”を指定する場 合、本属性の記述は省略可能。
	@determinerCode	1..1	F	INSTANCE	固定値。HL7 V3 スキーマで規定さ

Sch.	XPath				Card.	Conf.	値	備考
								れているため本属性の記述は省略可能
				code	0..1	R		JAN(GTIN)の登録がある場合記載する
				@code	1..1	M		処置デバイスのJAN(GTIN)コード
				@codeSystem	1..1	F	1.2.392.200250.2.2.8	本規約指定値。JAN コード OID
				@displayName	0..1	O	Procedure Device JAN Code	
				manufacturerModelName	0..1	R		メーカー製品型番
				text()				メーカーの製品型番をテキストで記述
				entryRelationship	0..*	R		医薬品投与
				@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S				@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
				substanceAdministration	1..1	M		医薬品投与
				@classCode	1..1	F	SBADM	本規約指定値
				@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
				templateId	1..1	M		医薬品投与テンプレート ID
				@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.16	本規約指定値
				@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
				doseQuantity	0..1	R		医薬品使用量
				@value	1..1	M		医薬品(局注材)使用量
				@unit	1..1	M		医薬品(局注材)使用量単位。"ml","cc"等
				consumable	1..1	M		
				@typeCode	1..1	F	CSM	
				manufacturedProduct	1..1	M		
				@classCode	1..1	F	MANU	
				templateId	1..1	M		製造医薬品テンプレート ID
				@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.17	本規約指定値
				@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
				id	0..1	R		医薬品識別コード GS1-128
				@root	1..1	M		医薬品の GS1-128 コード
					1..1	M		
				@classCode	1..1	F	MMAT	
				@determinerCode	1..1	F	KIND	
				templateId	1..1	M		製造材料エンティティテンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.18	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	0..1	R		医薬品コード JAN コードもしくは HOT コード。(GS1-128 コードが取得できない場合に記述)
	@code	1..1	M		
	@codeSystem	1..1	M		・JAN:1.2.392.200250.2.2.8 ・HOT7:1.2.392.200250.2.2.3 ・HOT9:1.2.392.200250.2.2.4 ・HOT13:1.2.392.200250.2.2.5
		0..1	R		医薬品名
	@codeSystem Name	0..1	R		使用したコードシステム名
	lotNumber	0..1	R		商品ロットナンバー
	text()				ロットナンバーを数値で記載

表 8-132 存在所見オブザベーション記述 XML 仕様

Template:存在所見オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19 – Findings Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—存在所見
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“存在所見”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				存在所見
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		存在所見
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		存在所見オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		(臓器毎の)存在所見コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Findings	
	value	1..*	M		存在所見の "主項目値 or 副項目値" コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T,B,D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	"主項目値+副項目値"。LOINC コードを 採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値が"その他(記述する)"の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

表 8-133 食道静脈瘤－所見詳細オブザベーション記述 XML 仕様

Template:食道静脈瘤-所見詳細オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20 - Esophageal Varices - Findings Details Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語－食道静脈瘤－所見詳細
解説	1 病変－1 レコードで診断情報を記述した際の"食道静脈瘤－所見詳細"を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。質的診断が"食道静脈瘤"の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				食道静脈瘤－所見詳細
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		食道静脈瘤－所見詳細
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		食道静脈瘤－所見詳細オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.20	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		食道静脈瘤－所見詳細コード
	@code	1..1	M	Z2B2A000	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または T.B.D.	上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Esophageal Varices - Findings Details	
	value	1..*	M		食道静脈瘤－所見詳細の“主項目値 or 副項目値”コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	“主項目値+副項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-134 膵・胆道内視鏡アクト記述 XML 仕様

Template:膵・胆道内視鏡アクト

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22 – Pancreatic and Biliary Endoscope Act
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語－膵・胆道内視鏡
解説	1 病変－1 レコードで診断情報を記述した際の“膵・胆道内視鏡”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。 検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				膵・胆道内視鏡
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	act	1..1	M		膵・胆道内視鏡
	@classCode	1..1	F	ACT	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵・胆道内視鏡アクトテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.22	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵・胆道内視鏡コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照	本規約指定値。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
				または T.B.D.	上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Pancreatic and Biliary Endoscope	
	entryRelationship	0..*	R		[副項目名]分の observation を繰り返し 記載する
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォ ルト値“true”を指定する場合、本属性の記 述は省略可能。
	observation	1..1	M		膵・胆道内視鏡詳細
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		膵・胆道内視鏡詳細オブザベーションテンプ レートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3. 7.1.23	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		膵・胆道内視鏡 “副項目名” コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O		膵・胆道内視鏡の“副項目名”。LOINC コー ドを採用する場合は英語表記を推奨する。
	value	1..1	M		膵・胆道内視鏡 “主項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	膵・胆道内視鏡の“主項目値”。LOINC コー ドを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		主項目値が “その他(記述する)” の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

表 8-135 深達度／深達度予測オブザベーション記述 XML 仕様

Template: 深達度／深達度予測オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24 – Invasion Depth／Invasion Depth Prediction Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—深達度／深達度予測
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“深達度”、“深達度予測”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				深達度／深達度予測
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		深達度／深達度予測
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		深達度／深達度予測オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.24	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		深達度／深達度予測コード
	@code	1..1	M	Z2H51000／Z2M51000 または T.B.D.	本規約指定値 上段 左 JED 深達度／右 JED 深達度予測 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Invasion Depth／Invasion Depth Prediction	
	value	1..1	M		深達度／深達度予測 “主項目値” コード
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	Z2H510ZZ／Z2M510ZZ または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	Describe	主情報の“記述する”。LOINC コードを採用 する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text()				自由記載のテキストデータ

表 8-136 胆道肉眼型アクト記述 XML 仕様

Template:胆道肉眼型アクト

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25 - Biliary Duct Macroscopic Type Act
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—胆道肉眼型
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“胆道肉眼型”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				胆道肉眼型
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	act	1..1	M		胆道肉眼型
	@classCode	1..1	F	ACT	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		胆道肉眼型アクトテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.25	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		胆道肉眼型コード
	@code	1..1	M	Z2H40000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Biliary Duct Macroscopic Type	
	entryRelationship	0..*	R		[副項目名]分の observation を繰り返し記載する
	@typeCode	1..1	F	COMP	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		胆道肉眼型詳細
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値

Sch.	XPath			Card.	Conf.	値	備考
		templateId		1..1	M		胆道肉眼型詳細オブザベーションテンプレートID
		@root		1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.26	本規約指定値
		@extension		0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
		code		1..1	M		胆道肉眼型 “副項目名” コード
		@code		1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
		@codeSystem		1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
		@codeSystem Name		0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
		@displayName		0..1	O		胆道肉眼型の”副項目名”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
		value		1..1	M		胆道肉眼型 “主項目値” コード
		@xsi:type		1..1	F	CD	本規約指定値
		@code		1..1	M	JED 用語集・コードセット参照または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
		@codeSystem		1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
		@displayName		0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	胆道肉眼型の”主項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-137 超音波所見オブザベーション記述 XML 仕様

Template:超音波所見オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27 - Ultrasound Findings Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波所見
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波所見”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath			Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship						超音波所見
		@typeCode		1..1	F	SPRT	本規約指定値
S		@contextConductionInd		1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
		observation		1..1	M		超音波所見
		@classCode		1..1	F	OBS	本規約指定値
		@moodCode		1..1	F	EVN	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	templateId	1..1	M		超音波所見オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.27	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		超音波所見コード
	@code	1..1	M	Z2HB0000/Z2MB0000 または T.B.D.	本規約指定値 上段 JED 左 胆道/右 膵 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Ultrasound Findings	
	value	1..*	M		超音波所見 “主項目値” or “副項目値” コード。複数の場合“value”を繰り返し記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	“主項目値+副項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		項目値に“記述する”を含む場合
	text()				自由記載のテキストデータ

表 8-138 超音波診断オブザベーション記述 XML 仕様

Template:超音波診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28 - Ultrasound Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				超音波診断
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					述は省略可能。
	observation	1..1	M		超音波診断
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		超音波診断オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.28	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		超音波診断コード
	@code	1..1	M	Z2HC0000/Z2MC0000 または T.B.D.	本規約指定値 上段 JED 左 胆道/右 膵 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Ultrasound Diagnosis	
	value	1..*	M		超音波診断 “主項目値” or “副項目値” コード。複数の場合“value”を繰り返し記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	“主項目値+副項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。
	originalText	0..1	R		主項目値が“その他(記述する)”の場合
	text()				自由記載のテキストデータ

表 8-139 超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーション記述 XML 仕様
Template:超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29 - Ultrasound Diagnosis of Cancer Progress Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—超音波進展度診断 癌進展度診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“超音波進展度診断 癌進展度診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/				超音波進展度診断 癌進展度診断

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
section/entry/observation/entryRelationship					
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“true”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		超音波進展度診断 癌進展度診断
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.29	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		超音波進展度診断 癌進展度診断コード
	@code	1..1	M	Z2HD1000/Z2MD1000 または T.B.D.	本規約指定値 上段 JED 左 胆道/右 膵 下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Ultrasound Diagnosis of Cancer Progress	
	value	1..*	M		超音波進展度診断 癌進展度診断 “主項目値” or “副項目値” コード。複数の場合“value”を繰り返し記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	“主項目値+副項目値”。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-140 病理組織診断オブザベーション記述 XML 仕様

Template:病理組織診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21 – Histopathological Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—病理組織診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の“病理組織診断”を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				病理組織診断
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		病理組織診断
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		病理組織診断オブザベーションテンプレートID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.21	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		(臓器毎の)病理組織診断コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Histopathological Diagnosis	
	value	1..*	M		病理組織診断 "主項目値" or "副項目値" コード。複数の場合"value"を繰り返し記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	"主項目値+副項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-141 組織診断オブザベーション記述 XML 仕様

Template:組織診断オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30 – Tissue Diagnosis Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	診断用語—組織診断
解説	1 病変—1 レコードで診断情報を記述した際の"組織診断"を機械可読なデータとして記述するためのテンプレート。検査種別が ERCP の場合のみ有効

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry/observation/entryRelationship				組織診断
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"true"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
	observation	1..1	M		組織診断
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		組織診断オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.30	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		(臓器毎の)組織診断コード
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Tissue Diagnosis	
	value	1..*	M		組織診断 "副項目値" コード。複数の場合"value"を繰り返し記載する
	@xsi:type	1..1	F	CD	本規約指定値
	@code	1..1	M	JED 用語集・コードセット参照 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED／下段 LOINC
	@displayName	0..1	O	JED 用語集・コードセット参照	"主項目値+副項目値"。LOINC コードを採用する場合は英語表記を推奨する。

表 8-142 検査画像 1 オブザベーションメディア記述 XML 仕様

Template:検査画像 1 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1 - Inspection Image 1 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	検査画像をレポートに内包する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				検査画像 1

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	True	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observationMedia	1..1	M		検査画像 1
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	@ID	1..1	M		ドキュメント内でユニークな XML ID
	templateId	1..1	M		検査画像 1 オブザベーションメディア テンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	O		検査画像の UID
	@root	1..1	M		検査画像の UID
	value	1..1	M		(検査画像をレポートに内包する)
	@mediaType	1..1	M		image/jpeg(デフォルト)
	@representation	1..1	F	B64	本規約指定値
	text()				Base64 でエンコードした検査画像の実データ

表 8-143 検査画像 2 オブザベーションメディア記述 XML 仕様

Template:検査画像 2 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2 - Inspection Image 2 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	検査画像のリンクソースを指定する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				検査画像 2
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	True	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observationMedia	1..1	M		検査画像 2
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	@ID	1..1	M		ドキュメント内でユニークな XML ID
	templateId	1..1	M		検査画像 2 オブザベーションメディア テンプレート ID

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	O		検査画像の UID
	@root	1..1	M		検査画像の UID
	value	1..1	M		(検査画像のリンクソースを指定する)
	@mediaType	1..1	M		image/jpeg(デフォルト)
	reference	1..1	M		検査画像のリンクソースを指定
	@value	1..1	M		検査画像のリンクソース(ファイル Path)

(3) XML 記述サンプル(総合診断セッション込み)

(a) 上部内視鏡治療

[食道]

質的診断: 異常所見なし

[胃]

部位: 体中部 前壁

質的診断: 胃瘻孔

処置: PEG 交換、カンガルーセルジンガーキット、20Fr、3.5cm、成功

部位: 体部

質的診断: 胃底腺ポリープ II 型(無茎性),散在

[十二指腸]

質的診断: 異常所見なし

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7"/>

<code code="1A000000" displayName="Comprehensive Diagnosis (upper endoscopy)" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>診断上部</title>

<text></text>

<component>

<section>

<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>

<code code="ZAB00000" displayName="Esophagus Diagnosis" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>

<title>食道診断</title>

<text>

<table>

<thead>

<tr>

<th>質的診断</th>

<th>部位</th>

<th>存在所見</th>

<th>処置</th>

```

        <th>デバイス</th>
        <th>病理組織診断</th>
        <th>コメント</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>異常なし</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2B30000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2Z30001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
        <code code="ZAC00000" displayName="Stomach Diagnosis"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
        <title>胃診断</title>
        <text>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>質的診断</th>
                        <th>部位</th>
                        <th>存在所見</th>
                        <th>処置</th>
                        <th>デバイス</th>
                        <th>病理組織診断</th>
                        <th>コメント</th>
                    </tr>

```

```

</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>胃瘻孔</td>
    <td>体中部 前壁</td>
    <td></td>
    <td>PEG 交換、カンガルーセルジンガーキット、20Fr、3.5cm、成功</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>胃底腺ポリープ II 型(無茎性)、散在</td>
    <td>体部</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2C30000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2C30100"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1">
      <originalText>胃瘻孔</originalText>
    </value>
    <targetSiteCode code="ZZC10200"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <targetSiteCode code="ZZC30100"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <entryRelationship typeCode="RSON" inversionInd="true">
      <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
        <code code="ZDC00000"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <methodCode code="ZZZ05342"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.13"/>

```

```

        <code code="Z3Z20021"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z3Z30021"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</procedure>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2C30000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2C32302"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1">
            <originalText>II 型(無茎性)、散在</originalText>
        </value>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
        <code code="ZAD00000" displayName="Duodenum Diagnosis"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
        <title>十二指腸診断</title>
        <text>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>質的診断</th>
                        <th>部位</th>
                        <th>存在所見</th>
                        <th>処置</th>
                        <th>デバイス</th>
                        <th>病理組織診断</th>
                        <th>コメント</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>異常なし</td>
                        <td></td>
                        <td></td>
                        <td></td>
                        <td></td>
                        <td></td>
                        <td></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </text>
    </section>
</component>

```



```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2D30000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2Z30001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>

```

(4) 上記 XML 記述サンプルにスタイルシートを適用した際の表示例

食道診断

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
異常なし						


胃診断

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
胃瘻孔	体中部 前壁		PEG 交換、カンガルーセルジ ンガーキット、20Fr、3.5cm、成功			
胃底腺ポリ ーブ II 型(無茎性)、散在	体部					

十二指腸診断

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
異常なし						

8.4.2.51. シェーマ図

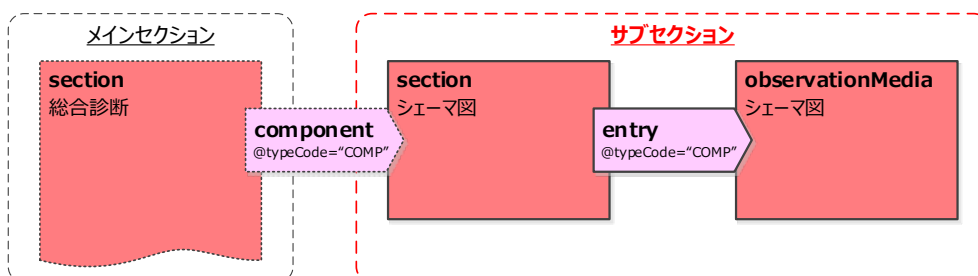

(1) 概要

シェーマ図を扱う場合に使用する。

(2) シェーマ図記述 XML 仕様

表 8-144 シーマ図セクション XML 仕様

Template:シーマ図セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2 – Schema Diagram Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シーマ図を扱う場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				シーマ図
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		シーマ図セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		シーマ図セクションコード
	@code	1..1	M	ZB000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Schema Diagram	
	title	1..1	M		シーマ図
	text()			シーマ図	本規約指定値
	text	1..1	M	Schema Diagram	
	renderMultiMedia	1..1	M		レンダリングするシーマ図の XML ID を指定する
	@referencedObject	1..1	M		observationMedia で指定される XML ID
	entry	(注1) 1..1	M		[シーマ図をレポートに内包する場合] observationMedia [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1'] 「表 8-145 シーマ図 1 オブザベーションメディア記述 XML 仕様」参照
	entry	(注1) 1..1	M		[シーマ図のリンクソースを指定する場合] observationMedia [templateId/@root= '1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2']

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
					「表 8-146 シェーマ図 2 オブザベーションメディア記述 XML 仕様」参照

(注 1) いずれか一方を使用する

表 8-145 シェーマ図 1 オブザベーションメディア記述 XML 仕様

Template:シェーマ図 1 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1 - Schema Diagram 1 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シェーマ図をレポートに内包する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				シェーマ図 1
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	True	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observationMedia	1..1	M		シェーマ図 1
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	@ID	1..1	M		ドキュメント内でユニークな XML ID
	templateId	1..1	M		シェーマ図 1 オブザベーションメディア テンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	O		シェーマ図の UID
	@root	1..1	M		シェーマ図の UID
	value	1..1	M		(シェーマ図をレポートに内包する)
	@mediaType	1..1	M		image/jpeg(デフォルト)
	@representation	1..1	F	B64	本規約指定値
	text()				Base64 でエンコードしたシェーマ図の実データ

表 8-146 シェーマ図 2 オブザベーションメディア記述 XML 仕様

Template:シェーマ図 2 オブザベーションメディア

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2 - Schema Diagram 2 ObservationMedia
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	シェーマ図のリンクソースを指定する場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				シェーマ図 2
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値"COMP"を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	True	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observationMedia	1..1	M		シェーマ図 2
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	@ID	1..1	M		ドキュメント内でユニークな XML ID
	templateId	1..1	M		シェーマ図 2 オブザベーションメディア テンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	0..1	O		シェーマ図の UID
	@root	1..1	M		シェーマ図の UID
	value	1..1	M		(シェーマ図のリンクソースを指定する)
	@mediaType	1..1	M		image/jpeg(デフォルト)
	reference	1..1	M		シェーマ図のリンクソースを指定
	@value	1..1	M		シェーマ図のリンクソース(ファイル Path)


(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.2"/>
  <code code="ZB000000" displayName="Schema Diagram"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>シェーマ図</title>
  <text>
    Schema Diagram
    <renderMultiMedia referencedObject="SD1"/>
  </text>
  <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="SD1">
      <id root="1.2.392.XXXXXXX.100.9.2.1.9.9.2.1.20201106113821"/>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.2.2"/>
      <value xsi:type="ED" mediaType="image/jpeg">
        <reference value="Schema_Diagram_Stomach.jpeg">
      </value>
    </observationMedia>
  </entry>
</section>

```

8.4.2.52. 病理結果

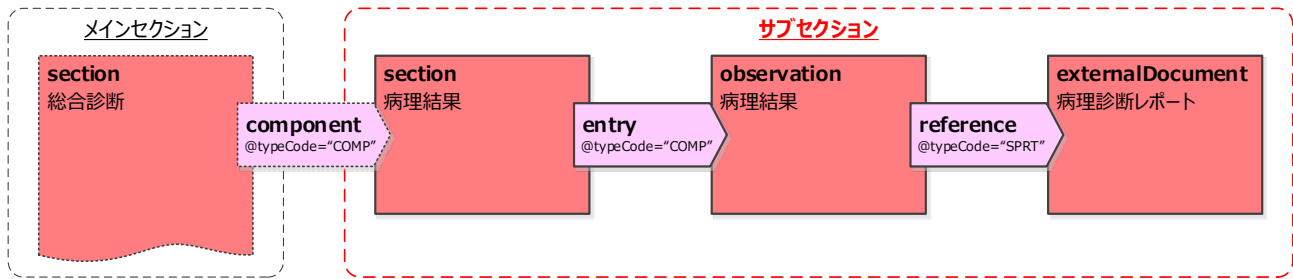

(1) 概要

病理診断レポートを扱う場合に使用する。

(2) 病理結果記述 XML 仕様

表 8-147 病理結果セクション XML 仕様

Template:病理結果セクション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3 - Pathological Results Section
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA セクションレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	病理診断レポートを扱う場合に使用するテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section				病理結果
S	@classCode	1..1	F	DOCSECT	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
S	@moodCode	1..1	F	EVN	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	templateId	1..1	M		病理結果セクションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		病理結果セクションコード
	@code	1..1	M	ZC000000 または T.B.D.	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	1..1	F	Pathological Results	
	title	1..1	M		病理結果
	text()			病理結果	本規約指定値
	text	1..1	M		

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	text()	1..1	M	Pathological diagnosis report	本規約指定値
	linkHtml	1..1	M		
	@href	1..1	M		externalDocument の ID 属性で指定される値
	entry	1..1	M		observation [templateId/@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1'] 「表 8-148 病理結果オブザベーション記述 XML 仕様」参照

表 8-148 病理結果オブザベーション記述 XML 仕様

Template:病理結果オブザベーション

テンプレート	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1 – Pathological Results Observation
ID	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1
バージョン	2021.8.10
CDA クラス分類	CDA エントリレベル テンプレート
JED 用語分類	—
解説	病理診断レポートを扱う場合に使用するエントリレベルのテンプレート。検査種別、対象臓器を問わずすべて共通。

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/entry				病理結果
	@typeCode	1..1	F	COMP	HL7 V3 スキーマで規定されているデフォルト値“COMP”を指定する場合、本属性の記述は省略可能。
S	@contextConductionInd	1..1	F	true	固定値。HL7 V3 スキーマで規定されているため本属性の記述は省略可能
	observation	1..1	M		病理結果
	@classCode	1..1	F	OBS	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	templateId	1..1	M		病理結果オブザベーションテンプレート ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。 文字列。初版は記載しなくてよい
	code	1..1	M		病理結果コード
	@code	1..1	M	ZC000000 または T.B.D.	本規約指定値。セクションと同じコードを使用する。
	@codeSystem	1..1	M	1.2.392.200270.4.1000.1 または 2.16.840.1.113883.6.1	本規約指定値。 上段 JED/下段 LOINC
	@codeSystemName	0..1	O	JED または LOINC	指定したコードシステムの名称
	@displayName	0..1	O	Pathological Results	
	reference	1..1	M		外部参照
	@typeCode	1..1	F	SPRT	本規約指定値

Sch.	XPath	Card.	Conf.	値	備考
	externalDocument	1..1	M		病理診断レポート
	@classCode	1..1	F	DOC	本規約指定値
	@moodCode	1..1	F	EVN	本規約指定値
	@ID	1..1	M		病理診断レポートを識別し、セクションでレンダリングするための ID
	templateId	1..1	M		病理診断レポートリファレンステEMPLATE ID
	@root	1..1	F	1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.2	本規約指定値
	@extension	0..1	O		テンプレートの版管理用属性。文字列。初版は記載しなくてよい
	id	1..1	M		病理診断レポートの文書 ID
	@root	1..1	M		病理診断レポートの文書 ID
	@extension	0..1	O		
	text	1..1	M		病理診断レポートのリンクソース
	@mediaType	1..1	M	text/x-hl7-text+xml	本規約指定値
	reference	1..1	M		病理診断レポートのリンクソース
	@value	1..1	M		病理診断レポートのリンクソース[ファイル Path]

(3) XML 記述サンプル

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.3"/>
  <code code="ZC000000" displayName="Pathological results"
    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
  <title>病理結果</title>
  <text>
    病理診断レポート
    <linkHtml href="#EXD1"/>
  </text>
  <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.1"/>
      <code code="ZC000000" displayName="Pathological results"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1" codeSystemName="JED"/>
      <reference typeCode="SPRT">
        <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN" ID="EXD1">
          <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.3.2"/>
          <id root="1.2.392.XXXXXX.100.9.2.1.9.9.2.1.20201106113821"/>
          <text mediaType="text/x-hl7-text+xml"/>
            <reference value="Document/D20201110123456.XML"/>
          </text>
        </externalDocument>
      </reference>
    </observation>
  </entry>
</section>

```

付録 - 1. 本規約で使用するコード類

付録 - 1.1. ヘッダ部

本規約で定義した、ドキュメントレベルのテンプレート ID および文書コードを示す。

「7.3. 電子診療文書 "ClinicalDocument"の構成」を参照のこと。

検査種別	テンプレート ID
上部内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.1
下部内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2
小腸内視鏡検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3
ERCP 検査レポート	1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4

検査種別	文書コード	コードシステム	名称（日本語表記 / 英語表記）
上部内視鏡検査レポート	18751-8	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	上部消化管内視鏡報告書 / Endoscopy study
下部内視鏡検査レポート	18746-8	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	下部消化管内視鏡報告書 / Colonoscopy study
小腸内視鏡検査レポート	28018-0	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	小腸内視鏡報告書 / Enteroscopy Study
ERCP 検査レポート	28016-4	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	ERCP 報告書 / ERCP Study

付録 - 1.2. ボディ部

本規約で定義した、セクションレベル・エントリレベルのテンプレート ID、コード、およびコードシステムを示す。

メインセクション名	コード	コードシステム	テンプレート ID
患者基本情報(JED) Patient's Basic Information (JED)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1
	Z1100000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
患者背景情報(上部) Patient Background Information (upper endoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2
	11200000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
患者背景情報(下部) Patient Background Information (colonoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2
	21200000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
患者背景情報(小腸) Patient Background Information (small intestinal endoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2
	31200000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
患者背景情報(ERCP) Patient Background Information (ERCP)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2
	41200000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
依頼情報(上部) Information to Be Requested (upper endoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3
	11300000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
依頼情報(下部) Information to Be Requested (colonoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3
	21300000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	
依頼情報(小腸) Information to Be Requested (small intestinal endoscopy)	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3
	31300000	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	

メインセッション名	コード	コードシステム	テンプレートID
依頼情報(ERCP) Information to Be Requested (ERCP)	T.B.D. 41300000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3
検査時情報(上部) Examination Information (upper endoscopy)	T.B.D. 11400000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4
検査時情報(下部) Examination Information (colonoscopy)	T.B.D. 21400000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4
検査時情報(小腸) Examination Information (small intestinal endoscopy)	T.B.D. 31400000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4
検査時情報(ERCP) Examination Information (ERCP)	T.B.D. 41400000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4
検査後情報(ERCP) Post-Examination Information (ERCP)	T.B.D. 41500000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5
偶発症情報(上部) Adverse Events Information (upper endoscopy)	T.B.D. 11600000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6
偶発症情報(下部) Adverse Events Information (colonoscopy)	T.B.D. 21600000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6
偶発症情報(小腸) Adverse Events Information (small intestinal endoscopy)	T.B.D. 31600000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6
偶発症情報(ERCP) Adverse Events Information (ERCP)	T.B.D. 41600000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6
総合診断(上部) Comprehensive Diagnosis (upper endoscopy)	T.B.D. 1A000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7
総合診断(下部) Comprehensive Diagnosis (colonoscopy)	T.B.D. 2A000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7
総合診断(小腸) Comprehensive Diagnosis (small intestinal endoscopy)	T.B.D. 3A000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.7
総合診断(ERCP) Comprehensive Diagnosis (ERCP)	T.B.D. 4A000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.7

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
年齢セクション Age Section	30525-0	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1110003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.1.1
年齢オブザベーション Age Observation	30525-0	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1110003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.1.1
検査回数(生涯)セクション Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.1
検査回数(生涯)オブザベーション Number of Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime) Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.1
ASA Grade セクション ASA Grade Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210002	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.2
ASA Grade オブザベーション ASA Grade Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210002	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.2
抗血栓薬セクション Antithrombotic Agents Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.3
抗血栓薬オブザベーション Antithrombotic Agents Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.3
休薬期間オブザベーション Drug Withdrawal Period Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
		JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.3.1
置換オブザベーション Replace Medicine Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.3.2
喫煙セクション Smoker/Non-smoker Section	72166-2	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210004	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.4
喫煙オブザベーション Smoker/Non-smoker Observation	72166-2	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210004	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.4
飲酒セクション Drinking History and Condition Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210005	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.5
飲酒オブザベーション Drinking History and Condition Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210005	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.5
悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1210006	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.6
悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Family History of Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation	Z1210006	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.6
大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Section	Z1210007	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.7
大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Family History of Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child) Observation	Z1210007	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.7
他臓器癌歴セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Previous History of Other Organ Cancer Section	Z1210008	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.8
他臓器癌歴オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Previous History of Other Organ Cancer Observation	Z1210008	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.8
萎縮度(木村竹本分類)セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Section	Z1210009	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.9
萎縮度(木村竹本分類)オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Atrophy Degree (Kimura-Takemoto Classification) Observation	Z1210009	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.9
ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Helicobacter Pylori and Infection State Section	Z1210010	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.10
ヘリコバクター・ピロリ感染状態オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Helicobacter Pylori and Infection State Observation	Z1210010	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.10
腹部手術歴セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Previous Record of Abdominal Surgeries Section	Z1210011	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.2.11
腹部手術歴オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Previous Record of Abdominal Surgeries Observation	Z1210011	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.2.11
予定性セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Procedure Urgency Section	Z1310001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.3.1
予定性オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Procedure Urgency Observation	Z1310001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.3.1
外来・入院セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Patient Type Section	Z1310002	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.3.2
外来・入院オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Patient Type Observation	Z1310002	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.3.1
検査目的セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Purpose of Examination Section	Z1310003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.3.3
検査目的オブザベーション Purpose of Examination Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.3.3
治療目的セクション Purpose of Treatment Section	T.B.D. Z1310004	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.3.4
治療目的オブザベーション Purpose of Treatment Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.3.4
挿入経路セクション Insertion Route Section	T.B.D. Z1410001	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.1
挿入経路オブザベーション Insertion Route Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.1
機種名セクション Vender Model Number Section	T.B.D. Z1410002	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.2
機種名オブザベーション Vender Model Number of Endoscope Observation	T.B.D. Z1410002	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.2
鎮痙剤使用セクション Status of Use of Antispasmodic Agents Section	T.B.D. Z1410003	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.3
鎮痙剤使用オブザベーション Status of Use of Antispasmodic Agents Observation	T.B.D. Z1410003	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.3
鎮静・鎮痛・麻酔セクション Sedation/Analgesia/Anesthesia Section	T.B.D. Z1410004	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.4
鎮静・鎮痛・麻酔オブザベーション Sedation/Analgesia/Anesthesia Observation	T.B.D. Z1410004	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.4
送気セクション Type of Air/Gas Section	T.B.D. Z1410005	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.5
送気オブザベーション Type of Air/Gas Observation	T.B.D. Z1410005	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.5
観察範囲セクション Scope of Observation Section	T.B.D. Z1410006	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.6
観察範囲オブザベーション Scope of Observation Observation	T.B.D. JED 用語集・	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.6

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
	コードセット参照		
到達部位セクション Reached Area Section	T.B.D. Z1410007	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.7
到達部位オブザベーション Reached Area Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.7
画像強調観察セクション Image-Enhanced Endoscopy Section	T.B.D. Z1410008	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.8
画像強調観察オブザベーション Image-Enhanced Endoscopy Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.8
挿入時間セクション Insertion Time (min) Section	T.B.D. Z1410011	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.9
挿入時間オブザベーション Insertion Time (min) Observation	T.B.D. Z1410011	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.9
抜去時間セクション Withdrawal Time (min) Section	T.B.D. Z1410012	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.10
抜去時間オブザベーション Withdrawal Time (min) Observation	T.B.D. Z1410012	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.10
治療時間セクション Total Treatment Time (min) Section	T.B.D. Z1410013	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.11
治療時間オブザベーション Total Treatment Time (min) Observation	T.B.D. Z1410013	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.11
乳頭部までの到達時間セクション Time to Access the Major Papilla (min) Section	T.B.D. Z1410014	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.12
乳頭部までの到達時間オブザベーション Time to Access the Major Papilla (min) Observation	T.B.D. Z1410014	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.12
全施行時間セクション Total Procedure Time (min) Section	T.B.D. Z1410015	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.13
全施行時間オブザベーション Total Procedure Time (min) Observation	T.B.D. Z1410015	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.13
腸管前処置セクション Bowel Preparation Section	T.B.D. Z1410016	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.14
腸管前処置オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Bowel Preparation Observation	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.14
全照射時間セクション Total Exposure Time (min) Section	T.B.D. Z1410017	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.15
全照射時間オブザベーション Total Exposure Time (min) Observation	T.B.D. Z1410017	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.15
施行前の治療の有無セクション Prior Endoscopic Intervention Section	T.B.D. Z1410018	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.16
施行前の治療の有無オブザベーション Prior Endoscopic Intervention Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.16
内視鏡看護師・技師名セクション Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians Section	T.B.D. Z1410021	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.17
内視鏡看護師・技師名オブザベーション Names or the number of Endoscopy Nurses and Technicians Observation	T.B.D. Z1410021	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.17
胆道造影範囲セクション Extent of Cholangiography Section	T.B.D. 41410007	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.18
胆道造影範囲オブザベーション Extent of Cholangiography Observation	T.B.D. 41410007	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.18
膵管造影範囲セクション Extent of Pancreatography Section	T.B.D. 41410008	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.19
膵管造影範囲オブザベーション Extent of Pancreatography Observation	T.B.D. 41410008	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.19
胆管挿管セクション Cannulation for Bile Duct Section	T.B.D. 41410009	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.20
胆管挿管オブザベーション Cannulation for Bile Duct Observation	T.B.D. 41410009	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.20
膵管挿管セクション Cannulation for Pancreas Duct Section	T.B.D. 41410010	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.4.21
膵管挿管オブザベーション Cannulation for Pancreas Duct Observation	T.B.D. 41410010	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.4.21
胆管径セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Bile Duct Diameter Section	41410011	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.22
胆管径オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Bile Duct Diameter Observation	41410011	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.22
胆管径副情報オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Bile Duct Diameter (Sub Information) Observation	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.22.1
膵管径セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Pancreas Duct Diameter Section	41410012	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.23
膵管径オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Pancreas Duct Diameter Observation	41410012	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.23
膵管径副情報オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Pancreas Duct Diameter (Sub Information) Observation	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.23.1
ERCP 難度セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Grading the Difficulty of ERCP Section	41410013	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.24
ERCP 難度オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Grading the Difficulty of ERCP Observation	41410013	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.24
専攻医が施行した場合の完遂率(%)セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%) Section	41410014	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.25
専攻医が施行した場合の完遂率(%)オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Compression Rate of the Procedure by Resident Physician (%) Observation	41410014	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.25
最初の胆管へのアプローチ法セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
First Approach Method to Bile Duct Section	41410015	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.26
最初の胆管へのアプローチ法オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
First Approach Method to Bile Duct Observation	41410015	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.26
深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation Section	41410016	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.27
深部挿入までの乳頭へのアプローチ回数オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Number of Approaches to Papilla until Deep Cannulation Observation	41410016	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.27
最終的な深部挿入時のアプローチ方法セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation Section	41410017	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.4.28
最終的な深部挿入時のアプローチ方法オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Final Approach Method to Bile Duct as Deep Cannulation Observation	41410017	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.4.28
翌日の amylase 値セクション Amylase Value of Next Day Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1510001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.5.1
翌日の amylase 値オブザベーション Amylase Value of Next Day Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1510001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.5.1
手技中偶発症セクション Adverse Events during Procedure Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1610001	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.6.1
手技中偶発症オブザベーション Adverse Events during Procedure Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.1
対応オブザベーション Handling (Actions) Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1Z30021	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.100.1
転帰オブザベーション Outcome Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1Z30031	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.100.2
手技後偶発症セクション Adverse Events after Procedure Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1610002	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.6.2
手技後偶発症オブザベーション Adverse Events after Procedure Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.2
偶発症(ERCP)セクション Adverse Events by ERCP Procedure Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1610003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.6.3
偶発症(ERCP)オブザベーション Adverse Events by ERCP Procedure Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	41610003	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.3
程度オブザベーション Degree Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1Z30041	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.100.3
合併症確認日数オブザベーション Number of Confirmed Days of Complication Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1Z30051	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.100.4
30 日以内の死亡セクション Death within 30 Days Section	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1610004	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.6.4
30 日以内の死亡オブザベーション Death within 30 Days Observation	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.
	Z1610004	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.6.4
臓器別診断セクション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Specific Organ's Diagnosis Section	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.2.1.7.1
質的診断オブザベーション Characterization Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.11
処置プロシージャ Endoscopic Procedure	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.12
処置詳細オブザベーション Endoscopic Procedure Details Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.13
存在所見オブザベーション Findings Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.19
食道静脈瘤-所見詳細オブザベーション Esophageal Varices - Findings Details Observation	T.B.D. Z2B2A000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.20
膵・胆道内視鏡アクト Pancreatic and Biliary Endoscope Act	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.22
膵・胆道内視鏡詳細オブザベーション Pancreatic and Biliary Endoscope Details Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.23
深達度／深達度予測オブザベーション Invasion Depth／Invasion Depth Prediction Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.24
胆道肉眼型アクト Biliary Duct Macroscopic Type Act	T.B.D. Z2H40000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.25
胆道肉眼型詳細オブザベーション Biliary Duct Macroscopic Type Details Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.26
超音波所見オブザベーション Ultrasound Findings Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.27
超音波診断オブザベーション Ultrasound Diagnosis Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.28
超音波進展度診断 癌進展度診断オブザベーション Ultrasound Diagnosis of Cancer Progress Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.29
病理組織診断オブザベーション Histopathological Diagnosis Observation	T.B.D. JED 用語集・ コードセット参照	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.21
組織診断オブザベーション	T.B.D.	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1)	1.2.392.200270.

サブセクション／エントリレベル名	コード	コードシステム	テンプレートID
Tissue Diagnosis Observation	JED 用語集・ コードセット参照	JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	3.2.2.1.3.7.1.30
検査画像 1 オブザベーションメディア Inspection Image 1 ObservationMedia			1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.1
検査画像 2 オブザベーションメディア Inspection Image 2 ObservationMedia			1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.1.2
シェーマ図セクション Schema Diagram Section	T.B.D. ZB000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.7.2
シェーマ図 1 オブザベーションメディア Schema Diagram 1 ObservationMedia			1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.2.1
シェーマ図 2 オブザベーションメディア Schema Diagram 2 ObservationMedia			1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.2.2
病理結果セクション Pathological Results Section	T.B.D. ZC000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.2.1.7.3
病理結果オブザベーション Pathological Results Observation	T.B.D. ZC000000	LOINC (2.16.840.1.113883.6.1) JED (1.2.392.200270.4.1000.1)	1.2.392.200270. 3.2.2.1.3.7.3.1

付録 - 1.3. コードシステムとコード表

本規約で使用しているコードシステムの名称と OID、使用値表を示す。

コードシステムの名称	OID	使用値
HL7 V3 定義表(nullFlavor)	2.16.840.1.113883.11.10609	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 6-1 HL7 V3 定義表 nullFlavor 値」参照
HL7 V3 定義表(機密性コード)	2.16.840.1.113883.5.25	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-1 HL7 V3 定義表 機密性コード」参照
HL7 V3 定義表(性別)	2.16.840.1.113883.5.1	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-3 HL7 V3 定義表 性別」参照
HL7 V3 定義表(婚姻情報)	2.16.840.1.113883.5.2	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-4 HL7 V3 定義表 婚姻情報」参照
HL7 V3 定義表(関係情報)	2.16.840.1.113883.5.111	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-5 HL7 V3 定義表 関係情報」参照
HL7 V3 定義表(宗教)	2.16.840.1.113883.5.1076	「HL7 V3 定義表 ReligiousAffiliation」参照
HL7 V3 定義表(人種)	2.16.840.1.113883.5.104	「HL7 V3 定義表 Race」参照
HL7 V3 定義表(民族)	2.16.840.1.113883.5.50	「HL7 V3 定義表 Ethnicity」参照
HL7 V3 定義表(対話言語)	2.16.840.1.113883.6.121	「HL7 V3 定義表 Language」参照
HL7 V3 定義表(言語能力)	2.16.840.1.113883.5.60	「HL7 V3 定義表 LanguageAbilityMode」参照
HL7 V3 定義表(対話言語の堪能レベル)	2.16.840.1.113883.5.61	「HL7 V3 定義表 LanguageAbilityProficiency」参照
HL7 V3 定義表(職務)	2.16.840.1.113883.5.88	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-20 HL7 V3 定義表 職務」参照
HL7 V3 定義表(関係者) HL7 V3 定義表(実施者)	2.16.840.1.113883.5.90	「HL7 V3 定義表 ParticipationType」参照
HL7 V3 定義表(サービスイベント)	2.16.840.1.113883.5.6	JAHIS 診療文書構造化記述規約 共通編 Ver.2.0 「表 7-19 HL7 V3 定義表 サービスイベントクラスコード」参照
LOINC(年齢)	2.16.840.1.113883.6.1	30525-0
LOINC(喫煙)	2.16.840.1.113883.6.1	72166-2
LOINC(機種名)	2.16.840.1.113883.6.1	19785-5

※ 上記 OID は HL7International 管理 <http://www.hl7.org/oid/index.cfm>

※ JED 用語集・コードセットのコードシステムを示す OID (1.2.392.200270.4.1000.1) は、JAHIS にて採番

※ JED 用語集・コードセットは、JED の「用語集ダウンロード」のホームページを参照

参照先 URL:<https://jedproject.jges.net/about/terms-download/>

※ 用語集ダウンロードホームページの「JAHIS 標準 内視鏡検査レポート構造化記述規約に準拠した製品向けの JED 用語」から、コードリスト付の JED 用語集をダウンロード可能

付録 - 1.4. サンプルコード

JED 研究機構からご提供頂いた【上部 1】および【下部治療 1】の内視鏡検査レポート情報に基づく xml のサンプルコードを掲載する。

【上部 1】

<p>患者 ID : 0000000001 患者名 : テスト 患者1 患者名(カナ) : (テスト カジヤ1) 性別 : 女 生年月日 : 1939/07/01 検査時年齢 : 79</p>	<p>入外区分 : 外来 依頼科 : 消化器科内科 依頼医 : テスト 医師1 検査日 : 2019/01/01 検査種別 : 上部内視鏡検査 主実施医 : テスト 医師1 副実施医 : テスト 医師2 テスト 医師3 テスト 医師4</p>
<p>【食道】 質的診断 : 食道裂孔ヘルニア 滑脱型 【胃】 質的診断 : 異常所見なし コメント : 潰瘍瘢痕は目立たない。 【十二指腸】 質的診断 : 異常所見なし コメント : 潰瘍瘢痕は目立たない。</p>	<p>使用スコープ : GIF-H290Z ASA Grade : 1 : 大きな問題はない ヘリコバクター・ピロリ感染状態 : 陰性 抗血栓薬 : ワルファリン 休薬なし チエノピリジン 休薬なし 喫煙 : 非喫煙者 飲酒 : 機会飲酒者 悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) : なし 他臓器癌 : なし 予定性 : 予定 検査目的 : 胃癌以外の経過観察 鎮痙剤使用 : なし 鎮静・鎮痛・麻酔 : BZD 挿入経路 : 経口 送気 : 空気 画像強調観察 : なし 萎縮度(木村竹本分類) : C-0 内視鏡看護師・技師名 : テスト 看護師1 テスト 看護師2 手技中偶発症 : なし 手技後偶発症 : なし</p>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="CDA.xsl"?>
```

```
<!--
```

タイトル : JED 内視鏡検査レポートサンプル【上部 1】

ファイル名 : CDA_Sample_Code_JED_上部 1.xml

作成者 : JAHIS 内視鏡部門システム専門委員会

最終更新日 : 2021-02-XX

患者 ID : 0000000001

患者名 : テスト 患者1

患者名(カナ) : (テスト カジヤ1)

性別 : 女

生年月日:1939/07/01
検査時年齢:79
入外区分:外来
依頼科:消化器科内科
依頼医:テスト 医師1
検査日:2019/01/01
検査種別:上部内視鏡検査
主実施医:テスト医師1
副実施医:テスト医師2、テスト医師3、テスト医師4

[食道]

質的診断:食道裂孔ヘルニア 滑脱型

[胃]

質的診断:異常所見なし

コメント:潰瘍瘢痕は目立たない。

[十二指腸]

質的診断:異常所見なし

コメント:潰瘍瘢痕は目立たない。

使用スコープ:GIF-H290Z

ASA Grade:1:大きな問題はない

ヘリコバクター・ピロリ感染状態: 陰性

抗血栓薬:ワルファリン 休薬なし、チエノピリジン 休薬なし

喫煙:非喫煙者

飲酒:機会飲酒者

悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子):なし

他臓器癌:なし

予定性:予定

検査目的:胃癌以外の経過観察

鎮痙剤使用:なし

鎮静・鎮痛・麻酔:BZD

挿入経路:経口

送気:空気

画像強調観察:なし

萎縮度(木村竹本分類):C-0

内視鏡看護師・技師名:テスト 看護師1、テスト 看護師2

手技中偶発症:なし

手技後偶発症:なし

-->

<!--

JED 内視鏡検査レポートヘッダ部

-->

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"

```

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd">
<realmCode code="JP"/>
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<!-- JAHIS 診療文書構造化記述規約(共通編) Ver.2.0 で定義されたヘッダのテンプレート ID(ドキュメント
レベル) -->
<templateId root="1.2.392.200270.3.2.1.1.1"/>
<!-- 本規約で定義した上部内視鏡検査レポートのドキュメントレベルのテンプレート ID -->
<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.1" extension="2026-XX-XX"/>
<id extension="A1120190101101530" root="1.2.392.200250.2.2.1.9312345678"/>
<code code="18751-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
    displayName="上部消化管内視鏡報告書"/>
<title>JAHIS 病院上部内視鏡検査レポート</title>
<effectiveTime value="20190101101530+0900"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="ja-JP"/>
<versionNumber value="1"/>
<!-- 患者基本情報 -->
<recordTarget>
    <patientRole>
        <id extension="00000000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
        <addr use="HP">
            <streetAddressLine>虎ノ門7丁目19番9</streetAddressLine>
            <city>港区</city>
            <state>東京都</state>
            <postalCode>105-0001</postalCode>
            <country>JP</country>
        </addr>
        <telecom value="tel:03-3506-8010" use="HP"/>
        <patient>
            <name use="IDE">
                <family>テスト</family>
                <given>患者1</given>
            </name>
            <name use="SYL">
                <family>テスト</family>
                <given>カンジャ1</given>
            </name>
            <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"
                displayName="女性"/>
            <birthTime value="19390701"/>
        </patient>
        <providerOrganization>
            <id root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
            <name>JAHIS 病院</name>
            <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
            <addr use="WP">

```

```

        <streetAddressLine>新橋 7 丁目 5 番 5 号</streetAddressLine>
        <city>港区</city>
        <state>東京都</state>
        <postalCode>105-0004</postalCode>
        <country>JP</country>
    </addr>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- 作成者 -->
<author>
    <time value="20190101101530+0900"/>
    <assignedAuthor>
        <id extension="GM000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
        <addr use="WP">
            <streetAddressLine>新橋 7 丁目 5 番 5 号</streetAddressLine>
            <city>港区</city>
            <state>東京都</state>
            <postalCode>105-0004</postalCode>
            <country>JP</country>
        </addr>
        <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
        <assignedPerson>
            <name use="IDE">
                <family>テスト</family>
                <given>医師1</given>
            </name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 保管組織 -->
<custodian>
    <assignedCustodian>
        <representedCustodianOrganization>
            <id extension="HP000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
            <name>JAHIS 病院</name>
            <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
            <addr use="WP">
                <streetAddressLine>新橋 7 丁目 5 番 5 号</streetAddressLine>
                <city>港区</city>
                <state>東京都</state>
                <postalCode>105-0004</postalCode>
                <country>JP</country>
            </addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>

```

```

<!-- 受取人(依頼人) -->
<informationRecipient>
  <intendedRecipient>
    <id extension="GM000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <informationRecipient>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師1</given>
      </name>
    </informationRecipient>
    <receivedOrganization>
      <name>消化器科内科</name>
    </receivedOrganization>
  </intendedRecipient>
</informationRecipient>
<!-- 法的文書承認者 -->
<legalAuthenticator>
  <time value="20190101101530+0900"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr use="WP">
      <streetAddressLine>新橋7丁目5番5号</streetAddressLine>
      <city>港区</city>
      <state>東京都</state>
      <postalCode>105-0004</postalCode>
      <country>JP</country>
    </addr>
    <telecom use="WP" value="tel:03-3506-8070"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師1</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!-- オーダ情報 -->
<inFulfillmentOf>
  <order>
    <id extension="201812101345001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
  </order>
</inFulfillmentOf>
<!-- 検査・診療等行為 -->
<documentationOf typeCode="DOC">
  <serviceEvent classCode="ACT">
    <id root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901.201901011013001"/>
  </serviceEvent>
</documentationOf>

```



```

<!-- DICOM study instance UID など -->
<effectiveTime>
  <low value="20190101091234"/>
  <!-- 検査開始時間 -->
  <high value="20190101101352"/>
  <!-- 検査終了時間 -->
</effectiveTime>
<performer typeCode="PRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師1</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000002" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 2</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000003" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 3</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">

```

```

    <assignedEntity>
      <id extension="GM000004" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
      <addr nullFlavor="NI"/>
      <telecom nullFlavor="NI"/>
      <assignedPerson>
        <name use="IDE">
          <family>テスト</family>
          <given>医師 4</given>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </performer>
</serviceEvent>
</documentationOf>
<!--
*****
JED 内視鏡検査レポートボディ部
*****
-->
<component>
  <structuredBody>
    <!--
*****
患者基本情報(JED)セクション
*****
-->
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
        <code code="Z1100000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="Patient's Basic
          Information(JED)" />
        <title>患者基本情報(JED)</title>
        <component>
          <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
            <code code="Z1110003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
              codeSystemName="JED" displayName="Age" />
            <title>年齢</title>
            <text>79</text>
            <entry>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1"/>
                <code code="Z1110003"
                  codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                  codeSystemName="JED" displayName="Age" />
                <value xsi:type="PQ" value="79" unit="a"/>
              </observation>
            </entry>
          </section>
        </component>
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>

```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
患者背景情報(上部)セクション
*****
-->
    <component>
        <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2"/>
            <code code="11200000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                codeSystemName="JED" displayName="Patient Background
                Information (upper endoscopy)"/>
            <title>患者背景情報(上部)</title>
            <component>
                <section>
                    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2"/>
                    <code code="Z1210002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                        codeSystemName="JED" displayName="ASA Physical Status
                        Classification"/>
                    <title>ASA Grade</title>
                    <text>1:大きな問題はない</text>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2"/>
                            <code code="Z1210002"
                                codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                                displayName="ASA Physical Status Classification"/>
                            <value xsi:type="CD" code="Z1220011"
                                codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
                        </observation>
                    </entry>
                </section>
            </component>
        </component>
        <component>
            <section>
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"/>
                <code code="Z1210003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    codeSystemName="JED" displayName="Antithrombotic
                    Agents"/>
                <title>抗血栓薬</title>
                <text>
                    <table>

```

```
| 抗血栓薬 | 休薬期間 | 置換 |
| --- | --- | --- |
| ワルファリン | 休薬なし |  |
| チエノピリジン | 休薬なし |  |


</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
    <code code="Z1210003"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Antithrombotic Agents"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1220024"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <entryRelationship typeCode="COMP">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId
          root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
        <code code="Z1Z30001"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1Z40001"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
    <code code="Z1210003"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Antithrombotic Agents"/>

```

```

        <value xsi:type="CD" code="Z1220022"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId
                    root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
                <code code="Z1Z30002"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
                <value xsi:type="CD" code="Z1Z40001"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4"/>
        <code code="Z1210004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Smoker/Non-smoker"/>
        <title>喫煙</title>
        <text>非喫煙者</text>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4"/>
            <code code="Z1210004"
                codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                displayName="Smoker/Non- smoker" />
            <value xsi:type="CD" code="Z1220033"
                codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5"/>
        <code code="Z1210005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Drinking History and
            Condition"/>
        <title>飲酒</title>
        <text>機会飲酒者</text>
    <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5"/>
            <code code="Z1210005"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Drinking History and Condition"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1220043"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.6"/>
        <code code="Z1210006" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Family History of
            Malignant Tumor (Parents, Brother/Sister/Biological Child)"/>
        <title>悪性腫瘍家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)</title>
        <text>なし</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.6"/>
                <code code="Z1210006"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Family History of Malignant Tumor
                    (Parents, Brother/Sister/Biological Child)"/>
                <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8"/>
        <code code="Z1210008" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Previous History of
            Other Organ Cancer"/>
        <title>他臓器癌歴</title>
        <text>なし</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8"/>
                <code code="Z1210008"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Previous History of Other Organ
                    Cancer"/>
                <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>

```

```

        </entry>
      </section>
    </component>
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9"/>
      <code code="Z1210009" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        codeSystemName="JED" displayName="Atrophy Degree
        (Kimura-Takemoto Classification)"/>
      <title>萎縮度(木村竹本分類)</title>
      <text>C-0</text>
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.9"/>
          <code code="Z1210009"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Atrophy Degree (Kimura-Takemoto
            Classification)"/>
          <value xsi:type="CD" code="Z1220051"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10"/>
    <code code="Z1210010" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Helicobacter Pylori
      and Infection State"/>
    <title>ヘリコバクター・ピロリ感染状態</title>
    <text>陰性</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.10"/>
        <code code="Z1210010"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Helicobacter Pylori and Infection
          State"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220074"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</section>
</component>

```

```

<!--
*****
依頼情報(上部)セクション
*****
-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3"/>
    <code code="11300000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Information to Be Requested
      (upper endoscopy)"/>
    <title>依頼情報(上部)</title>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.1"/>
        <code code="Z1310001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="Procedure Urgency"/>
        <title>予定性</title>
        <text>予定</text>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.1"/>
            <code code="Z1310001"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
              displayName="Procedure Urgency"/>
            <value xsi:type="CD" code="Z1320001"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"/>
        <code code="Z1310002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="Patient Type"/>
        <title>外来・入院</title>
        <text>外来</text>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2"/>
            <code code="Z1310002"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
              displayName="Patient Type"/>
            <value xsi:type="CD" code="Z1320011"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </section>
</component>

```



```

        </entry>
      </section>
    </component>
  </component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z1310003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Purpose of
      Examination"/>
    <title>検査目的</title>
    <text>胃癌以外の経過観察</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3"
          extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="11310001"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Purpose of Examination (upper
          endoscopy)"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10301"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1">
          <originalText>胃癌以外の経過観察</originalText>
        </value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
検査時情報(上部)セクション
*****
-->
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4"/>
      <code code="11400000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        codeSystemName="JED" displayName="Examination Information
        (upper endoscopy)"/>
      <title>検査時情報(上部)</title>
      <component>
        <section>
          <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1"/>
          <code code="Z1410001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Insertion Route"/>

```

```

<title>挿入経路</title>
<text>経口</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.1"/>
    <code code="11410001"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Insertion Route"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1420001"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"/>
    <code code="Z1410002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Vender Model Name"/>
    <title>スコープ機種名</title>
    <text>GIF-H290Z</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2"/>
        <code code="Z1410002"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Vender Model Name"/>
        <participant typeCode="DEV">
          <participantRole classCode="MANU">
            <templateId
              root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2.1"/>
            <playingDevice>
              <code code="4953170363702"
                displayName="Scope JAN Code"
                codeSystem="1.2.392.200250.2.2.8"/>
              <manufacturerModelName>GIF-
                H290Z</manufacturerModelName>
            </playingDevice>
          </participantRole>
        </participant>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3"/>

```

```

<code code="Z1410003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
  codeSystemName="JED" displayName="Status of Use of
  Antispasmodic Agents"/>
<title>鎮痙剤使用</title>
<text>なし</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3"/>
    <code code="Z1410003"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Status of Use of Antispasmodic
      Agents"/>
    <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z1410004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED"
      displayName="Sedation/Analgesia/Anesthesia"/>
    <title>鎮静・鎮痛・麻酔</title>
    <text>BZD</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4"
          extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z1410004"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Sedation/Analgesia/Anesthesia"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1420021"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5"/>
    <code code="Z1410005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Type of Air/Gas"/>
    <title>送気</title>
    <text>空気</text>
  </section>
</component>

```

```

    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5"/>
        <code code="Z1410005"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Type of Air/Gas"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1420032"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"/>
    <code code="Z1410021" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Names or the number
      of Endoscopy Nurses and Technicians"/>
    <title>内視鏡看護師・技師名</title>
    <text>テスト 看護師1、テスト 看護師2</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17"/>
        <code code="Z1410021"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Names or the number of Endoscopy
          Nurses and Technicians"/>
        <text>テスト 看護師1、テスト 看護師2</text>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
偶発症情報(上部)セクション
*****
-->
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6"/>
      <code code="11600000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        codeSystemName="JED" displayName=" Adverse Events Information
        (upper endoscopy)"/>
      <title>偶発症情報(上部)</title>
    </section>
  </component>

```

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"/>
  <code code="Z1610001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED" displayName="Adverse Events during
    Procedure"/>
  <title>手技中偶発症</title>
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>手技中偶発症(上部)</th>
          <th>対応</th>
          <th>転帰</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>なし</td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1"/>
      <code code="11610001"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Adverse Events during Procedure
        (upper endoscopy)"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.2"/>
    <code code="Z1610002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Adverse Events after
      Procedure"/>
    <title>手技後偶発症</title>
    <text>
      <table>
        <thead>

```

```

        <tr>
            <th>手技後偶発症(上部)</th>
            <th>対応</th>
            <th>転帰</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>なし</td>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.2"/>
        <code code="11610002"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Adverse Events after Procedure (upper
            endoscopy)"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
臓器別診断セクション
*****
-->
    <component>
        <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.7"/>
            <code code="1A000000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                codeSystemName="JED" displayName="Comprehensive Diagnosis
                (upper endoscopy)"/>
            <title>総合診断(上部)</title>
            <component>
                <section>
                    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
                    <code code="ZAB00000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                        codeSystemName="JED" displayName="Esophagus Diagnosis"/>

```

```

<title>食道診断</title>
<text>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>質的診断</th>
        <th>部位</th>
        <th>存在所見</th>
        <th>処置</th>
        <th>デバイス</th>
        <th>病理組織診断</th>
        <th>コメント</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>食道裂孔ヘルニア 滑脱型</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2B30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2B32104"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
    <code code="ZAC00000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Stomach Diagnosis"/>
    <title>胃診断</title>
    <text>
      <table>

```

```

        <thead>
          <tr>
            <th>質的診断</th>
            <th>部位</th>
            <th>存在所見</th>
            <th>処置</th>
            <th>デバイス</th>
            <th>病理組織診断</th>
            <th>コメント</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>異常所見なし</td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>潰瘍瘢痕は目立たない。</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z2C30000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z2Z30001"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
    <code code="ZAD00000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Duodenum Diagnosis"/>
    <title>十二指腸診断</title>
    <text>
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>質的診断</th>

```



```

        <th>部位</th>
        <th>存在所見</th>
        <th>処置</th>
        <th>デバイス</th>
        <th>病理組織診断</th>
        <th>コメント</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>異常所見なし</td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>潰瘍/瘢痕は目立たない。</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2D30000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2Z30001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

【下部治療 1】

患者 ID:1000000011	入外区分:入院
患者名:テスト 患者61	依頼科:消化器科内科
患者名(カナ):(テスト カンザ ャ 61)	依頼医:テスト 医師3
性別:男	検査日:2019/02/04
生年月日:1949/05/24	検査種別:下部内視鏡検査
検査時年齢:69	主実施医:テスト 医師50

	副実施医:テスト 医師51 テスト 医師52 テスト 医師53
【大腸】 部位:上行結腸 AV から 65cm 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 5mm 質的診断:腺腫 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P1 一括切除、病変番号(#A) 部位:上行結腸 AV から 61cm 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm 質的診断:腺腫 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P2 クリップ1個、病変番号(#B) コメント:2分経っても oozing が続いたためシュアクリップで止血。 部位:横行結腸 中部 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm 質的診断:腺腫 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P3 病変番号(#C) 部位:横行結腸 中部 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm 質的診断:鋸歯状病変 hyperplastic polyp、疑い 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P4 病変番号(#D) 部位:下行結腸 AV から 60cm 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 6mm 質的診断:腺腫 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P5 病変番号(#E) 部位:S状結腸 AV から 26cm 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 8mm 質的診断:腺腫 肉眼型:Is(無茎性) 処置:Cold Snare ポリペクトミー...P6 病変番号(#F) 部位:S状結腸 大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) ≤5mm 質的診断:鋸歯状病変 hyperplastic polyp 肉眼型:IIa(表面隆起型)	使用スコープ:CF-HQ290ZI 検査回数(生涯):非初回 ASA Grade:1:大きな問題はない 抗血栓薬:ワルファリン 休薬なし チエノピリジン 休薬なし 喫煙:非喫煙者 飲酒:非飲酒者 大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子):なし 他臓器癌:なし 腹部手術歴:なし 腸管前処置:Excellent 検査目的:内視鏡切除 鎮痙剤使用:グルカゴン 到達部位:盲腸 送気:CO2 画像強調観察:(光)デジタル法,拡大 挿入時間(分):5分 全施行時間(分):50分 内視鏡看護師・技師名:テスト 看護師1 テスト 看護師2 テスト 看護師5 テスト 技師1 手技中偶発症:なし

大きさ・周在性 :なし 質的診断:痔核 全体コメント :ワーファリン継続で施行	
-----------------------------------------------	--

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="CDA.xsl"?>

<!--

タイトル:JED 内視鏡検査レポートサンプル【下部治療1】

ファイル名:CDA_Sample_Code_JED_下部治療1.xml

作成者:JAHIS 内視鏡部門システム専門委員会

最終更新日:2021-02-XX

患者ID:1000000011

患者名:テスト 患者61

患者名(カナ):(テスト カジヤ 61)

性別:男

生年月日:1949/05/24

検査時年齢:69

入外区分:入院

依頼科:消化器科内科

依頼医:テスト 医師3

検査日:2019/02/04

検査種別:下部内視鏡検査

主実施医:テスト医師50

副実施医:テスト医師51、テスト医師52、テスト医師53

[大腸]

部位:上行結腸 AV から 65cm

大きさ・周在性 :内視鏡的長径(最大径) 5mm

質的診断:腺腫

肉眼型:Is(無茎性)

処置:Cold Snare ポリペクトミー...P1 一括切除、病変番号(#A)

部位:上行結腸 AV から 61cm

大きさ・周在性 :内視鏡的長径(最大径) 4mm

質的診断:腺腫

肉眼型:Is(無茎性)

処置:Cold Snare ポリペクトミー...P2 クリップ 1個、病変番号(#B)

コメント:2分経っても oozing が続いたためシュアクリップで止血。

部位:横行結腸 中部

大きさ・周在性 :内視鏡的長径(最大径) 4mm

質的診断:腺腫

肉眼型:Is(無茎性)

処置:Cold Snare ポリペクトミー...P3 病変番号(#C)

部位:横行結腸 中部

大きさ・周在性 :内視鏡的長径(最大径) 4mm

質的診断:鋸歯状病変 hyperplastic polyp、疑い

肉眼型:Is(無茎性)

処置:Cold Snare ポリペクトミー...P4 病変番号(#D)

部位:下行結腸 AV から 60cm

大きさ・周在性 : 内視鏡的長径(最大径) 6mm
質的診断: 腺腫
肉眼型: Is(無茎性)
処置: Cold Snare ポリペクトミー...P5 病変番号(#E)
部位: S 状結腸 AV から 26cm
大きさ・周在性 : 内視鏡的長径(最大径) 8mm
質的診断: 腺腫
肉眼型: Is(無茎性)
処置: Cold Snare ポリペクトミー...P6 病変番号(#F)
部位: S 状結腸
大きさ・周在性 : 内視鏡的長径(最大径) <=5mm
質的診断: 鋸歯状病変 hyperplastic polyp
肉眼型: IIa(表面隆起型)
大きさ・周在性 : なし
質的診断: 痔核
全体コメント : ワーファリン継続で施行

使用スコープ : CF-HQ290ZI
検査回数(生涯) : 非初回
ASA Grade: 1: 大きな問題はない
抗血栓薬: ワルファリン 休薬なし、チエノピリジン 休薬なし
喫煙: 非喫煙者
飲酒: 非飲酒者
大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子) : なし
他臓器癌: なし
腹部手術歴: なし
腸管前処置: Excellent
検査目的: 内視鏡切除
鎮痙剤使用: グルカゴン
鎮静・鎮痛・麻酔: なし
到達部位: 盲腸
送気: CO2
画像強調観察: (光)デジタル法, 拡大
挿入時間(分): 5 分
全施行時間(分): 50 分
内視鏡看護師・技師名: テスト 看護師1、テスト 看護師2、テスト 看護師5、テスト 技師1
手技中偶発症: なし

-->

<!--

JED 内視鏡検査レポートヘッダ部

-->

```
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd">
  <realmCode code="JP"/>
```

```

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<!-- JAHIS 診療文書構造化記述規約(共通編) Ver.2.0 で定義されたヘッダのテンプレート ID(ドキュメント
レベル) -->
<templateId root="1.2.392.200270.3.2.1.1.1"/>
<!-- 本規約で定義した下部内視鏡検査レポートのドキュメントレベルのテンプレート ID -->
<templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2" extension="2026-XX-XX"/>
<id extension="A1120190204121530" root="1.2.392.200250.2.2.1.9312345678"/>
<code code="18746-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"
  displayName="下部消化管内視鏡報告書"/>
<title>JAHIS 病院下部内視鏡検査レポート</title>
<effectiveTime value="20190204163018+0900"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="ja-JP"/>
<versionNumber value="1"/>
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id extension="1000000011" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr use="HP">
      <streetAddressLine>虎ノ門7丁目19番9</streetAddressLine>
      <city>港区</city>
      <state>東京都</state>
      <postalCode>105-0001</postalCode>
      <country>JP</country>
    </addr>
    <telecom value="tel:03-3506-8010" use="HP"/>
    <patient>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>患者 61</given>
      </name>
      <name use="SYL">
        <family>テスト</family>
        <given>カンジャ 61</given>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"
        displayName="男性"/>
      <birthTime value="19490524"/>
    </patient>
    <providerOrganization>
      <id root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
      <name>JAHIS 病院</name>
      <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
      <addr use="WP">
        <streetAddressLine>新橋7丁目5番5号</streetAddressLine>
        <city>港区</city>
        <state>東京都</state>
        <postalCode>105-0004</postalCode>
      </addr>
    </providerOrganization>
  </patientRole>
</recordTarget>

```

```

        <country>JP</country>
    </addr>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>
<!-- 作成者 -->
<author>
    <time value="20190204163018+0900"/>
    <assignedAuthor>
        <id extension="GM000050" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
        <addr use="WP">
            <streetAddressLine>新橋7丁目5番5号</streetAddressLine>
            <city>港区</city>
            <state>東京都</state>
            <postalCode>105-0004</postalCode>
            <country>JP</country>
        </addr>
        <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
        <assignedPerson>
            <name use="IDE">
                <family>テスト</family>
                <given>医師 50</given>
            </name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
<!-- 保管組織 -->
<custodian>
    <assignedCustodian>
        <representedCustodianOrganization>
            <id extension="HP000001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
            <name>JAHIS 病院</name>
            <telecom use="WP" value="tel: 03-3506-8070"/>
            <addr use="WP">
                <streetAddressLine>新橋7丁目5番5号</streetAddressLine>
                <city>港区</city>
                <state>東京都</state>
                <postalCode>105-0004</postalCode>
                <country>JP</country>
            </addr>
        </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 受取人(依頼人) -->
<informationRecipient>
    <intendedRecipient>
        <id extension="GM000003" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>

```

```

    <informationRecipient>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 3</given>
      </name>
    </informationRecipient>
    <receivedOrganization>
      <name>消化器科内科</name>
    </receivedOrganization>
  </intendedRecipient>
</informationRecipient>
<!-- 法的文書承認者 -->
<legalAuthenticator>
  <time value="20190101101530+0900"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000050" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr use="WP">
      <streetAddressLine>新橋 7 丁目 5 番 5 号</streetAddressLine>
      <city>港区</city>
      <state>東京都</state>
      <postalCode>105-0004</postalCode>
      <country>JP</country>
    </addr>
    <telecom use="WP" value="tel:03-3506-8070"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 50</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
<!-- オーダ情報 -->
<inFulfillmentOf>
  <order>
    <id extension="201901101030001" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
  </order>
</inFulfillmentOf>
<!-- 検査・診療等行為 -->
<documentationOf typeCode="DOC">
  <serviceEvent classCode="ACT">
    <id root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901.201901011013001"/>
    <!-- DICOM study instance UID など -->
    <effectiveTime>
      <low value="20190204121530"/>
    </effectiveTime>
    <!-- 検査開始時間 -->
  </serviceEvent>
</documentationOf>

```

```

    <high value="20190204163018"/>
    <!-- 検査終了時間 -->
</effectiveTime>
<performer typeCode="PRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000050" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 50</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000051" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 51</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000052" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 52</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
<performer typeCode="SPRF">
  <assignedEntity>
    <id extension="GM000053" root="1.2.392.200250.3.3.1.12345678901"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>

```



```

    <assignedPerson>
      <name use="IDE">
        <family>テスト</family>
        <given>医師 53</given>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedEntity>
</performer>
</serviceEvent>
</documentationOf>
<!--
*****
JED 内視鏡検査レポートボディ部
*****
-->
<component>
  <structuredBody>
    <!--
    *****
    患者基本情報(JED)セクション
    *****
    -->
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
        <code code="Z1100000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="Patient's Basic
          Information(JED)" />
        <title>患者基本情報(JED)</title>
        <component>
          <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"/>
            <code code="Z1110003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
              codeSystemName="JED" displayName="Age" />
            <title>年齢</title>
            <text>69</text>
            <entry>
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.1.1"/>
                <code code="Z1110003"
                  codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                  codeSystemName="JED" displayName="Age" />
                <value xsi:type="PQ" value="69" unit="a"/>
              </observation>
            </entry>
          </section>
        </component>

```

```

</section>
</component>
<!--
*****
患者背景情報(下部)セクション
*****
-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2"/>
    <code code="Z1200000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Patient Background
      Information (colonoscopy)"/>
    <title>患者背景情報(下部)</title>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1"/>
        <code code="Z1210001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="Number of
          Colonoscopies/Enteroscopies (Lifetime)"/>
        <title>検査回数(生涯)</title>
        <text>非初回</text>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.1"/>
            <code code="Z1210001"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
              displayName="Number of Colonoscopies/Enteroscopies
              (Lifetime)"/>
            <value xsi:type="CD" code="Z1220002"
              codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.2"/>
        <code code="Z1210002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          codeSystemName="JED" displayName="ASA Physical Status
          Classification"/>
        <title>ASA Grade</title>
        <text>1:大きな問題はない</text>
        <entry>
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.2"/>
            <code code="Z1210002"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="ASA Physical Status Classification"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220011"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"/>
        <code code="Z1210003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Antithrombotic
            Agents"/>
        <title>抗血栓薬</title>
        <text>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>抗血栓薬</th>
                        <th>休薬期間</th>
                        <th>置換</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>ワルファリン</td>
                        <td>休薬なし</td>
                        <td></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>チエノピリジン</td>
                        <td>休薬なし</td>
                        <td></td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </text>
    </entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
        <code code="Z1210003"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Antithrombotic Agents"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220024"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <entryRelationship typeCode="COMP">

```

```

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId
            root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
          <code code="Z1Z30001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          <value xsi:type="CD" code="Z1Z40001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3"/>
      <code code="Z1210003"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Antithrombotic Agents"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z1220022"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId
            root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.3.1"/>
          <code code="Z1Z30002"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
          <value xsi:type="CD" code="Z1Z40001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        </observation>
      </entryRelationship>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.4"/>
    <code code="Z1210004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Smoker/Non-smoker"/>
    <title>喫煙</title>
    <text>非喫煙者</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.4"/>
        <code code="Z1210004"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Smoker/Non-smoker" />
        <value xsi:type="CD" code="Z1220033"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.5"/>
    <code code="Z1210005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Drinking History and
      Condition"/>
    <title>飲酒</title>
    <text>非飲酒者</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.5"/>
        <code code="Z1210005"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Drinking History and Condition"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1220044"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.7"/>
    <code code="Z1210007" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Family History of
      Colon Cancer (Parents, Brother/Sister/Biological Child)"/>
    <title>大腸癌家族歴(両親、兄弟・姉妹・実子)</title>
    <text>なし</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.7"/>
        <code code="Z1210007"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Family History of Colon Cancer
          (Parents, Brother/Sister/Biological Child)"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</component>

```

```

<section>
  <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.8"/>
  <code code="Z1210008" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
    codeSystemName="JED" displayName="Previous History of
    Other Organ Cancer"/>
  <title>他臓器癌歴</title>
  <text>なし</text>
  <entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.8"/>
      <code code="Z1210008"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Previous History of Other Organ
        Cancer"/>
      <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
  </entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.11"/>
    <code code="Z1210011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Previous Record of
      Abdominal Surgeries"/>
    <title>腹部手術歴</title>
    <text>なし</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.2.11"/>
        <code code="Z1210011"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Previous Record of Abdominal
          Surgeries"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
依頼情報(下部)セクション
*****

```

-->

```
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3"/>
    <code code="21300000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Information to Be Requested
      (colonoscopy)"/>
    <title>依頼情報(下部)</title>
  </section>
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"/>
      <code code="Z1310002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        codeSystemName="JED" displayName="Patient Type"/>
      <title>外来・入院</title>
      <text>入院</text>
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.2"/>
          <code code="Z1310002"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Patient Type"/>
          <value xsi:type="CD" code="Z1320012"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.3"
        extension="2026-XX-XX"/>
      <code code="Z1310003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        codeSystemName="JED" displayName="Purpose of
        Examination"/>
      <title>検査目的</title>
      <text>内視鏡切除</text>
      <entry>
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.3.3"
            extension="2026-XX-XX"/>
          <code code="21310001"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Purpose of Examination (colonoscopy)"/>
          <value xsi:type="CD" code="Z1320030"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1">
            <originalText>内視鏡切除</originalText>
          </value>
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
</component>
```

```

        </observation>
    </entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
検査時情報(下部)セクション
*****
-->
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"/>
        <code code="21400000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Examination Information
            (colonoscopy)"/>
        <title>検査時情報(下部)</title>
        <component>
            <section>
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"/>
                <code code="Z1410002" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    codeSystemName="JED" displayName="Vender Model Name"/>
                <title>スコープ機種名</title>
                <text>CF-HQ290ZI</text>
                <entry>
                    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2"/>
                        <code code="Z1410002"
                            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                            displayName="Vender Model Name"/>
                        <participant typeCode="DEV">
                            <participantRole classCode="MANU">
                                <templateId
                                    root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.2.1"/>
                                <playingDevice>
                                    <code code="4953170363764"
                                        displayName="Scope JAN Code"
                                        codeSystem="1.2.392.200250.2.2.8"/>
                                    <manufacturerModelName>CF-
                                        HQ290ZI</manufacturerModelName>
                                </playingDevice>
                            </participantRole>
                        </participant>
                    </observation>
                </entry>
            </section>
        </component>
    </section>
</component>

```



```

</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3"/>
    <code code="Z1410003" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Status of Use of
      Antispasmodic Agents"/>
    <title>鎮痙剤使用</title>
    <text>グルカゴン</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.3"/>
        <code code="Z1410003"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Status of Use of Antispasmodic
          Agents"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1420013"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z1410004" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED"
      displayName="Sedation/Analgesia/Anesthesia"/>
    <title>鎮静・鎮痛・麻酔</title>
    <text>なし</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.4"
          extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z1410004"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Sedation/Analgesia/Anesthesia"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5"/>

```

```

<code code="Z1410005" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
  codeSystemName="JED" displayName="Type of Air/Gas"/>
<title>送気</title>
<text>CO2</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.5"/>
    <code code="Z1410005"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Type of Air/Gas"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z1420031"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.7"/>
    <code code="Z1410007" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Reached Area"/>
    <title>到達部位</title>
    <text>盲腸</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.7"/>
        <code code="Z1410003"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Reached Area"/>
        <value xsi:type="CD" code="ZZL10000"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.8"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z1410008" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      codeSystemName="JED" displayName="Image-Enhanced
      Endoscopy"/>
    <title>画像強調観察</title>
    <text>(光)デジタル法、拡大</text>
    <entry>
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.8"

```

```

        extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z1410004"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Image-Enhanced Endoscopy
            (colonoscopy)"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1420046"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z1420047"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z1410011" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Insertion Time (min)"/>
        <title>挿入時間(分)</title>
        <text>5</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.9"
                    extension="2026-XX-XX"/>
                <code code="Z1410011"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Insertion Time (min)"/>
                <value xsi:type="PQ" value="5" unit="min"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z1410015" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Total Procedure Time
            (min)"/>
        <title>全施行時間(分)</title>
        <text>50</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.13"
                    extension="2026-XX-XX"/>
                <code code="Z1410015"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Total Procedure Time (min)"/>
        < value xsi:type="PQ" value="50" unit="min"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>

<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.14"/>
        <code code="Z1410016" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Bowel Preparation"/>
        <title>腸管前処置</title>
        <text>Excellent</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.14"/>
                <code code="21410005"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Bowel Preparation"/>
                <value xsi:type="CD" code="ZZZ10501"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
            </observation>
        </entry>
    </section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"/>
        <code code="Z1410021" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            codeSystemName="JED" displayName="Names or the number
            of Endoscopy Nurses and Technicians"/>
        <title>内視鏡看護師・技師名</title>
        <text>テスト 看護師1、テスト 看護師2、テスト 看護師5、テスト 技師1</text>
        <entry>
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.4.17"/>
                <code code="Z1410021"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Names or the number of Endoscopy
                    Nurses and Technicians"/>
                <text>テスト 看護師1、テスト 看護師2、テスト 看護師5、テスト 技師1
                    </text>
            </observation>
        </entry>
    </section>

```

```

        </component>
    </section>
</component>

<!--
*****
偶発症情報(下部)セクション
*****
-->

    <component>
        <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6"/>
            <code code="21600000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                codeSystemName="JED" displayName=" Adverse Events Information
                (colonoscopy)"/>
            <title>偶発症情報(下部)</title>
            <component>
                <section>
                    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"/>
                    <code code="Z1610001" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                        codeSystemName="JED" displayName=" Adverse Events during
                        Procedure"/>
                    <title>手技中偶発症</title>
                    <text>
                        <table>
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>手技中偶発症(上部)</th>
                                    <th>対応</th>
                                    <th>転帰</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td>なし</td>
                                    <td></td>
                                    <td></td>
                                </tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </text>
                    <entry>
                        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.6.1"/>
                            <code code="11610001"
                                codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                                displayName=" Adverse Events during Procedure
                                (upper endoscopy)"/>

```

```

        <value xsi:type="CD" code="ZZZ10202"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"/>
    </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
<!--
*****
臓器別診断セクション
*****
-->
    <component>
        <section>
            <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.7"/>
            <code code="2A000000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                codeSystemName="JED" displayName="Comprehensive Diagnosis
                (colonoscopy)"/>
            <title>総合診断(下部)</title>
            <text>ワーファリン継続で施行</text>
            <component>
                <section>
                    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.7.1"/>
                    <code code="ZAL00000" codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                        codeSystemName="JED" displayName="Colon Diagnosis"/>
                    <title>大腸診断</title>
                    <text>
                        <table>
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>質的診断</th>
                                    <th>部位</th>
                                    <th>存在所見</th>
                                    <th>処置</th>
                                    <th>デバイス</th>
                                    <th>病理組織診断</th>
                                    <th>コメント</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <tr>
                                    <td>腺腫</td>
                                    <td>上行結腸 AV から 65cm</td>
                                    <td>大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 5mm、肉眼型:
                                        Is(無茎性)</td>
                                    <td>Cold Snare ポリペクトミー...P1 一括切除、病変番号

```

(#A)	

腺腫	上行結腸 AV から 61cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型: Is(無莖性)	Cold Snare ポリペクトミー...P2 クリップ 1個、病変番号(#B)
			2 分経っても oozing が続くためシュアクリップで止血

腺腫	横行結腸 中部	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型: Is(無莖性)	Cold Snare ポリペクトミー...P3 病変番号(#C)

腺腫	横行結腸 中部	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型: Is(無莖性)	Cold Snare ポリペクトミー...P4 病変番号(#D)

腺腫	下行結腸 AV から 60cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 6mm、肉眼型: Is(無莖性)	Cold Snare ポリペクトミー...P5 病変番号(#E)

```

<tr>
  <td>腺腫</td>
  <td>S 状結腸 AV から 26cm</td>
  <td>大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 8mm、肉眼型:
  Is(無莖性)</td>
  <td>Cold Snare ポリペクトミー...P6 病変番号(#F)</td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td>鋸歯状病変 hyperplastic polyp</td>
  <td>S 状結腸</td>
  <td>大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 5mm、肉眼型:
  IIa(表面隆起型)</td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
<tr>
  <td>痔核</td>
  <td></td>
  <td>大きさ・周在性:なし</td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</text>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2L30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Characterization"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L30301"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Adenoma/Early Colorectal Cancer"/>
    <targetSiteCode code="Z2L21000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Ascending Colon" />
    <entryRelationship typeCode="RSON"
      inversionInd="true">

```



```

    <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
      <templateId
        root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
      <code code="ZDL00000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Endoscopic Procedure"/>
      <methodCode code="ZZZ05111"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
    </procedure>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="SPRT">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId
        root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
      <code code="Z2L20000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Findings"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Size/Major Axis">
        <originalText>5</originalText>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Is(p)"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2L30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Characterization"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L30301"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Adenoma/Early Colorectal Cancer"/>
    <targetSiteCode code="ZZL21000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Ascending Colon" />
    <entryRelationship typeCode="RSON"
      inversionInd="true">
      <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
        <templateId

```

```

        root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
      <code code="ZDL00000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Endoscopic Procedure"/>
      <methodCode code="ZZZ05111"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
    </procedure>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="SPRT">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId
        root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
      <code code="Z2L20000"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Findings"/>
      <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Size/Major Axis">
        <originalText>4</originalText>
      </value>
      <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Is(p)"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2L30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Characterization"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L30301"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Adenoma/Early Colorectal Cancer"/>
    <targetSiteCode code="ZZL23000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Transverse Colon" />
    <entryRelationship typeCode="RSON"
      inversionInd="true">
      <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
        <templateId
          root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
        <code code="ZDL00000"

```

```

        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Endoscopic Procedure"/>
    <methodCode code="ZZZ05111"
        codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
        displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
    </procedure>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId
            root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
        <code code="Z2L20000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Findings"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Size/Major Axis">
            <originalText>4</originalText>
        </value>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Is(p)"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2L30000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Characterization"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L30401"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Serrated Polyp/HP"/>
        <targetSiteCode code="ZZL23000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Transverse Colon" />
        <entryRelationship typeCode="RSON"
            inversionInd="true">
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <templateId
                    root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
                <code code="ZDL00000"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Endoscopic Procedure"/>
            </procedure>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

```

```

        <methodCode code="ZZZ05111"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
    </procedure>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId
            root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
        <code code="Z2L20000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Findings"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Size/Major Axis">
            <originalText>4</originalText>
        </value>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Is(p)"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2L30000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Characterization"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L30301"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Adenoma/Early Colorectal Cancer"/>
        <targetSiteCode code="ZZL25000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Descending Colon" />
        <entryRelationship typeCode="RSON"
            inversionInd="true">
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <templateId
                    root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
                <code code="ZDL00000"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Endoscopic Procedure"/>
                <methodCode code="ZZZ05111"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"

```

```

        displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
    </procedure>
</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId
            root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
        <code code="Z2L20000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Findings"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Size/Major Axis">
            <originalText>6</originalText>
        </value>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Is(p)"/>
    </observation>
</entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
            extension="2026-XX-XX"/>
        <code code="Z2L30000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Characterization"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L30301"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Adenoma/Early Colorectal Cancer"/>
        <targetSiteCode code="ZZL26000"
            codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
            displayName="Sigmoid Colon" />
        <entryRelationship typeCode="RSON"
            inversionInd="true">
            <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                <templateId
                    root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.12"/>
                <code code="ZDL00000"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Endoscopic Procedure"/>
                <methodCode code="ZZZ05111"
                    codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
                    displayName="Cold Snare Polypectomy"/>
            </procedure>
        </entryRelationship>
    </observation>
</entry>

```

```

</entryRelationship>
<entryRelationship typeCode="SPRT">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId
      root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
    <code code="Z2L20000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Findings"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Size/Major Axis">
      <originalText>8</originalText>
    </value>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L20301"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Is(p)"/>
    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2L30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Characterization"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L30401"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Serrated Polyp/HP"/>
    <targetSiteCode code="Z2L26000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Sigmoid Colon" />
    <entryRelationship typeCode="SPRT">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <templateId
          root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.19"/>
        <code code="Z2L20000"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Findings"/>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20800"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
          displayName="Size/Major Axis">
          <originalText>5</originalText>
        </value>
        <value xsi:type="CD" code="Z2L20305"
          codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"

```

```

        displayName="IIa"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry>
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.392.200270.3.2.2.1.3.7.1.11"
      extension="2026-XX-XX"/>
    <code code="Z2L30000"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Characterization"/>
    <value xsi:type="CD" code="Z2L34500"
      codeSystem="1.2.392.200270.4.1000.1"
      displayName="Hemorrhoid"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

付録 - 2. スキマトロン適合表

※本表、特に test 記述部は理解を助けるための例示であり、実装時には実装者の責任で実装環境にあわせて見直す必要あり。

共通編 ヘッダレベルテンプレート適合ルール:<rule context="cda:ClinicalDocument[cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.1.1.1']]">

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
0010	適用国	/ClinicalDocument/realmcode/@code は"JP"でなければならない	test="cda:realmCode[@code='JP']"	適用国(realmcode)が正しく記述されていません。
0020	準拠している CDA R2 規格を識別する	/ClinicalDocument/typeId/@root は "2.16.840.1.113883.1.3"でなければならない。 /ClinicalDocument/typeId/@extension は "POCD_HD000040"でなければならない。	test="cda:typeId[@root='2.16.840.1.113883.1.3'] and cda:typeId[@extension='POCD_HD000040']"	準拠している CDA R2 規格 (typeId)が正しく記述されていません。
0030	共通編ヘッダレベルテンプレート ID	/ClinicalDocument/templateId/@root は、値が "1.2.392.200270.3.2.1.1.1"のものが1つ存在しなければならない	test="count(cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.1.1.1'])=1"	JAHIS 共通編のテンプレート ID が正しく設定されていません。
0040	初版作成日時	/ClinicalDocument/effectiveTime/@value は年月日時分まで値が設定されていなければならない。	test="string-length (cda:effectiveTime//@value)=12"	初版作成日時(effectiveTime) が年月日時分で正しく記述されていません
0050	機密性コード 表 7-1 HL7 V3 定義表 機密性コード 参照	/ClinicalDocument/confidentialityCode/@code は"N"、 "R"、"V"のいずれかで、 /ClinicalDocument/confidentialityCode/@codeSystem は"2.16.840.1.113883.5.25"に設定されていなければならない。	test="cda:confidentialityCode[@code='N' or @code='R' or @code='V'] and cda:confidentialityCode [@codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25']"	機密性コード (confidentialityCode)が正しく記述されていません。
0060	使用言語	オプションなので指定しなくてもよいが、指定する場合は /ClinicalDocument/languageCode/@code は"ja-JP"でなければならない。	test="not(cda:languageCode) or cda:languageCode[@code='ja-JP']"	使用言語(languageCode)が 正しく記述されていません。
0110	患者性別 JED で要求されている項目のため必須	/ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/ administrativeGenderCode/@code は表 7-3 HL7 V3 定義 表のいずれかの値が設定されていなければならない、かつ /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/ administrativeGenderCode/@codeSystem は "2.16.840.1.113883.5.1"でなければならない。	test="cda:recordTarget/ cda:patientRole/cda:patient/ cda:administrativeGenderCode[@code='F' or @code='M' or @code='UN'] and cda:recordTarget/cda:patientRole/ cda:patient/cda:administrativeGenderCode [@codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1']"	性別が正しく記述されていませ ん。

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
0120	患者生年月日 JAHIS データ交換規約(共通編)と整合性を取るため存在する場合は必須	患者生年月日を記述する場合、 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/ birthTime/ @value は年月日の値が設定されている、もしくは 表 6-2 HL7 V3 定義表 nullFlavor 値(意識不明で患者の生年月日が不明の場合)のいずれかの値が設定されていない	test="not(cda:recordTarget/cda:patientRole/ cda:patient/cda:birthTime) or string- length(cda:recordTarget/ cda:patientRole/ cda:patient/cda:birthTime/@value) = 8 or cda:recordTarget/cda:patientRole/cda:patient/ cda:birthTime[@nullFlavor='NI' or @nullFlavor ='NA' or @nullFlavor ='UNK' or @nullFlavor ='NAV' or @nullFlavor ='MSK'] "	生年月日が正しく記述されてい ません
0130	保護者/後見人 共通編では関係コードを必須とする	guardian を記述する場合、 /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/ guardian/code が存在しなければならない。	test="not(cda:recordTarget/cda:patientRole/ cda:patient/cda:guardian) or count(cda:recordTarget/cda:patientRole /cda:patient/cda:guardian/cda:code)=1"	保護者/後見人の関係コードが記 述されていません。
0140	保護者/後見人 共通編では保護者/後見人の氏名を必須と する	guardian を記述する場合、 patientRole/patient/guardian/guardianPerson/name は"family"要素が必須で存在し、値が設定されていなければならない	test="not(cda:recordTarget/cda:patientRole/ cda:patient/cda:guardian) or cda:recordTarget/cda:patientRole/ cda:patient/cda:guardian[count(cda:guardianP erson)=1] and string-length (cda:recordTarget/cda:patientRole/cda:patient /cda:guardian/cda:guardianPerson/cda:name/ cda:family)!=0"	保護者/後見人の氏名が記述され ていません。 保護者/後見人の氏名を入力して ください。
0800	署名コード	文書記載責任者(authenticator)を記述する場合、 /ClinicalDocument/authenticator/signatureCode/ @code は"S"で、 /ClinicalDocument/authenticator/signatureCode/ @codeSystem は"2.16.840.1.113883.5.89"に設定されてい なければならない。	test="not(cda:authenticator/ cda:signatureCode) or cda:authenticator/ cda:signatureCode[@code='S'] and cda:authenticator/cda:signatureCode [@codeSystem='2.16.840.1.113883.5.89']"	署名コード(signatureCode)が 正しく記述されていません。
1110	検査日、検査開始/終了日時 JED で要求されている項目のため必須	/ClinicalDocument/documentaitionOf/serviceEvent/ effectiveTime に検査日もしくは検査開始/終了日時が設定されて いなければならない	test="cda:documentationOf/cda:serviceEvent/ cda:effectiveTime[count(cda:low)=1]"	検査日もしくは検査開始/終了日 時が記述されていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
1120	実施者 JED で要求されている主実施医の氏名を 必須とする	/ClinicalDocument/documentaitionOf/serviceEvent/ performer/@typeCode は値が"PPRF"のものが1 つ存在し、 /ClinicalDocument/documentaitionOf/serviceEvent/ performer/assignedEntity/assignedPerson/name の"family"要素に値が設定されていなければならない	test="cda:documentationOf/cda:serviceEvent [count(cda:performer[@typeCode='PPRF'])= 1]" and string-length (cda:cda: documentationOf/cda:serviceEvent/ cda:performer/cda:assignedEntity/cda:assigne dPerson/cda:name/cda:family)!=0"	主実施医の氏名が記述されてい ません。 主実施医の氏名を入力してくださ い。
1300	承諾のステータスコード	承諾(authorization)を記述する場合、 /ClinicalDocument/authorization/consent/statusCode/ @code は"completed"でなければならない。	test="not(cda:authorization) or cda:authorization/cda:consent/cda:statusCode [@code='completed']"	承諾のステータスコードが正しく 記述されていません。

上部内視鏡検査レポートドキュメントレベルテンプレート適合ルール:

<rule context="cda:ClinicalDocument[cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1']]">

Sch.	説明	スキマトロン条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
2031	上部内視鏡検査レポート ドキュメントレベルテンプレート ID	/ClinicalDocument/templateId/@root は、値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.1"のものが1つ存在しなければならない。	test="count(cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1'])=1"	上部内視鏡検査レポートのテンプレ ート ID が正しく設定されてい ません。
2032	上部内視鏡検査レポート 電子診療文書コード	/ClinicalDocument/code/@code は"18751-8"で、 /ClinicalDocument/code/@codeSystem は "2.16.840.1.113883.6.1"に設定されていなければならない。	test="cda:code[@code='18751-8'] and cda:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6. 1']"	上部内視鏡検査レポートの電子 診療文書コードが正しく設定され ていません。
1510	患者基本情報 年齢セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値 が"1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"である患者基本情報セクショ ンのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1"の年齢セクションが1つ存在 しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1']]/cda:c omponent[count(cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1']])=1]"	年齢が記述されていません
2210	患者背景情報(上部) 抗血栓薬セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値 が"1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2"である患者背景情報(上部) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"の抗血栓薬セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2']]/ cda:component[count(cda:section [cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2 .1.2.1.2.3']])=1]"	抗血栓薬が記述されていません
2220	患者背景情報(上部) 萎縮度(木村竹本分類)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2"である患者背景情報(上部) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.9"の萎縮度(木村竹本分類)セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.9']])=1]"	萎縮度(木村竹本分類)が記述さ れていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
2230	患者背景情報(上部) ヘリコバクター・ピロリ感染状態セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2"である患者背景情報(上部) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.10"のヘリコバクター・ピロリ感 染状態セクションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.10']])=1]"	ヘリコバクター・ピロリ感染状態 が記述されていません
2310	依頼情報(上部) 外来・入院セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3"である依頼情報(上部)セク ションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"の外来・入院セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.3']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 3.2']])=1]"	外来・入院が記述されていません
2410	検査時情報(上部) 機種名(スコープ機種名)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4"である検査時情報(上部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"の機種名(スコープ機種名)セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.2']])=1]"	機種名(スコープ機種名)が記述 されていません
2420	検査時情報(上部) 鎮静・鎮痛・麻酔セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4"である検査時情報(上部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"の鎮静・鎮痛・麻酔セクション が1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.4']])=1]"	鎮静・鎮痛・麻酔が記述されてい ません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
2430	検査時情報(上部) 内視鏡看護師・技師名セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4"である検査時情報(上部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"の内視鏡看護師・技師名セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.17']])=1]"	内視鏡看護師・技師名が記述され ていません
2510	偶発症情報(上部) 手技中偶発症セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6"である偶発症情報(上部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"の手技中偶発症セクションが 1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.101.6']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 6.1']])=1]"	手技中偶発症が記述されていま せん

下部内視鏡検査レポートドキュメントレベルテンプレート適合ルール:

<rule context="cda:ClinicalDocument[cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2']]">

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
3031	下部内視鏡検査レポート ドキュメントレベルテンプレート ID	/ClinicalDocument/templateId/@root は、値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2"のものが1つ存在しなければなら ない。	test="count(cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.2'])=1"	下部内視鏡検査レポートのテンプ レート ID が正しく設定されてい ません。
3032	下部内視鏡検査レポート 電子診療文書コード	/ClinicalDocument/code/@code は"18746-8"で、 /ClinicalDocument/code/@codeSystem は "2.16.840.1.113883.6.1"に設定されていなければならない。	test="cda:code[@code='18746-8'] and cda:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6. 1']"	下部内視鏡検査レポートの電子 診療文書コードが正しく設定され ていません。
1510	患者基本情報 年齢セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"である患者基本情報セクション のサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1"の年齢セクションが1つ存在 しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1']]/cda: component[count(cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1']])=1]"	年齢が記述されていません
3210	患者背景情報(下部) 検査回数(生涯)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2"である患者背景情報(下部) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.1"の抗血栓薬セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.1']])=1]"	検査回数(生涯)が記述されてい ません
3220	患者背景情報(下部) 抗血栓薬セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2"である患者背景情報(下部) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"の抗血栓薬セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.3']])=1]"	抗血栓薬が記述されていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
3310	依頼情報(下部) 外来・入院セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3"である依頼情報(下部)セク ションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"の外来・入院セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.3']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 3.2']]=1]"	外来・入院が記述されていません
3410	検査時情報(下部) 機種名(スコープ機種名)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"である検査時情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"の機種名(スコープ機種名)セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.2']]=1]"	機種名(スコープ機種名)が記述 されていません
3420	検査時情報(下部) 鎮痙剤使用セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"である検査時情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.3"の鎮痙剤使用セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.3']]=1]"	鎮痙剤使用が記述されていま せん
3430	検査時情報(下部) 鎮静・鎮痛・麻酔セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"である検査時情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"の鎮静・鎮痛・麻酔セクション が1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.4']]=1]"	鎮静・鎮痛・麻酔が記述されてい ません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
3440	検査時情報(下部) 挿入時間セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"である検査時情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9"の挿入時間セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.9']]=1]"	挿入時間が記述されていません
3450	検査時情報(下部) 内視鏡看護師・技師名セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4"である検査時情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"の内視鏡看護師・技師名セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.17']]=1]"	内視鏡看護師・技師名が記述され ていません
3510	偶発症情報(下部) 手技中偶発症セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6"である偶発症情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"の手技中偶発症セクションが 1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.102.6']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 6.1']]=1]"	手技中偶発症が記述されていま せん

小腸内視鏡検査レポートドキュメントレベルテンプレート適合ルール:

<rule context="cda:ClinicalDocument[cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3']]">

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
4031	小腸内視鏡検査レポート ドキュメントレベルテンプレート ID	/ClinicalDocument/templateId/@root は、値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3"のものが1つ存在しなければなら ない。	test="count(cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.3'])=1"	小腸内視鏡検査レポートのテンプレ ート ID が正しく設定されてい ません。
4032	小腸内視鏡検査レポート 電子診療文書コード	/ClinicalDocument/code/@code は"28018-0"で、 /ClinicalDocument/code/@codeSystem は "2.16.840.1.113883.6.1"に設定されていなければならない。	test="cda:code[@code='28018-0'] and cda:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6. 1']"	小腸内視鏡検査レポートの電子 診療文書コードが正しく設定され ていません。
1510	患者基本情報 年齢セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"である患者基本情報セクション のサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1"の年齢セクションが1つ存在 しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1']]/cda: component[count(cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1'])]=1]"	年齢が記述されていません
4210	患者背景情報(小腸) 抗血栓薬セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2"である患者背景情報(小腸) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"の抗血栓薬セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.3']]=1]"	抗血栓薬が記述されていません
4310	依頼情報(小腸) 外来・入院セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody /component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3"である依頼情報(小腸)セク ションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"の外来・入院セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.3']]/ cda:component[count(cda:section[cda :templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1 .3.2']]=1]"	外来・入院が記述されていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
4410	検査時情報(小腸) 挿入経路セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.1"の挿入経路セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.1']])=1]"	挿入経路が記述されていません
4420	検査時情報(小腸) 機種名(スコープ機種名)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"の機種名(スコープ機種名)セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.2']])=1]"	機種名(スコープ機種名)が記述 されていません
4430	検査時情報(小腸) 鎮静・鎮痛・麻酔セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"の鎮静・鎮痛・麻酔セクション が1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.4']])=1]"	鎮静・鎮痛・麻酔が記述されてい ません
4440	検査時情報(小腸) 送気セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.5"の送気セクションが1つ存在 しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.5']])=1]"	送気が記述されていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
4450	検査時情報(小腸) 挿入時間セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.9"の挿入時間セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.9']]=1]"	挿入時間が記述されていません
4460	検査時情報(小腸) 抜去時間セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.10"の抜去時間セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.10']]=1]"	抜去時間が記述されていません
4470	検査時情報(小腸) 内視鏡看護師・技師名セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4"である検査時情報(小腸)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"の内視鏡看護師・技師名セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.17']]=1]"	内視鏡看護師・技師名が記述され ていません
4510	偶発症情報(小腸) 手技中偶発症セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6"である偶発症情報(下部)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.1"の手技中偶発症セクションが 1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.103.6']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 6.1']]=1]"	手技中偶発症が記述されていま せん

ERCP 検査レポートドキュメントレベルテンプレート適合ルール:

<rule context="cda:ClinicalDocument[cda:templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4']]">

Sch.	説明	スキマトロン条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
5031	ERCP 検査レポート ドキュメントレベルテンプレート ID	/ClinicalDocument/templateId/@root は、値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4"のものが1つ存在しなければなら ない。	test="count(cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.1.4'])=1"	ERCP 検査レポートのテンプレ ート ID が正しく設定されていま せん。
5032	ERCP 検査レポート 電子診療文書コード	/ClinicalDocument/code/@code は"28016-4"で、 /ClinicalDocument/code/@codeSystem は "2.16.840.1.113883.6.1"に設定されていなければならない。	test="cda:code[@code='28016-4'] and cda:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6. 1']"	ERCP 検査レポートの電子診療 文書コードが正しく設定されてい ません。
1510	患者基本情報 年齢セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1"である患者基本情報セクション のサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1"の年齢セクションが1つ存在 しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1']]/cda: component[count(cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.1.1'])]=1]"	年齢が記述されていません
5210	患者背景情報(ERCP) 抗血栓薬セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2"である患者背景情報 (ERCP)セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.2.3"の抗血栓薬セクションが1つ 存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.2']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 2.3']]=1]"	抗血栓薬が記述されていません
5310	依頼情報(ERCP) 外来・入院セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3"である依頼情報(ERCP)セ クションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.3.2"の外来・入院セクションが1 つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.3']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 3.2']]=1]"	外来・入院が記述されていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
5410	検査時情報(ERCP) 機種名(スコープ機種名)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4"である検査時情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.2"の機種名(スコープ機種名)セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.2']]=1]"	機種名(スコープ機種名)が記述 されていません
5420	検査時情報(ERCP) 鎮静・鎮痛・麻酔セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4"である検査時情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.4"の鎮静・鎮痛・麻酔セクション が1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.4']]=1]"	鎮静・鎮痛・麻酔が記述されてい ません
5430	検査時情報(ERCP) 全施行時間セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4"である検査時情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.13"の全施行時間セクションが 1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.13']]=1]"	全施行時間が記述されていま せん
5440	検査時情報(ERCP) 内視鏡看護師・技師名セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4"である検査時情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.4.17"の内視鏡看護師・技師名セ クションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.4']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 4.17']]=1]"	内視鏡看護師・技師名が記述され ていません

Sch.	説明	スキマトロンの条件(日本語記述)	test 記述	Assert メッセージ
5510	検査後情報(ERCP) 翌日の amylase 値セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5"である検査後情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.5.1"の翌日の amylase 値セク ションが1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.5']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 5.1']])=1]"	翌日の amylase 値が記述され ていません
5610	偶発症情報(ERCP) 偶発症(ERCP)セクション	/ClinicalDocument/component/structuredBody/ component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6"である偶発症情報(ERCP) セクションのサブセクションとして、 component/section/templateId/@root の値が "1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1.6.3"の偶発症(ERCP)セクション が1つ存在しなければならない。	test="cda:component/cda:structuredBody/ cda:component/cda:section[cda:templateId [@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.104.6']]/ cda:component[count(cda:section[cda: templateId[@root='1.2.392.200270.3.2.2.1.2.1. 6.3']])=1]"	偶発症(ERCP)が記述されてい ません

付録 - 3. 印刷／表示例

付録-1.4. サンプルコードのスタイルシートを利用した場合の表示例
【上部1】

JAHIS 病院 上部内視鏡検査レポート

患者名	テスト 患者1
誕生日	July 1, 1939
性別	女性
連絡先	自宅住所: 105-0001, 東京都港区虎ノ門7丁目19番9 電話番号: 03-3506-8010
患者ID	000000001 1.2.392.200250.3.3.1.12345678901
診療文書ID	A1120190101101530 1.2.392.200250.2.2.1.9312345678
診療文書作成日時	January 1, 2019, 10:15:30 +0900
主実施医	テスト 医師1
副実施医	テスト 医師2
副実施医	テスト 医師3
副実施医	テスト 医師4
作成者	テスト 医師1
連絡先	勤務先住所: 105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070
受取人 (依頼者)	テスト 医師1
受取人所属組織 (依頼科)	消化器科内科
法的文書承認者	テスト 医師1 signed at January 1, 2019, 10:15:30 +0900
連絡先	105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070
文書作成保管組織	JAHIS病院
連絡先	勤務先住所: 105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070

Table of Contents

- 患者基本情報 (JED)
- 患者背景情報 (上部)
- 依頼情報 (上部)
- 検査時情報 (上部)
- 偶発症情報 (上部)
- 総合診断上部

患者基本情報 (JED)

年齢 : 79

患者背景情報 (上部)

ASA Grade : 1:大きな問題はない

抗血栓薬 :

抗血栓薬	休薬期間	置換
ワルファリン	休薬なし	
チエノピリジン	休薬なし	

喫煙 : 非喫煙者

飲酒 : 機会飲酒者

悪性腫瘍家族歴 (両親、兄弟・姉妹・実子) : なし

他臓器癌歴 : なし

萎縮度 (木村竹本分類) : C-0

ヘリコバクター・ピロリ感染状態 : 陰性

抗血栓薬：

抗血栓薬	休薬期間	置換
ワルファリン	休薬なし	
チエノピリジン	休薬なし	

喫煙：非喫煙者

飲酒：機会飲酒者

悪性腫瘍家族歴（両親、兄弟・姉妹・実子）：なし

他臓器癌歴：なし

萎縮度（木村竹本分類）：C-0

ヘリコバクター・ピロリ感染状態：陰性

依頼情報（上部）

予定性：予定

外来・入院：外来

検査目的：胃癌以外の経過観察

検査時情報（上部）

挿入経路：経口

スコープ機種名：GIF-H290Z

鎮痙剤使用：なし

鎮静・鎮痛・麻酔：BZD

送気：空気

内視鏡看護師・技師名：テスト 看護師1、テスト 看護師2

偶発症情報（上部）

手技中偶発症：

手技中偶発症（上部）	対応	転帰
なし		

手技後偶発症：

手技後偶発症（上部）	対応	転帰
なし		

総合診断上部

食道診断：

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
食道裂孔ヘルニア 滑脱型						

胃診断：

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
異常所見なし						潰瘍瘢痕は目立たない。

十二指腸診断：

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
異常所見なし						潰瘍瘢痕は目立たない。

JAHIS 病院 下部内視鏡検査レポート

患者名	テスト 患者61
誕生日	May 24, 1949
性別	男性
連絡先	自宅住所: 105-0001, 東京都港区虎ノ門7丁目19番9 電話番号: 03-3506-8010
患者ID	1000000011 1.2.392.200250.3.3.1.12345678901
診療文書ID	A1120190204121530 1.2.392.200250.2.2.1.9312345678
診療文書作成日時	February 4, 2019, 16:30:18 +0900
主実施医	テスト 医師 5 0
副実施医	テスト 医師 5 1
副実施医	テスト 医師 5 2
副実施医	テスト 医師 5 3
作成者	テスト 医師50
連絡先	勤務先住所: 105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070
受取人（依頼者）	テスト 医師3
受取人所属組織（依頼科）	消化器科内科
法的文書承認者	テスト 医師50 signed at February 4, 2019, 16:30:18 +0900
連絡先	105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070
文書作成保管組織	JAHIS病院
連絡先	勤務先住所: 105-0004, 東京都港区新橋7丁目5番5号 電話番号: 03-3506-8070

Table of Contents

- [患者基本情報（JED）](#)
- [患者背景情報（下部）](#)
- [依頼情報（下部）](#)
- [検査時情報（下部）](#)
- [偶発症情報（下部）](#)
- [総合診断（下部）](#)

患者基本情報（JED）

年齢：69

患者背景情報（下部）

検査回数（生涯）：非初回

ASA Grade：1:大きな問題はない

抗血栓薬：

抗血栓薬	休薬期間	置換
ワルファリン	休薬なし	
チエノピリジン	休薬なし	

喫煙：非喫煙者

飲酒：非飲酒者

大腸癌家族歴（両親、兄弟・姉妹・実子）：なし

他臓器癌歴：なし

腹部手術歴：なし

依頼情報（下部）

外来・入院：入院

検査目的：内視鏡切除

検査時情報（下部）

スコープ機種名：CF-HQ290ZI

鎮痙剤使用：グルカゴン

鎮静・鎮痛・麻酔：なし

送気：CO2

到達部位：盲腸

画像強調観察：（光）デジタル法、拡大

挿入時間（分）：5

全施行時間（分）：50

腸管前処置：Excellent

内視鏡看護師・技師名：テスト 看護師1、テスト 看護師2、テスト 看護師5、テスト 技師1

偶発症情報（下部）

手技中偶発症：

手技中偶発症（下部）	対応	転帰
なし		

総合診断（下部）

ワーファリン継続で施行

大腸診断：

質的診断	部位	存在所見	処置	デバイス	病理組織診断	コメント
腺腫	上行結腸 AV から 65cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 5mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P1 一括切除、病変番号(#A)			
腺腫	上行結腸 AV から 61cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P2 クリップ 1個、病変番号(#B)			2分経ってもoozingが続くためシユアクリップで止血
腺腫	横行結腸 中部	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P3 病変番号(#C)			
锯齿状病変 hyperplastic polyp、疑い	横行結腸 中部	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 4mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P4 病変番号(#D)			
腺腫	下行結腸 AV から 60cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 6mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P5 病変番号(#E)			
腺腫	S状結腸 AV から 26cm	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 8mm、肉眼型：Is(無茎性)	Cold Snare ポリペクトミー...P6 病変番号(#F)			
锯齿状病変 hyperplastic polyp	S状結腸	大きさ・周在性:内視鏡的長径(最大径) 5mm、肉眼型：IIa(表面隆起型)				
痔核		大きさ・周在性:なし				

付録 - 4. 作成者名簿

作成者(社名五十音順)

大森 真一	オリンパスメディカルシステムズ(株)
尾崎 孝史	オリンパスメディカルシステムズ(株)
越後 洋一	日本光電工業(株)
福重 二三男	(株)日立ハイテク
龍田 岳一	富士フイルム(株)
三浦 悟朗	富士フイルム(株)

改定履歴		
日付	バージョン	内容
2021/ 8 / 10	Ver. 1.0	初版
2026/XX/XX	Ver. 1.1	<p>主な改定内容は以下の通り。</p> <p>(1) Ver.1.0 作成後に判明した誤記や不整合箇所修正</p> <p>(2) JED 研究機構(JEDi)と調整しきれていなかった箇所(主に選択可能な項目値の数)の修正</p> <p>(3) observation クラスにおいて観測値(観測の結果算出された値)としての時間情報は effectiveTime ではなく value 要素に記載するように修正</p>

(JAHIS標準 XX-XXX)

2026 年XX 月発行

JAHIS 内視鏡検査レポート構造化記述規約 Ver.1.1

発行元 一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目5番5号
(新橋2丁目MTビル5階)

電話 03-3506-8010 FAX 03-3506-8070

(無断複写・転載を禁ず)